


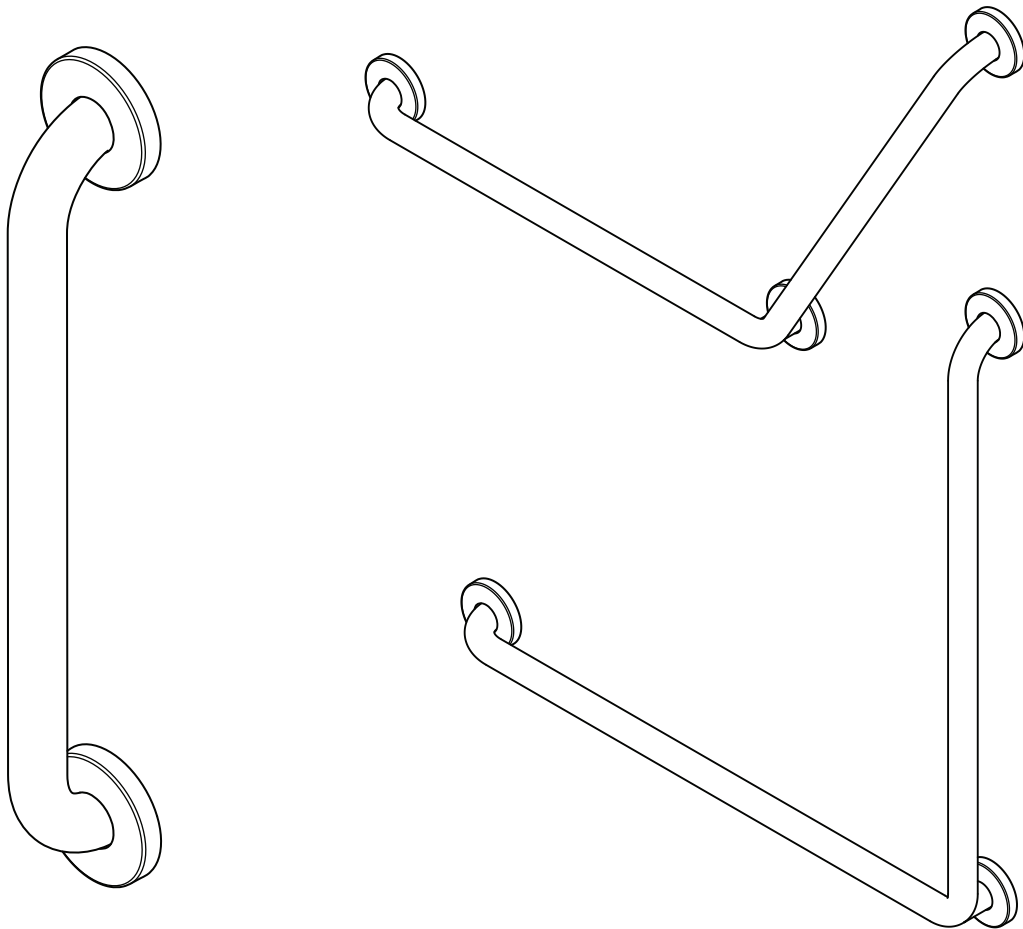

Easy Mount™ Grab Bar

GB-XX
(DC199 - RevE)

healthcraftproducts.com

OVERVIEW

Thank you for choosing the Easy Mount™ Grab Bar. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Easy Mount™ Grab Bar is properly installed and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Easy Mount™ Grab Bar installed by a qualified contractor.

The Easy Mount™ Grab Bar is intended for moderate vertical and horizontal load-bearing, providing sitting and standing support for people with disabilities. It should be installed with appropriate fasteners to a structural wall. The maximum user weight for this product is 500lbs / 227kg for bar lengths of 12", 18", 24" and L-shape, and 400lbs / 181kg for lengths of 32", 36", 42" and 120° grab bar.

Note: Product is not intended to support full body weight. The Easy Mount™ Grab Bar is not to be used in any other way than described above.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon.

Specifications subject to change without notice.

Manufacturer: HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, CA, K1T 3T7. 1-888-619-9992. Patent Pending. © 2026 HealthCraft Products Inc.

DELIVERY CONTENTS

FIGURE A.

1. Grab Bar
2. #10 x 2" wood screw, S/S (x6 for standard GB, x8 for L/120° GB)

INSTALLATION WARNINGS

FIGURE B.

1. Bar must be installed to walls that are structurally sound. Bar may be mounted horizontally across two studs, on an angle across two studs, or vertically on one stud.
- 2a. CAUTION - Do not install if there is no structure behind drywall or if there is no structure for one side.
- 2b. If desired installation location does not have adequate structure, add wood blocking OR
- 2c. To reinforce hollow walls, we recommend Easy Mount™ Anchors (sold separately). Weight capacity 300lbs.
- 3a. CAUTION - Do not install in fiberglass / acrylic shower enclosures with insufficient stiffness and strength.
- 3b. Add wood blocking if required.
- 3c. To reinforce fiberglass, we recommend Easy Mount™ Anchors (sold separately). Weight capacity 300lbs.
4. CAUTION - Do not install into metal studs.
5. CAUTION - Do not install if structure behind walls is unknown.

SUGGESTED PRODUCT LOCATION

FIGURE C.

For horizontal orientation of the grab bar, align the notch on the flange with the center of vertical studs – so that, ideally, 3 screws will contact a stud. To determine the optimal mounting location, we recommend holding the bar in place and walking through the motions of a transfer (sitting, standing, reaching, etc.). ADA recommended bar height of 33-36" / 838-914mm.

INSTALLATION - L SHAPED / 120° GRAB BARS

FIGURE D.

1. Mark location of the corner flange fasteners.
2. Install fasteners, leave enough room for plate.
3. Lower the bar onto the fasteners. Continue installing by following Figure E instructions.

INSTALLATION - GRAB BARS

FIGURE E.

1. Slide flange covers off and out of the way. Hold the bar against the wall, adjust using a level, and mark the screw hole locations.
2. Drill pilot holes for fasteners.
3. Fasten the bar to the wall using appropriate fasteners (min 2 per flange) and sealant.
4. Slide flange covers back onto flanges. Inspect the hardware monthly, and tighten if required.

PRODUCT USAGE

FIGURE F.

CAUTION - Grab bar and bathtub are slippery when wet.

TECHNICAL DATA

FIGURE G.

- *Complies with ADA 609.2 Cross Section - Grab Bars.
- *Complies with ADA 609.3 Spacing - Grab Bars.
- *Complies with ADA 609.8 Structural Strength - Grab Bars.

APERÇU

Merci d'avoir choisi la barre d'appui Easy Mount™. Veuillez lire et comprendre les instructions de ce manuel ; gardez-le pour référence ultérieure. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre barre d'appui Easy Mount™ est bien installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Si vous n'êtes pas équipé pour effectuer les travaux décrits, nous vous recommandons de faire installer votre barre d'appui Easy Mount™ par un entrepreneur qualifié.

La barre d'appui Easy Mount™ est conçue pour supporter des charges verticales et horizontales modérées afin de fournir un soutien assis et debout aux personnes handicapées. Elle doit être fixée à un mur porteur à l'aide de fixations appropriées. Le poids maximal de l'utilisateur pour ce produit est de 227 kg / 500 lb pour les longueurs de 12", 18", 24" et les barres en forme de L, et de 181 kg / 400 lb pour les longueurs de 32", 36", 42", et les barres à 120°.

Remarque: Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids total du corps. La barre d'appui Easy Mount™ ne doit pas être utilisée d'une autre manière que celle décrite ci-dessus.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits sont couverts par une garantie à vie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication pour l'acheteur initial. La garantie exclut les produits endommagés suite à une mauvaise utilisation, un accident, une modification, l'usure normale, l'utilisation de bois et de teintures, ou l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.

Par les présentes, l'acheteur s'engage à indemniser et à défendre HealthCraft Products Inc. contre toute responsabilité, réclamation (fondée ou non), perte, dommage, coût et dépense (y compris, sans s'y limiter, les dommages indirects et les honoraires professionnels raisonnables) résultant des spécifications, de l'application ou de la mauvaise utilisation des produits décrits dans les présentes par l'acheteur, ainsi que de toute omission ou négligence de sa part. HealthCraft Products Inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services effectués par des tiers, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise application des produits vendus par HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. ne sera pas responsable des bénéfices potentiels, des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ni du coût de toute intervention corrective effectuée sans l'approbation préalable de HealthCraft Products Inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products Inc. en vertu des présentes ne saurait en aucun cas ne dépasse le prix d'achat des produits spécifiés aux présentes.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fabricant : HealthCraft Products Inc. 2790, chemin Fenton, Ottawa (CA) K1T 3T7. 1 888 619-9992. Brevet en instance. © 2026 HealthCraft Products Inc.

CONTENU DE LA LIVRAISON

FIGURE A.

1. Barre d'appui
2. Vis à bois n° 10 x 2 po, inox (x6 pour GB, x8 pour L/120° GB)

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

FIGURE B.

1. La barre doit être installée sur des murs structurellement sains. Elle peut être montée horizontalement sur deux montants, en angle sur deux montants, ou verticalement sur un seul montant.
- 2a. ATTENTION : Ne pas installer si aucune structure n'est présente derrière la cloison sèche ou si l'un des côtés est dépourvu de structure.
- 2b. Si l'emplacement d'installation souhaité ne présente pas une structure adéquate, ajouter des cales en bois OU
- 2c. Pour renforcer les murs creux, nous recommandons les ancrages Easy-Mount™ (vendus séparément). Capacité de charge: 136 kg (300 lb).
- 3a. ATTENTION : Ne pas installer dans les parois de douche en fibre de verre/acrylique insuffisamment rigides et résistantes.
- 3b. Ajouter des cales en bois si nécessaire.
- 3c. Pour renforcer la fibre de verre, nous recommandons les ancrages Easy-Mount™ (vendus séparément). Capacité de charge: 136 kg (300 lb).
4. ATTENTION : Ne pas installer dans des montants métalliques.
5. ATTENTION : Ne pas installer si la structure derrière les murs est inconnue.

EMPLACEMENT SUGGÉRÉ DU PRODUIT

FIGURE C.

Pour une orientation horizontale de la barre d'appui, alignez l'encoche sur la bride avec le centre des montants verticaux – de sorte que, idéalement, 3 vis entrent en contact avec un montant. Pour déterminer l'emplacement de montage optimal, nous recommandons de maintenir la barre en place et d'effectuer les mouvements d'un transfert (assis, debout, étirement, etc.). Hauteur de barre recommandée par l'ADA de 838-914mm / 33-36po.

INSTALLATION - BARRE D'APPUI EN FORME DE L / 120° FIGURE D.

1. Marquer l'emplacement des vis du coin.
2. Installer les vis. Laissez suffisamment d'espace entre la tête et le mur pour la plaquette.
3. Placez la barre sur les vis. Continuez l'installation en suivant les étapes de la figure E.

INSTALLATION - BARRE D'APPUI

FIGURE E.

1. Retirez les caches des brides. Tenez la barre contre le mur, ajustez-la avec un niveau et marquez l'emplacement des trous de vis.
2. Percer des avant-trous pour les fixations.
3. Fixez la barre au mur à l'aide des fixations (min 2 par bride) et du mastic appropriés.
4. Remettez les couvercles des brides en place. Inspectez la quincaillerie chaque mois et resserrez-la si nécessaire.

UTILISATION DU PRODUIT

FIGURE F.

ATTENTION – La barre d'appui et la baignoire sont glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

DONNÉES TECHNIQUES

FIGURE G.

- *Conforme à la section transversale des barres d'appui (norme ADA 609.2)
- *Conforme à l'espacement des barres d'appui (norme ADA 609.3).
- *Conforme à la résistance structurelle des barres d'appui (norme ADA 609.8)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Gracias por elegir la barra de apoyo Easy Mount™. Lea y comprenda las instrucciones de este manual; consérvelo para futuras consultas. Es su responsabilidad asegurarse de que su barra de apoyo Easy Mount™ se instale y mantenga correctamente. No seguir las instrucciones de este manual podría provocar lesiones graves o la muerte. Si no cuenta con el equipo necesario para realizar el trabajo descrito, le recomendamos que encargue la instalación de su barra de apoyo Easy Mount™ a un contratista cualificado.

La barra de apoyo Easy Mount™ está diseñado para soportar cargas verticales y horizontales moderadas, brindando apoyo para sentarse y pararse a personas con discapacidades. Debe instalarse con sujetadores apropiados a una pared estructural. El peso máximo del usuario de este producto es de 500 lb / 227 kg para la larga 12", 18", 24" y barras en forma de L, y 400 lb / 181 kg para la larga 32", 36", 42" y barras de 120°.

Nota: El producto no está diseñado para soportar todo el peso corporal. La barra de apoyo Easy Mount™ no debe utilizarse de ninguna otra manera que la descrita anteriormente.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida contra defectos de materiales y mano de obra para el comprador original. La garantía excluye los productos dañados por mal uso, daños accidentales, alteraciones, desgaste normal, materiales de madera y tintes, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por la presente, el comprador indemniza y se compromete a eximir de responsabilidad y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamación (fundada o infundada), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, entre otros, daños emergentes y honorarios profesionales razonables) que resulten de la especificación, aplicación o uso indebido de los productos aquí descritos por parte del comprador, o de la omisión o negligencia del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de servicios prestados por terceros ni por la instalación defectuosa, el mal uso o la aplicación incorrecta de los productos vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable de posibles ganancias ni de daños especiales, indirectos o emergentes, ni del costo de cualquier trabajo correctivo realizado sin la aprobación previa de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente documento no excederá en ningún caso el precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricante: HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, CA, K1T 3T7. 1-888-619-9992. Patente en trámite. © 2026 HealthCraft Products Inc.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

FIGURA A.

1. Barra de apoyo
2. Tornillo para madera n.º 10 x 2", inox (x6 para GB, x8 para L/120° GB)

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

FIGURA B.

1. La barra debe instalarse en paredes estructuralmente sólidas. Se puede montar horizontalmente sobre dos montantes, en ángulo sobre dos montantes o verticalmente sobre un solo montante.
- 2a. PRECAUCIÓN: No la instale si no hay estructura detrás del panel de yeso o si no hay estructura en un lado.
- 2b. Si el lugar de instalación no tiene una estructura adecuada, agregue bloques de madera. O
- 2c. Para reforzar paredes huecas, recomendamos anclajes Easy-Mount™ (se venden por separado). Capacidad de peso: 136 kg (300 lb).
- 3a. PRECAUCIÓN: No la instale en mamparas de ducha de fibra de vidrio/acrílico con poca rigidez y resistencia.
- 3b. Agregue bloques de madera si es necesario.
- 3c. Para reforzar la fibra de vidrio, recomendamos anclajes Easy-Mount™ (se venden por separado). Capacidad de peso: 136 kg (300 lb).
4. PRECAUCIÓN: No la instale en montantes metálicos.
5. PRECAUCIÓN: No la instale si desconoce la estructura detrás de las paredes.

UBICACIÓN SUGERIDA DEL PRODUCTO

FIGURA C.

Para la orientación horizontal de la barra de apoyo, alinee la muesca en la brida con el centro de los montantes verticales, de modo que, idealmente, 3 tornillos entren en contacto con un montante. Para determinar la ubicación óptima de montaje, recomendamos sujetar la barra en su lugar y realizar los movimientos necesarios para una transferencia (sentarse, levantarse, alcanzar objetos, etc.). Altura de barra recomendada por ADA de 33-36" / 838-914 mm.

INSTALACIÓN - BARRA DE APOYO EN FORME DE L / 120° FIGURA D.

1. Marque la ubicación de los tornillos de las esquinas.
2. Instale los tornillos. Deje suficiente espacio entre la cabeza y la pared para el plato.
3. Coloque la barra sobre los tornillos. Continúe con la instalación siguiendo los pasos de la figura E.

INSTALACIÓN - BARRA DE APOYO

FIGURA E.

1. Retire las tapas de las bridas. Sostenga la barra contra la pared, ajústela con un nivel y marque la ubicación de los agujeros para los tornillos.
2. Taladre agujeros guía para los sujetadores.
3. Fije la barra a la pared con los sujetadores (mínimo 2 por brida) y el sellador adecuados.
4. Vuelva a colocar las tapas de las bridas en las bridas. Inspeccione los herrajes mensualmente y ajústelos si es necesario.

USO DEL PRODUCTO

FIGURA E.

PRECAUCIÓN – La barra de apoyo y la bañera están resbaladizas cuando están mojadas.


DATOS TÉCNICOS

FIGURA F.

- *Cumple con la norma ADA 609.2 Sección transversal - Barras de apoyo.
- *Cumple con la norma ADA 609.3 Espaciamiento - Barras de apoyo.
- *Cumple con la norma ADA 609.8 Resistencia estructural - Barras de apoyo.

A - DELIVERY CONTENTS

1

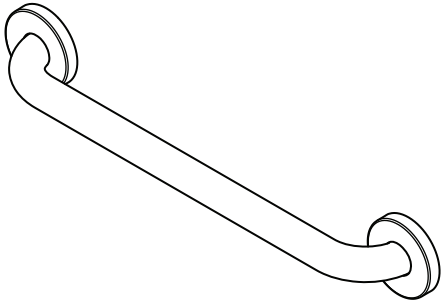

2







x6



B - INSTALLATION WARNINGS



1

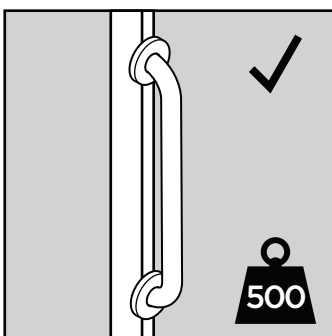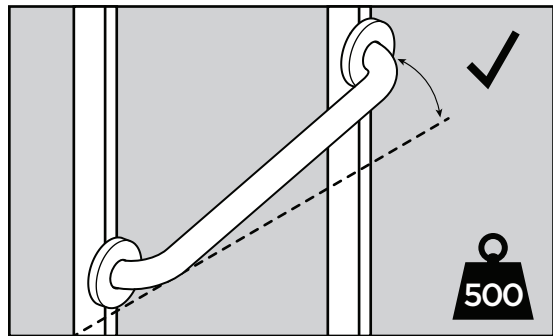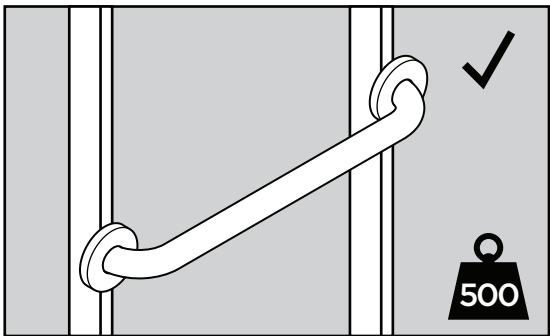
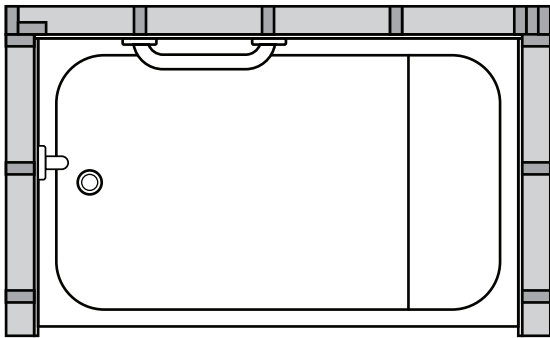






B - INSTALLATION WARNINGS





2a

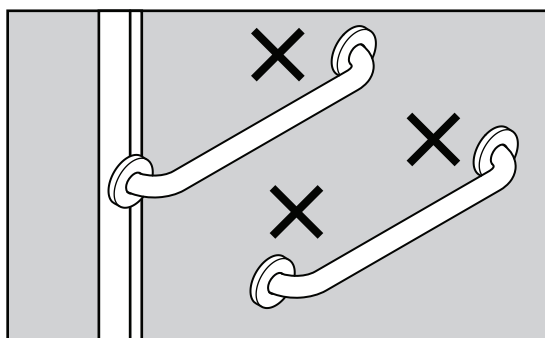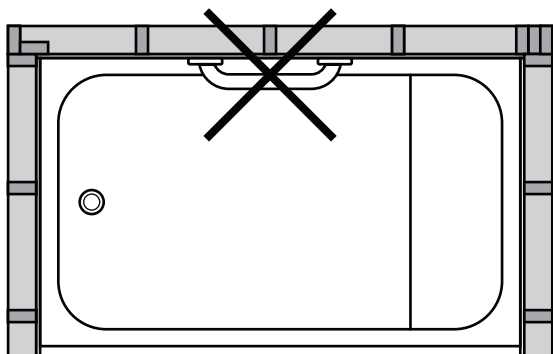

2b

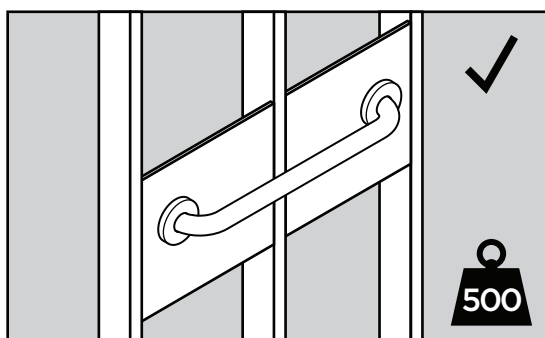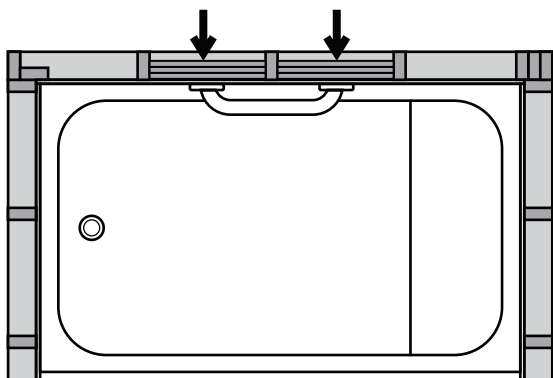

2c

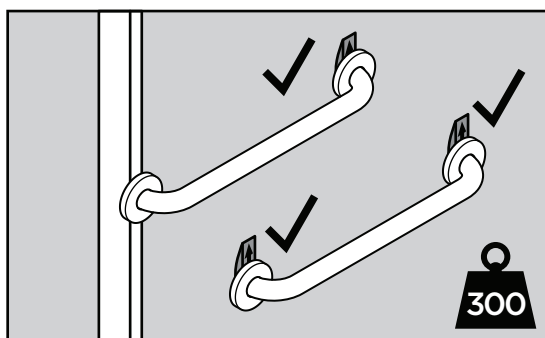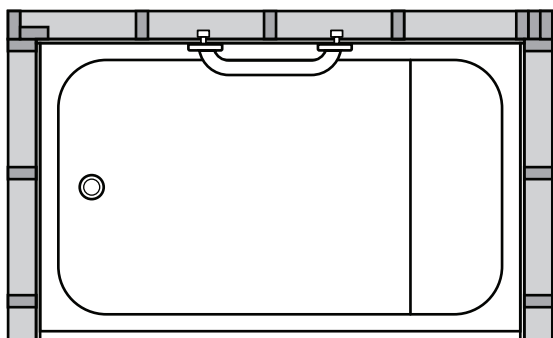





B - INSTALLATION WARNINGS




3a

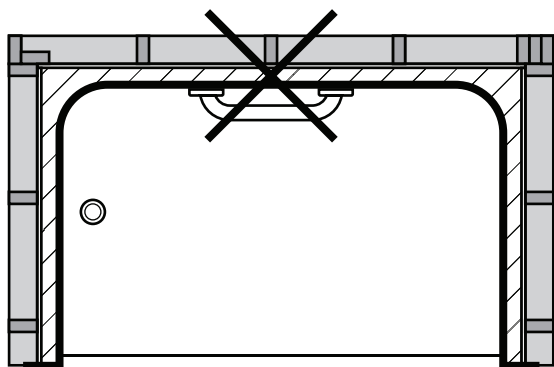


3b

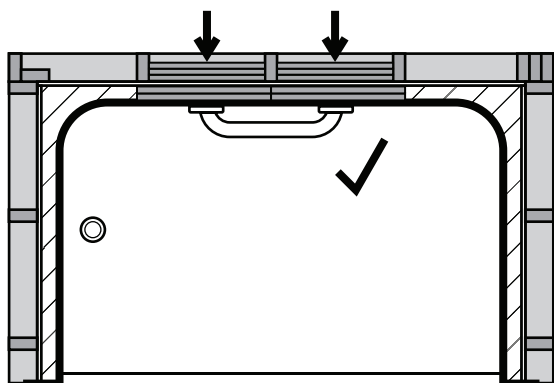


3c

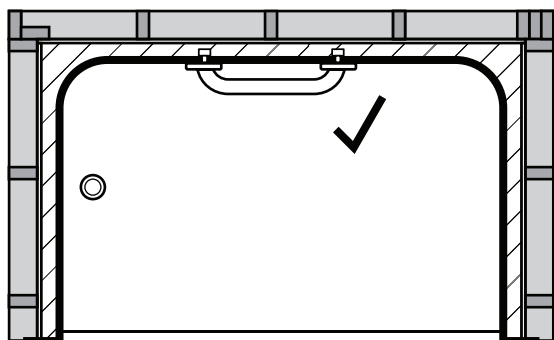



4

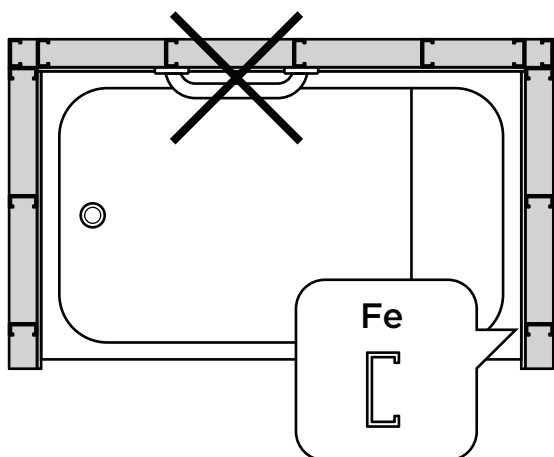


5

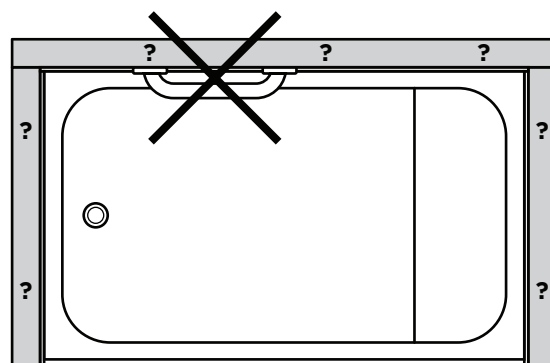


C - SUGGESTED PRODUCT LOCATION

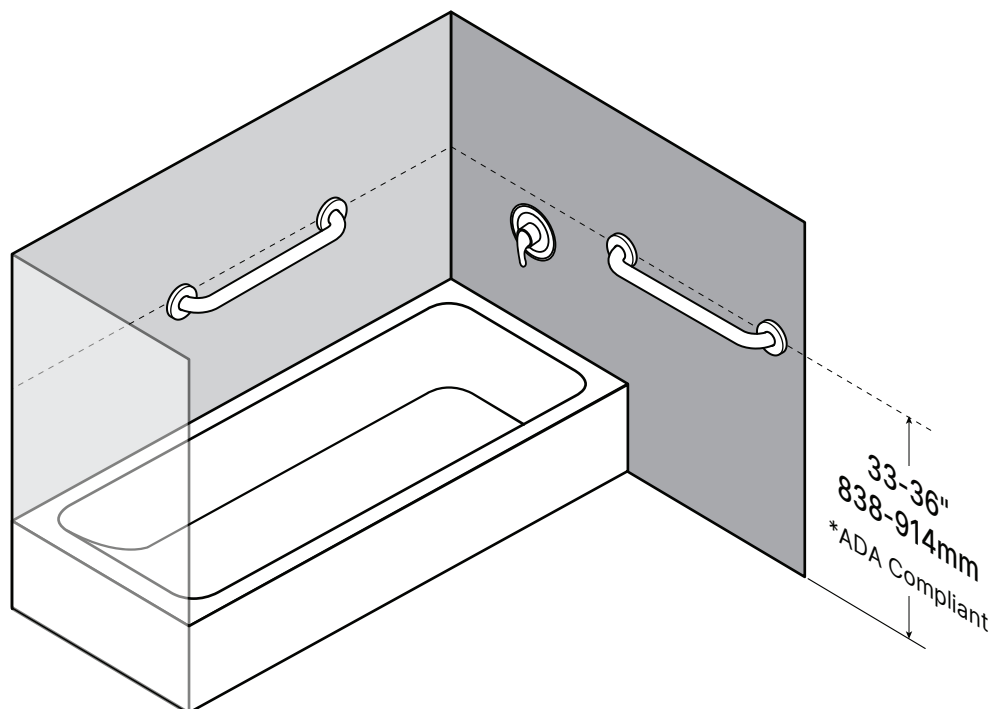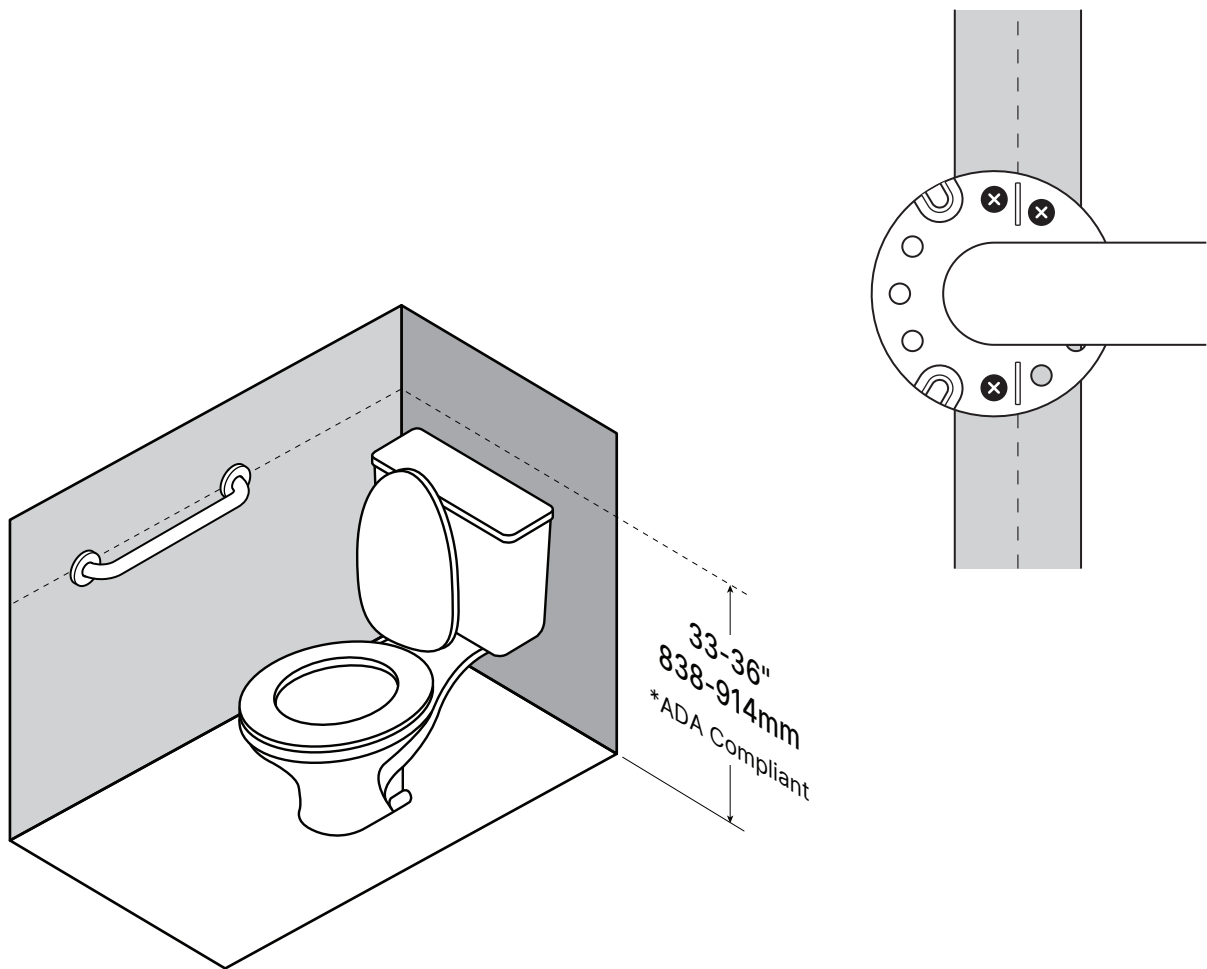



D - INSTALLATION FOR L SHAPED / 120° GRAB BARS

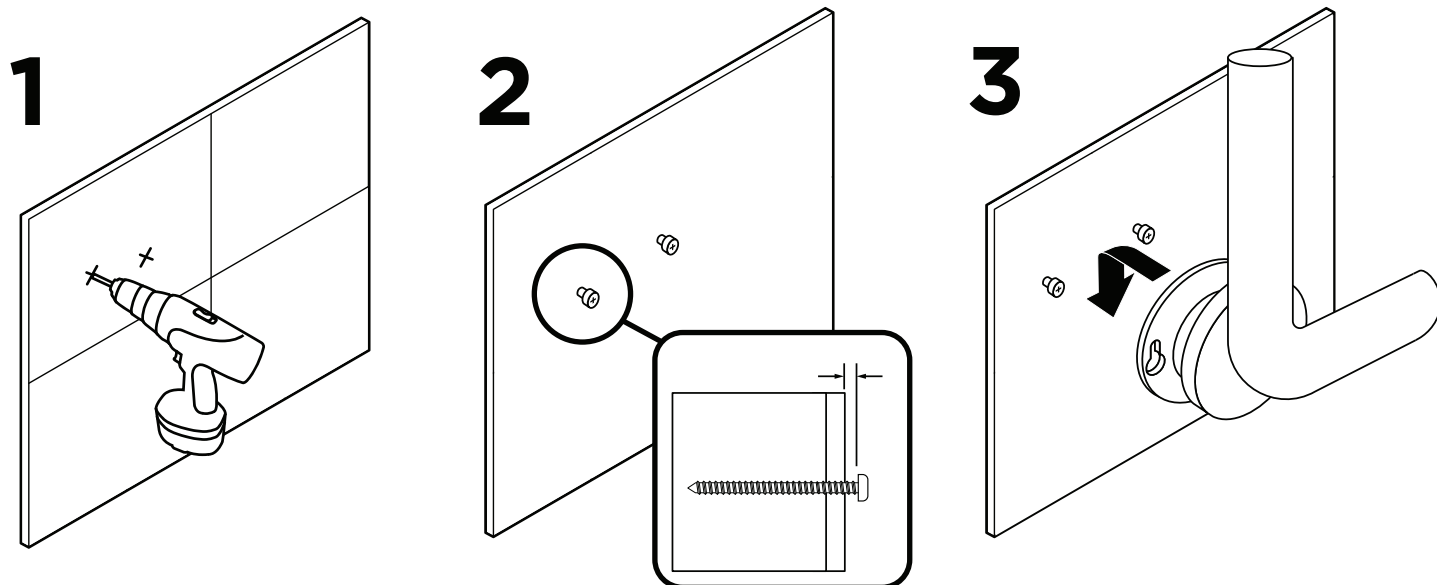


E - INSTALLATION FOR GRAB BARS

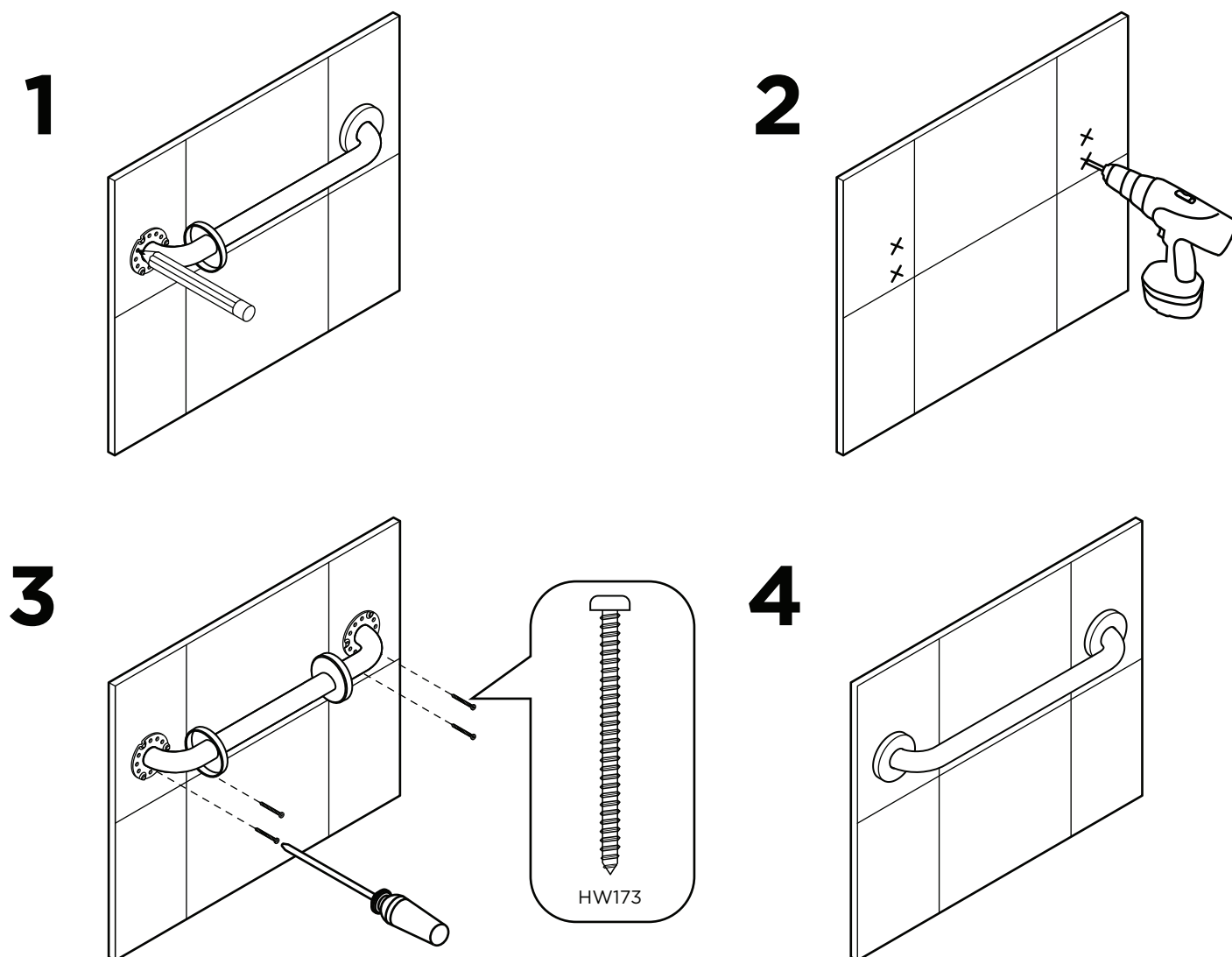

F - PRODUCT USAGE

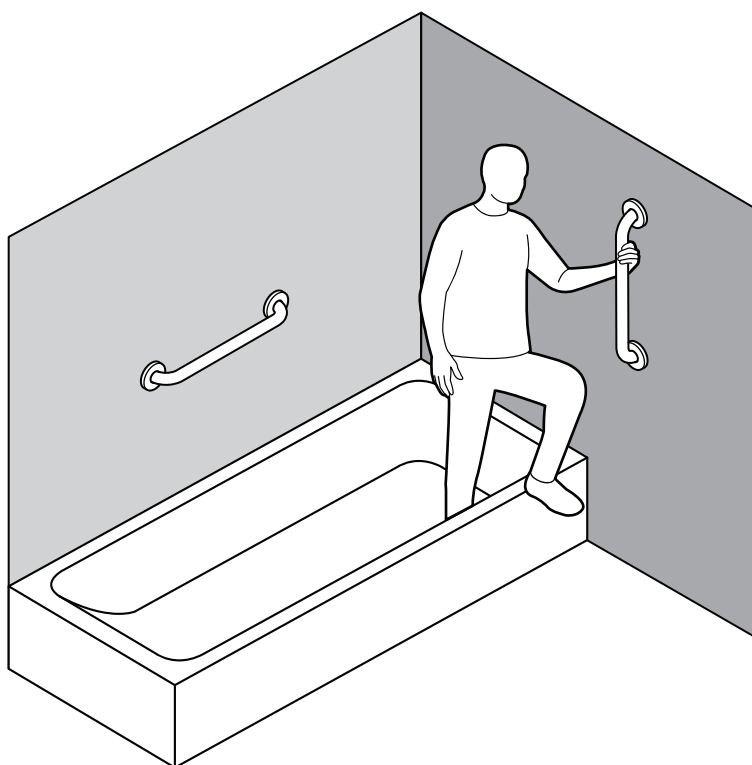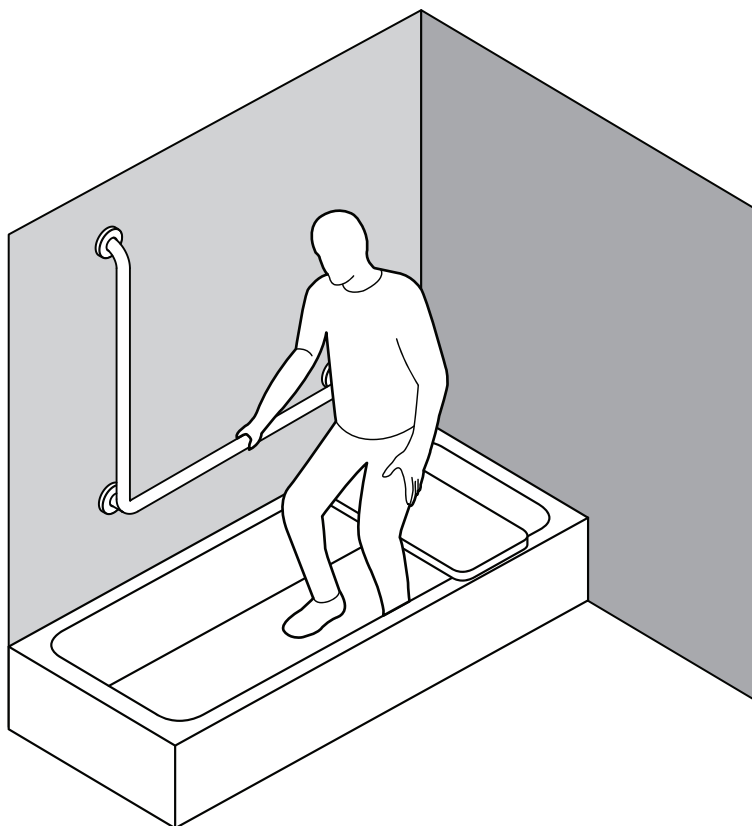


G - TECHNICAL DATA

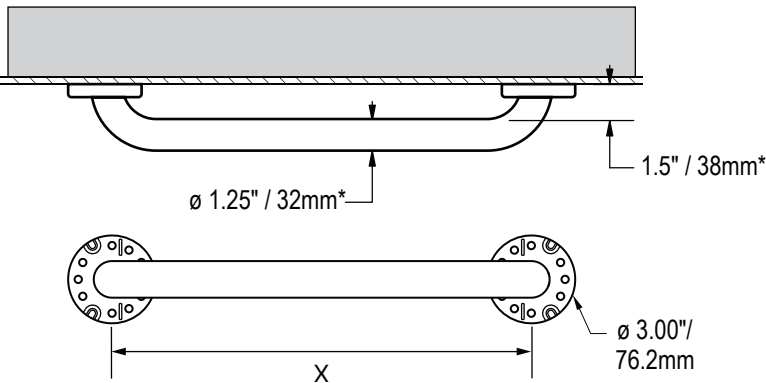


LENGTH (X)		MAX USER WEIGHT	
12"	305 mm	500 lbs	227 kg
18"	457 mm		
24"	610 mm		
32"	813 mm	400 lbs	181 kg
36"	914 mm		
42"	1067 mm		

*ADA Compliant

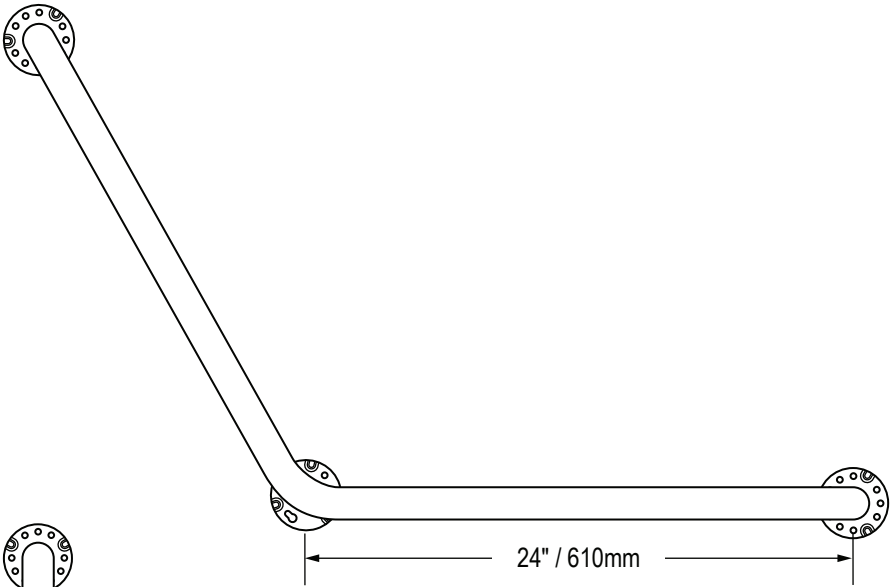

MAX
500 lbs
227kg

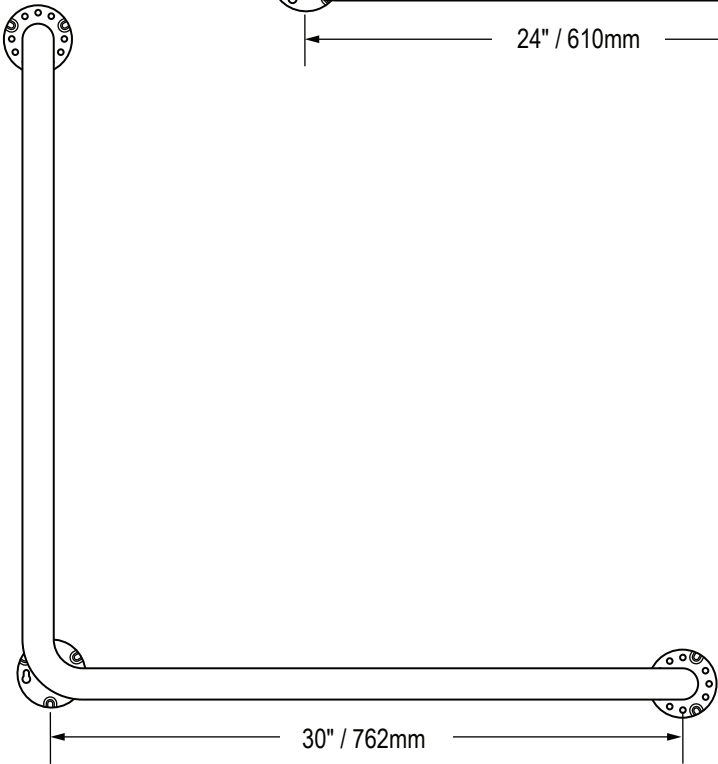

MAX
400 lbs
227kg