




User manual


Clean

etac[®]
Creating Possibilities


78644 - 2026-02-16 - Version 21

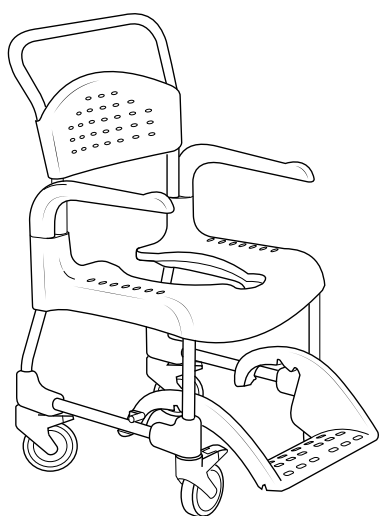

Clean

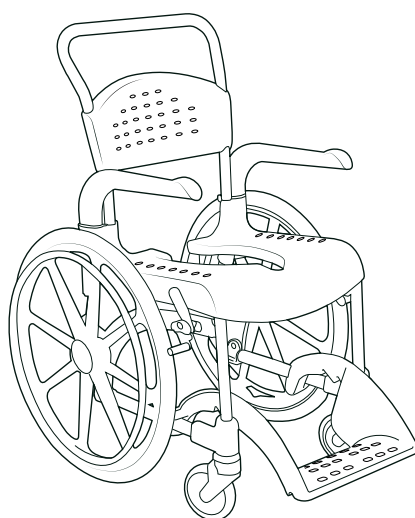

Clean 24"

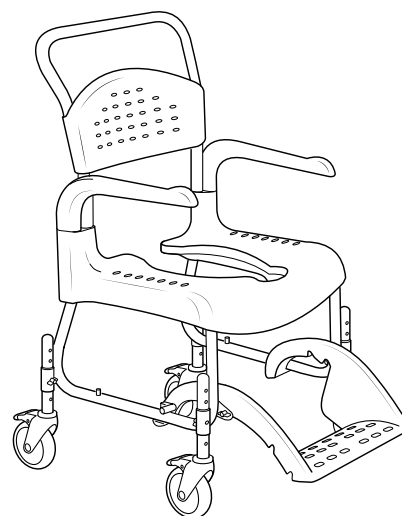

**Clean
Height adjustable**

sv en da de it nl no bg cs el es et fi fr hr is lt ms pl pt sk ar



www.etac.com

MD



sv	Innehållsförteckning	
	Bilder.....	3-9
	Allmänt.....	10
	Produktbeskrivning.....	11
	Symboler, etiketter.....	11
	Tekniska data.....	11
	Handhavande.....	11
	Inställningar.....	11
	Service/Underhåll, garanti.....	12
	Transport, förvaring och kassering.....	12
	Tillbehör.....	13

en	Contents	
	Illustrations.....	3-9
	General.....	14
	Device description.....	15
	Symbols, labels.....	15
	Technical data.....	15
	Handling.....	15
	Settings.....	15
	Service and maintenance.....	16
	Transport, storage and disposal.....	16
	Accessories.....	17

da	Indhold	
	Illustrationer.....	3-9
	Generelt.....	18
	Beskrivelse af produktet.....	19
	Symboler, mærkater.....	19
	Tekniske data.....	19
	Håndtering.....	19
	Indstillinger.....	19
	Service og vedligeholdelse.....	20
	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	20
	Tilbehør.....	21

de	Inhalt	
	Abbildungen.....	3-9
	Allgemeines.....	22
	Produktbeschreibung.....	23
	Symbole, Beschriftungen.....	23
	Technische Daten.....	23
	Handhabung.....	23
	Einstellungen.....	23
	Service und Wartung.....	24
	Transport, Lagerung und Entsorgung.....	24
	Zubehör.....	25

it	Sommario	
	Illustrazioni.....	3-9
	Informazioni generali.....	26
	Descrizione del dispositivo.....	27
	Simboli, etichette.....	27
	Dati tecnici.....	27
	Manipolazione.....	27
	Impostazioni.....	27
	Assistenza e manutenzione.....	28
	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	28
	Accessori.....	29

nl	Inhoud	
	Afbeeldingen.....	3-9
	Algemeen.....	30
	Beschrijving hulpmiddel.....	31
	Symbolen, labels.....	31
	Technische gegevens.....	31
	Handteren.....	31
	Instellingen.....	31
	Service en onderhoud.....	32
	Transport, opslag en verwijdering.....	32
	Accessoires.....	33

no	Innhold	
	Illustrasjoner.....	3-9
	Generelt.....	34
	Produktbeskrivelse.....	35
	Symboler, etiketter.....	35
	Tekniske data.....	35
	Håndtering.....	35
	Instillinger.....	35
	Service og vedlikehold.....	36
	Transport, lagring og avfallshåndtering.....	36
	Tilbehør.....	37

bg	Съдържание	
	Илюстрации.....	3-9
	Общи.....	38
	Описание на изделието.....	39
	Символи, етикети.....	39
	Технически данни.....	39
	Боравене.....	39
	Настройки.....	39
	Обслужване и поддръжка.....	40
	Транспорт, съхранение и изхвърляне.....	40
	Принадлежности.....	41

cs	Obsah	
	Obrázky.....	3-9
	Obečné informace.....	42
	Popis zařízení.....	43
	Symboly, štítky.....	43
	Technické údaje.....	43
	Manipulace.....	43
	Nastavení.....	43
	Servis a údržba.....	44
	Přeprava, skladování a likvidace.....	44
	Príslušenství.....	45

el	Περιεχόμενα	
	Εικόνες.....	3-9
	Γενικά.....	46
	Περιγραφή ιατροτεχνολογικού προϊόντος.....	47
	Σύμβολα, ετικέτες.....	47
	Τεχνικά δεδομένα.....	47
	Χειρισμός.....	47
	Ρυθμίσεις.....	47
	Εργασίες επισκευής και συντήρησης.....	48
	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	48
	Παρελκόμενα.....	49

es	Índice	
	Ilustraciones.....	3-9
	Información general.....	50
	Descripción del dispositivo.....	51
	Símbolos, etiquetas.....	51
	Datos técnicos.....	51
	Manipulación.....	51
	Configuración.....	51
	Servicio y mantenimiento.....	52
	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	52
	Accesorios.....	53

et	Sisukord	
	Joonised.....	3-9
	Üldine teave.....	54
	Seadme kirjeldus.....	55
	Sümbolid, sildid.....	55
	Tehnilised andmed.....	55
	Käsitsemise.....	55
	Seadistused.....	55
	Korrasõid ja hooldus.....	56
	Transport, hoiustamine ja kõrvaldamine.....	56
	Tarvikud.....	57

fi	Sisältö	
	Kuvat.....	3-9
	Yleistä.....	58
	Laitteen kuvaus.....	59
	Symbolit ja tarrat.....	59
	Tekniset tiedot.....	59
	Käsitely.....	59
	Asetukset.....	59
	Huolto ja kunnossapito.....	60
	Kuljetus, varastointi ja hävittäminen.....	60
	Lisävarusteet.....	61

fr	Table des matières	
	Illustrations.....	3-9
	Généralités.....	62
	Description du dispositif.....	63
	Pictogrammes, étiquettes.....	63
	Caractéristiques techniques.....	63
	Manipulation.....	63
	Paramètres.....	63
	Entretien et maintenance.....	64
	Transport, stockage et élimination.....	64
	Accessoires.....	65

hr	Sadržaj	
	Ilustracije.....	3-9
	Općenito.....	66
	Opis uređaja.....	67
	Simboli, oznake.....	67
	Tehnički podaci.....	67
	Rukovanje.....	67
	Postavke.....	67
	Servis i održavanje.....	68
	Prijevoz, skladištenje i odlaganje.....	68
	Dodatna oprema.....	69

is	Efnisyfirlit	
	Myndir.....	3-9
	Almennt.....	70
	Lýsing á tæki.....	71
	Tákn, merkingar.....	71
	Tæknilegar upplýsingar.....	71
	Meðferð.....	71
	Stillingar.....	71
	Þjónusta og viðhald.....	72
	Flutningur, geymsla og förgun.....	72
	Fylgihlutir.....	73

it	Turinys	
	Illustrazioni.....	3-9
	Bendroji informacija.....	74
	Prietaiso aprašymas.....	75
	Simboliai, etiketės.....	75
	Techniniai duomenys.....	75
	Tvarkymas.....	75
	Nustatymai.....	75
	Priežiūra ir techninė priežiūra.....	76
	Transportavimas, laikymas ir šalinimas.....	76
	Priedai.....	77

ms	Kandungan	
	Ilustrasi.....	3-9
	Umum.....	78
	Penerangan peranti.....	79
	Simbol, label.....	79
	Data teknikal.....	79
	Pengendalian.....	79
	Tetapan.....	79
	Perkhidmatan dan penyelenggaraan.....	80
	Pengangkutan, penyimpanan dan pelupusan.....	80
	Aksesori.....	81


pl	Spis treści	
	Ilustracje.....	3-9
	Informacje ogólne.....	82
	Opis wyrobu.....	83
	Symbol, etykiety.....	83
	Dane techniczne.....	83
	Użytkowanie.....	83
	Ustawienia.....	83
	Czynności serwisowe i konserwacja.....	84
	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	84
	Akcesoria.....	85

pt	Índice	
	Ilustrações.....	3-9
	Generalidades.....	86
	Descrição do dispositivo.....	87
	Símbolos, etiquetas.....	87
	Especificações técnicas.....	87
	Manuseamento.....	87
	Definições.....	87
	Assistência e manutenção.....	88
	Transporte, armazenamento e eliminação.....	88
	Acessórios.....	89


sk	Obsah	
	Obrázky.....	3-9
	Všeobecné.....	90
	Popis pomôcky.....	91
	Symboly, štítky.....	91
	Technické údaje.....	91
	Manipulácia.....	91
	Nastavenia.....	91
	Servis a údržba.....	92
	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	92
	Príslušenstvo.....	93

ar	المحتويات	
	الرسوم التوضيحية.....	3-9
	عام.....	95
	وصف المنتج.....	94
	الرموز والملصقات.....	94
	البيانات الفنية.....	94
	أعمال الشحن والتفريغ.....	94
	الإعدادات.....	94
	الخدمة والصيانة.....	97
	نقل الجهاز وتخزينه والتخلص منه.....	97
	الملحقات.....	96


A

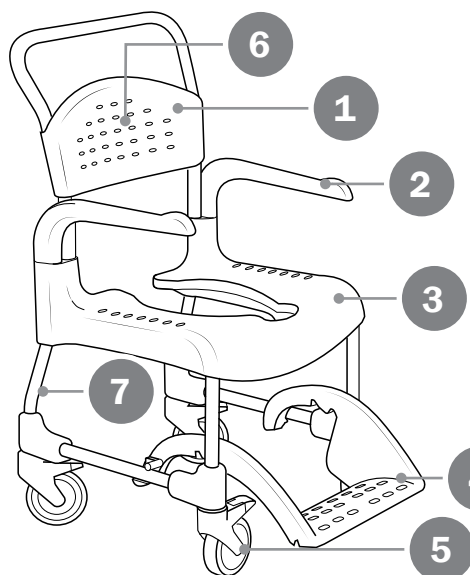

Clean

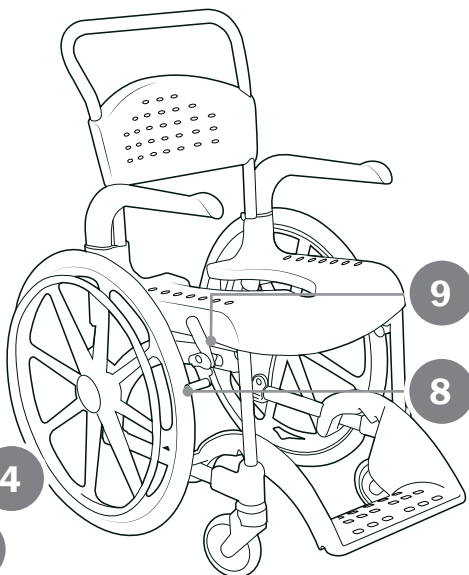

Clean 24"

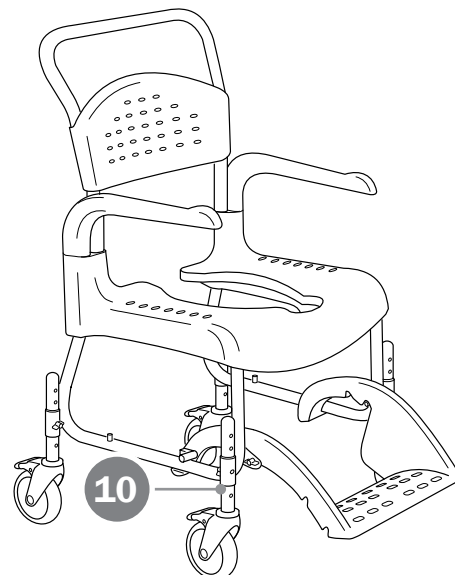

**Clean
Height adjustable**

B

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	

22

15

16

UD I

Bar code GS1-128

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(21)XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

REF XXXXXXXXXX

SN XXXXXX

17

18

19

20




21


CE

MD

Etac Supply Center AB
 Långgatan 12
 SE-334 33 Anderstorp
 YYYY-MM-DD

C


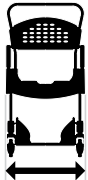
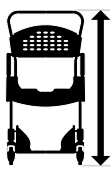
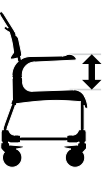
						
Clean 44	50 cm (19 ³ / ₄ ")	56.5 cm (22 ¹ / ₄ ")	98 cm (38 ¹ / ₂ ")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	33 / 41 cm (13 / 16")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")
Clean 49	50 cm (19 ³ / ₄ ")	56.5 cm (22 ¹ / ₄ ")	103 cm (40 ¹ / ₂ ")	49 cm (19 ³ / ₄ ")	33 / 41 cm (13 / 16")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")
Clean 55	50 cm (19 ³ / ₄ ")	56.5 cm (22 ¹ / ₄ ")	107 cm (42")	55 cm (21 ¹ / ₂ ")	39 / 47.5 cm (15 ¹ / ₄ / 18 ³ / ₄ ")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")
Clean 60	50 cm (19 ³ / ₄ ")	56.5 cm (22 ¹ / ₄ ")	112 cm (44")	60 cm (23 ¹ / ₂ ")	39 / 47.5 cm (15 ¹ / ₄ / 18 ³ / ₄ ")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")
Clean 24"	67 cm (26 ¹ / ₄ ")	74 cm (29")	107 cm (42")	55 cm (21 ¹ / ₂ ")	39 / 47.5 cm (15 ¹ / ₄ / 18 ³ / ₄ ")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")
Clean H. adj.	54 cm (21 ¹ / ₄ ")	56.5 cm (22 ¹ / ₄ ")	102 / 114.5 cm (40 ¹ / ₄ / 45")	47.5 / 60 cm (18 ³ / ₄ / 23 ¹ / ₂ ")	30 / 44 cm (11 ³ / ₄ / 17 ¹ / ₂ ")	22 cm (8 ¹ / ₂ ")

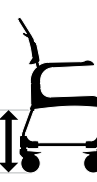								
Clean 44	7.5 cm (3")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	54 cm (21 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	40 cm (15 ³ / ₄ ")*
Clean 49	12.5 cm (5")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	54 cm (21 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	45 cm (17 ³ / ₄ ")*
Clean 55	12.5 cm (5")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	51.5 cm (20 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	49 cm (19 ¹ / ₄ ")*
Clean 60	12.5 cm (5")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	51.5 cm (20 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	54 cm (21 ¹ / ₄ ")*
Clean 24"	12.5 cm (5")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	51.5 cm (20 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	49.5 cm (19 ¹ / ₂ ")*
Clean H. adj.	12.5 cm (5")	36 cm (14")	44 cm (17 ¹ / ₄ ")	54 cm (21 ¹ / ₄ ")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	39 cm (15 ¹ / ₄ ")	56 cm (22")*


					
Clean 44	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	13.5 kg (29.7 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 49	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	14.0 kg (30.8 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 55	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	14.5 kg (31.9 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 60	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	15.0 kg (33 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 24"	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	20.0 kg (44 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean H. adj.	36 cm (14")	21.5 cm (8 ¹ / ₂ ")	35.5 cm (14")	14.2 kg (31.3 lbs)	130 kg (286.6 lbs)

sv *Med Gejder -1.5 cm | **en** *With pan holders -1.5 cm | **da** *Med holdere til bækken - 1,5 cm | **de** *Mit Beckenhalterung - 1,5 cm | **it** *Con supporti per padella - 1,5 cm | **nl** *Met toiletemmerhouders - 1,5 cm | **no** *Med bekkenholdere - 1,5 cm | **bg** *С поставки за легенче - 1,5 cm | **cs** *S držákem na mísu - 1,5 cm | **el** *Με υποδοχές δοχείου - 1,5 cm | **es** *Con guías para cuña - 1,5 cm | **et** *Siibrihoidikutega - 1,5 cm | **fi** *Alusastian pidikkein 1,5 cm | **fr** *Avec glissières pour bassin - 1,5 cm | **hr** *S držačima posude - 1,5 cm | **is** *Með höldum fyrir bekken - 1,5 cm | **lt** *Su unitazo laikikliais, 1,5 cm | **ms** *Dengan pemegang pan - 1,5 cm | **pl** *Z uchwytni basenu - 1,5 cm | **pt** *Com suportes de arrastadeira - 1,5 cm | **sk** *S držiakmi na misu - 1,5 cm | **ar** *مزود بحاملات أو عية - 1,5 سم

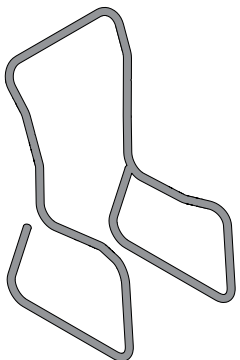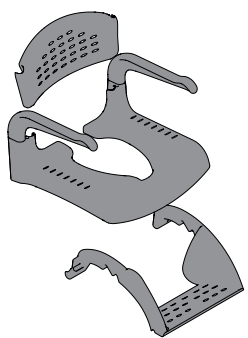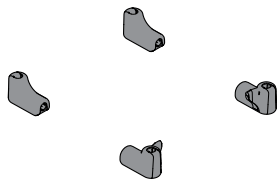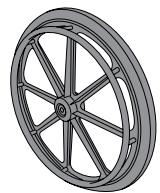


				
Fe	PP	PA	PP/TPV/PA/Fe	PP/TPR


D

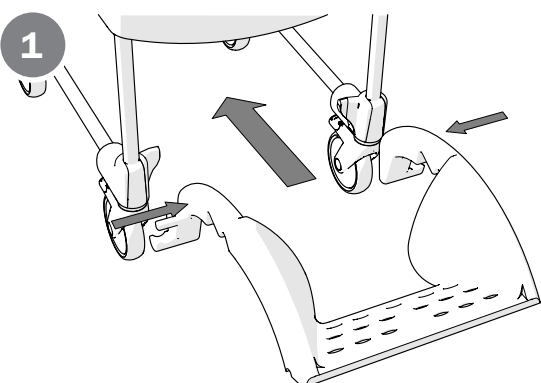


1

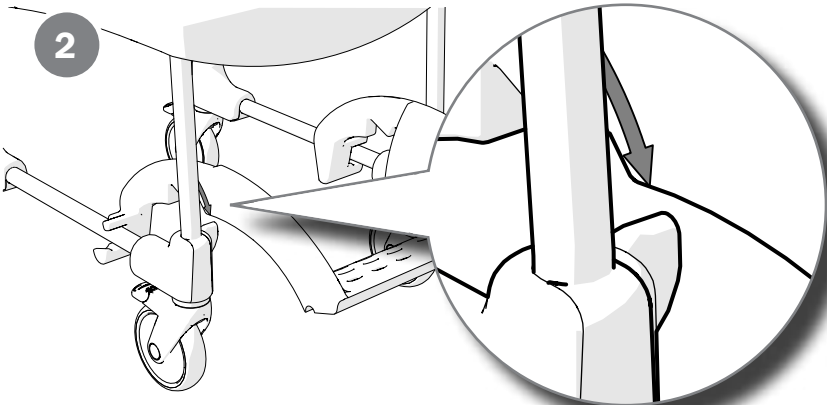


2

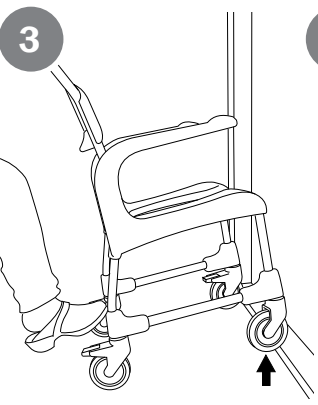


3

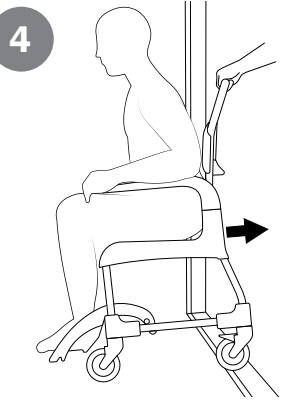


4

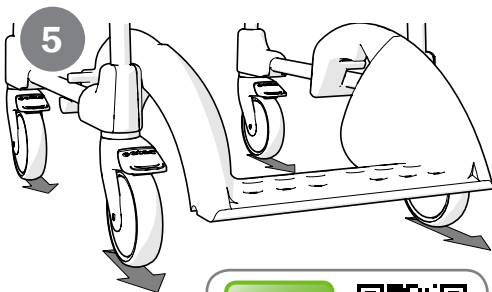


5

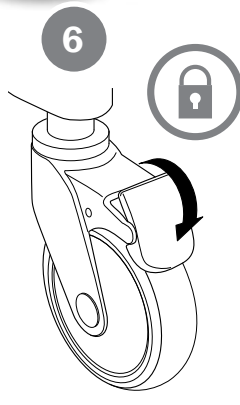


6

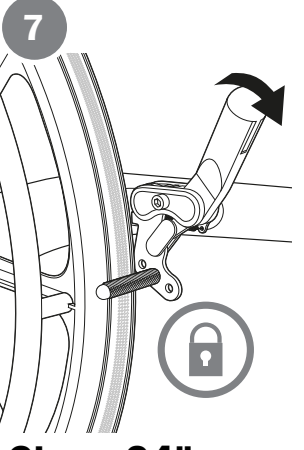


7

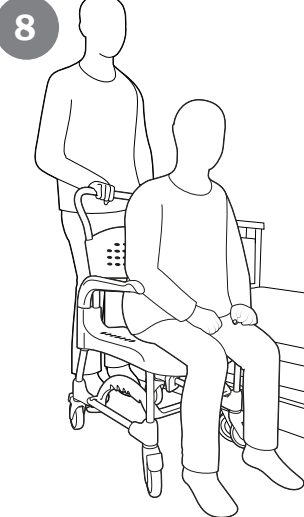

8

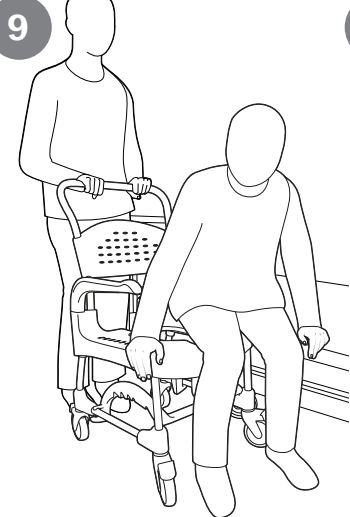

9

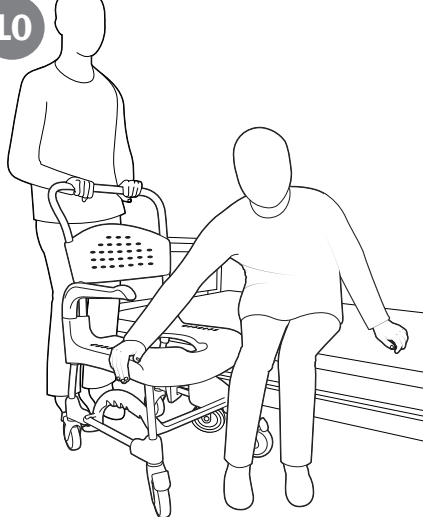


10





VIDEO

Clean 24"


11

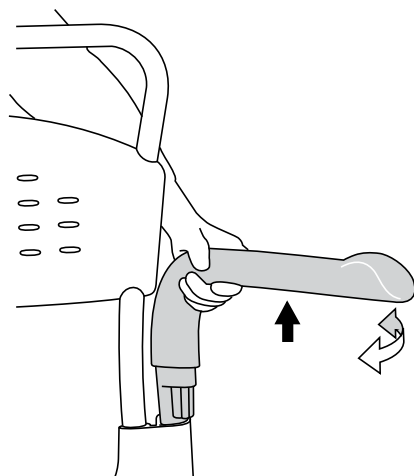


12

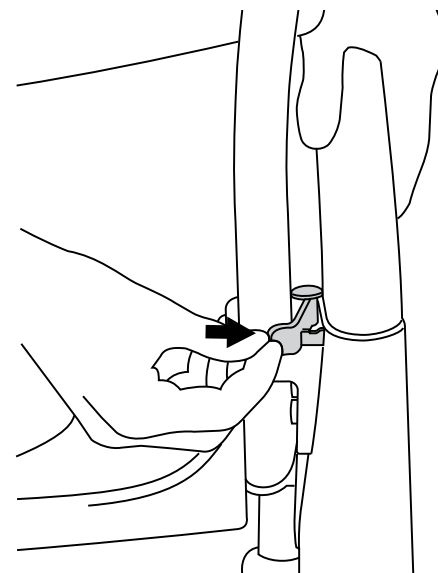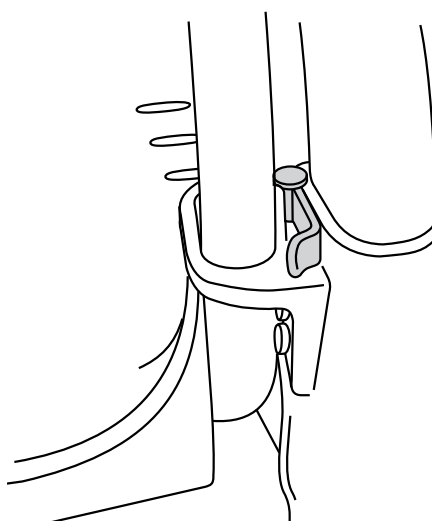








13





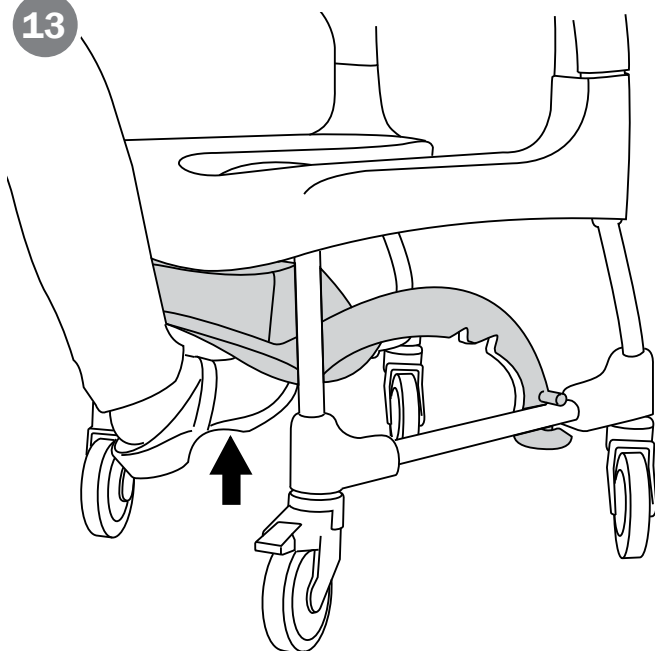


14

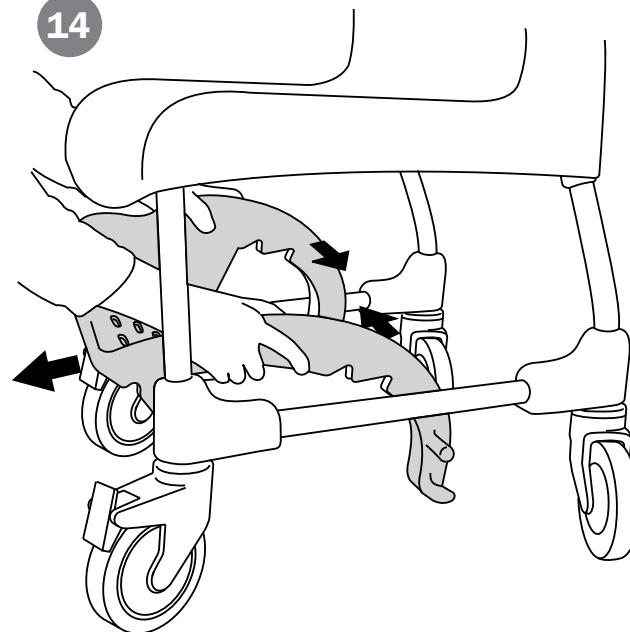


E

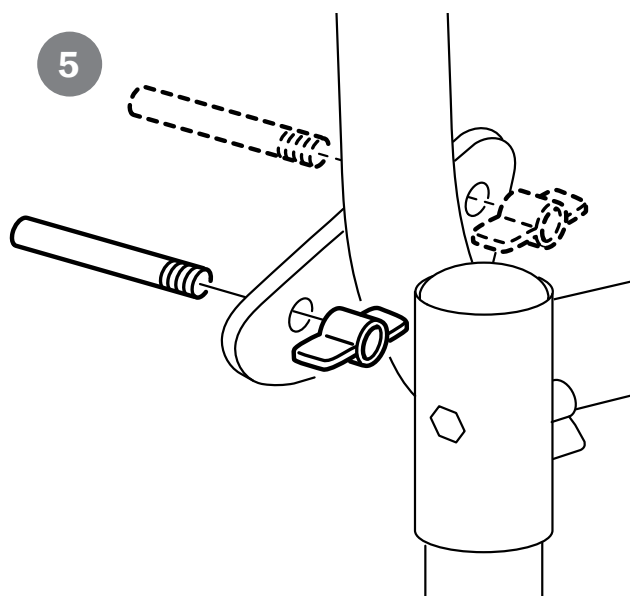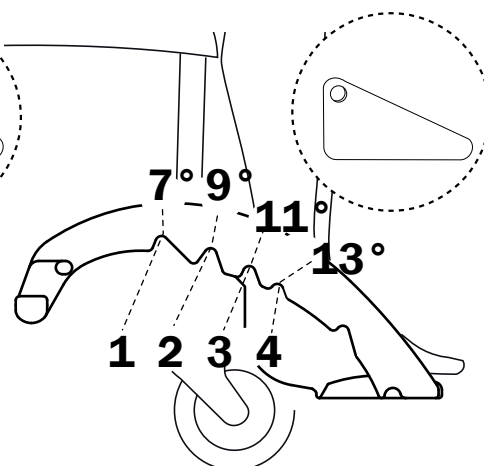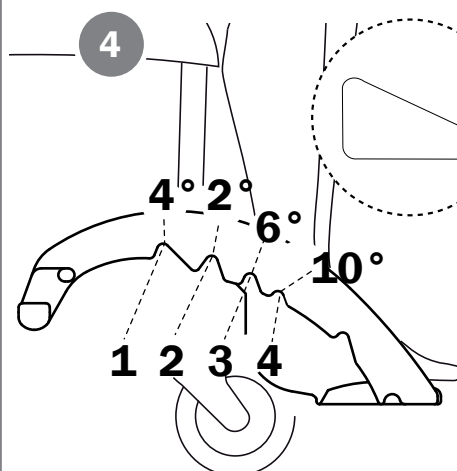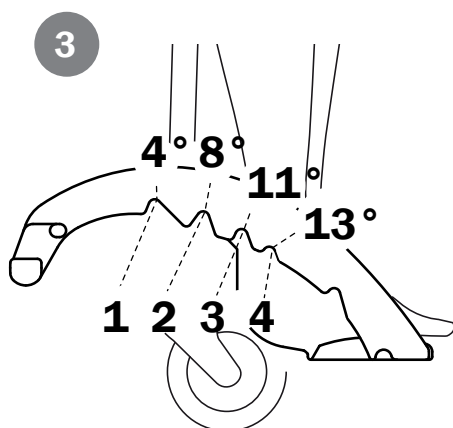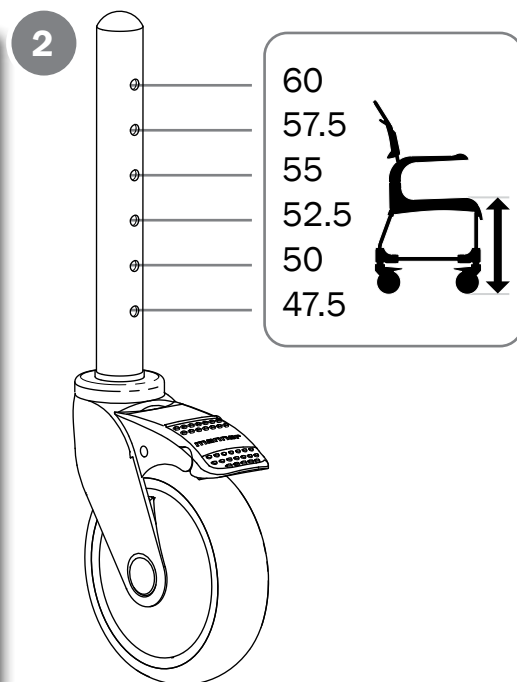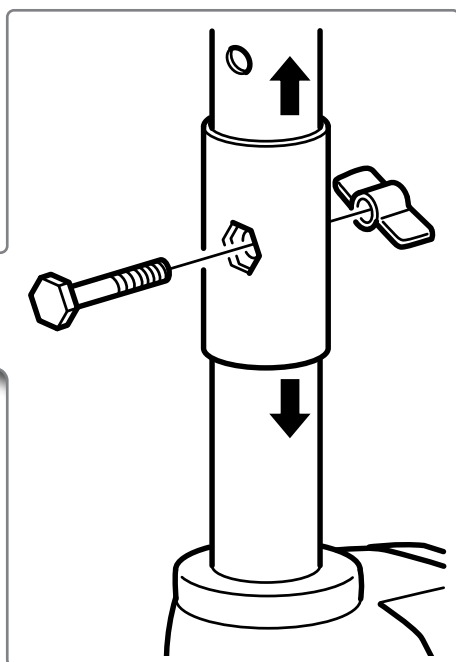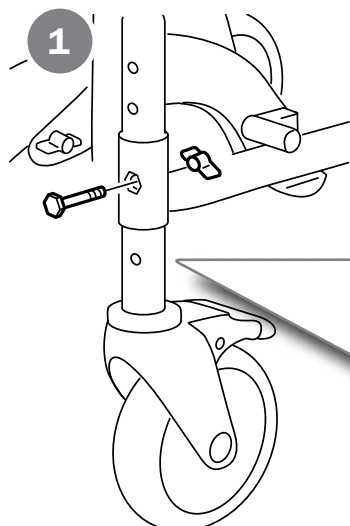

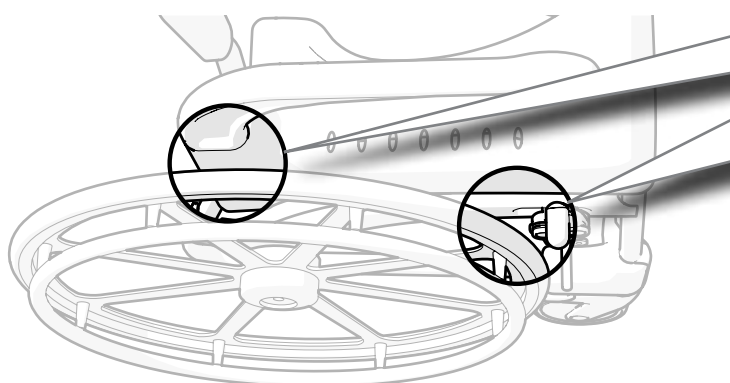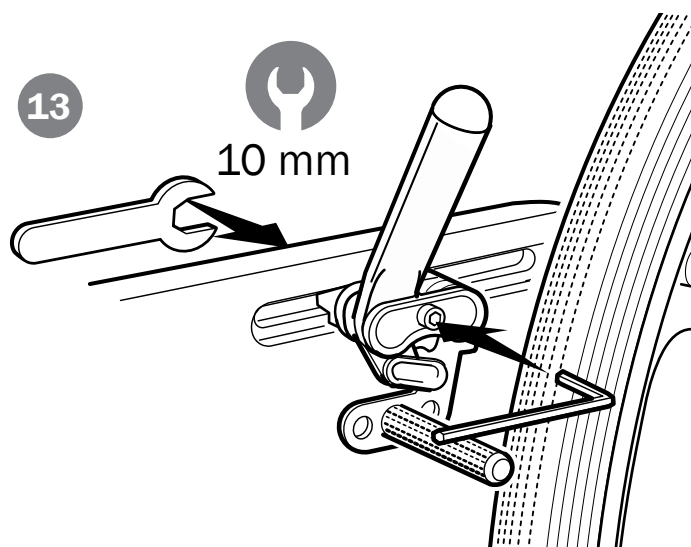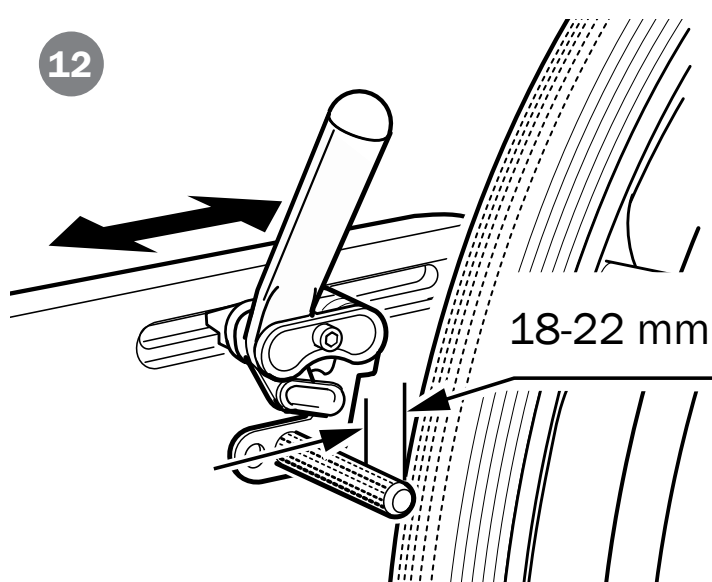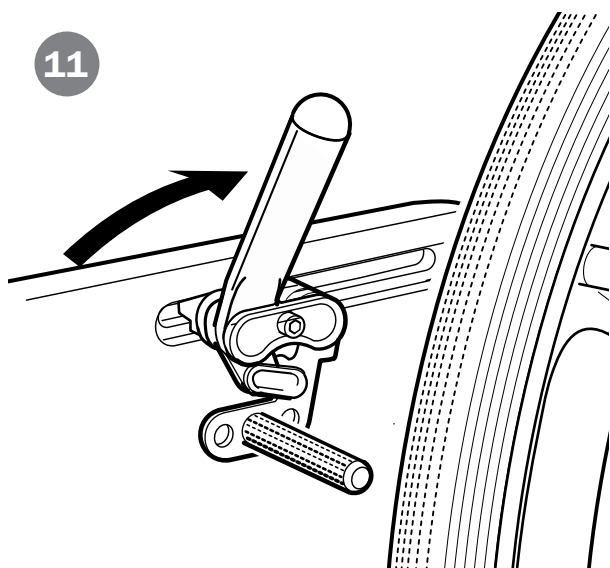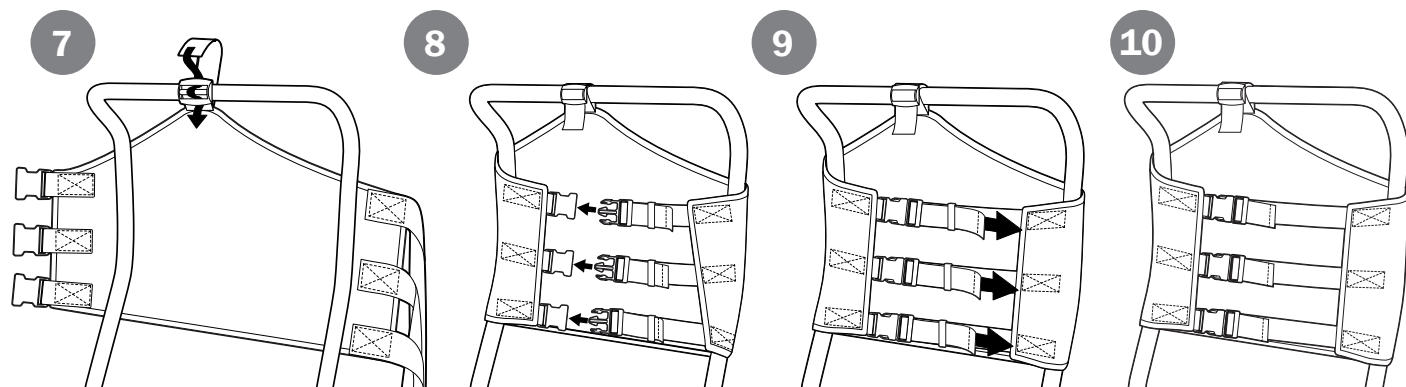

F

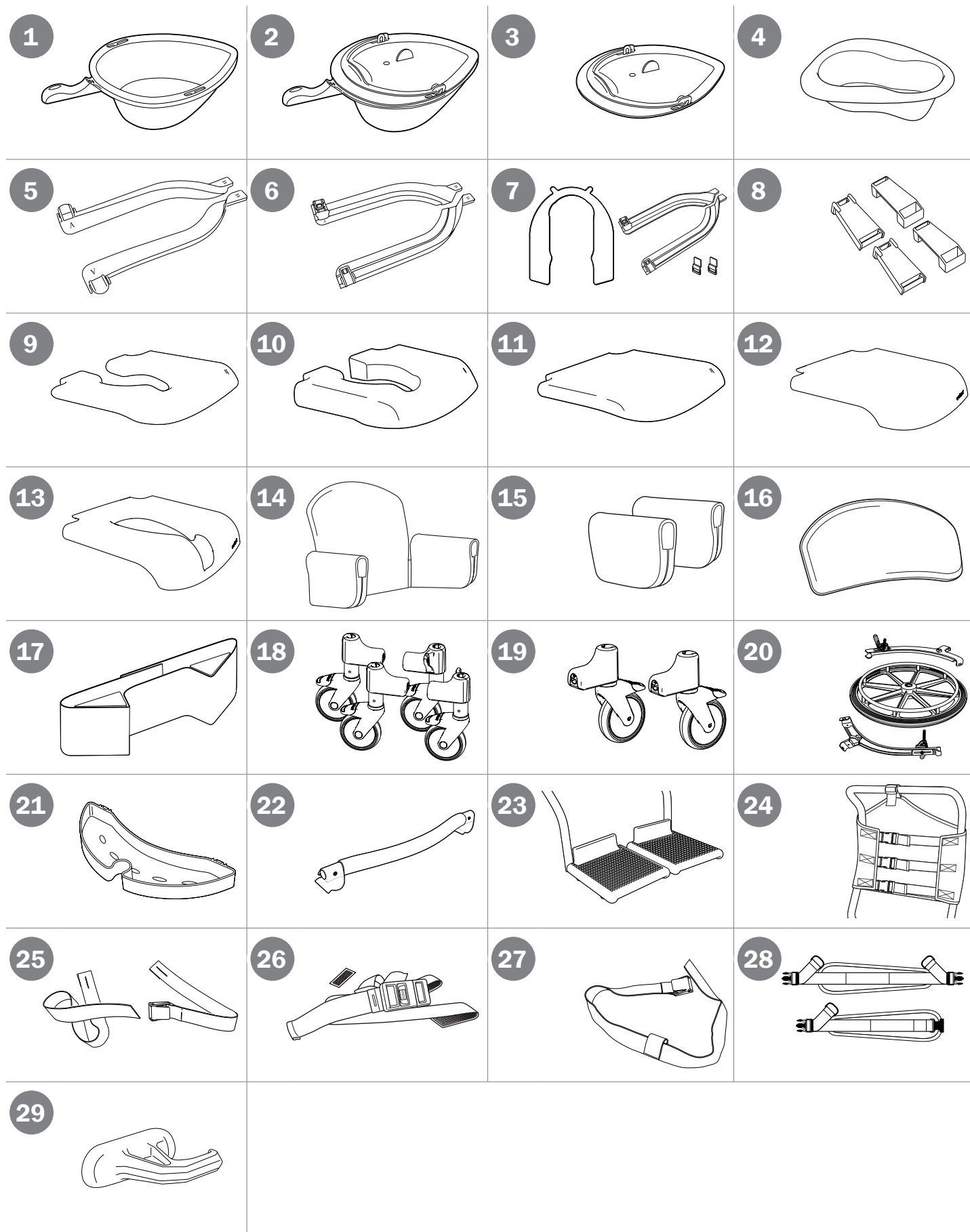

sv Allmänt

Tack för att Du valt en produkt från Etac. För att undvika skador vid montering, hantering och användning, ska denna manual läsas igenom och sparas. Du hittar den också under www.etac.com där Du kan välja språk via länken "International" och "Local websites". Här hittar Du även övrig produktdokumentation som t.ex. förskrivarinformation, förköpsguide och rekonditioneringsanvisning.

I manualen är brukaren den person som sitter i stolen. Hjälparen är den person som assisterar brukaren.

Punktlista: ● = Gäller för, ○ = Tillbehör

Se punktlistan till höger, över vilken information som gäller för respektive produkt.



Början på manualen (sid. 3-9) innehåller de bilder som refereras till i varje stycke. Se figur A-F till motsvarande textstycke.

Produktbeskrivning

Clean-familjen är en serie mobila dusch- och toalettstolar där Clean och Clean Height adjustable manövreras av en hjälpare och Clean 24" kan manövreras av brukaren.

Avsedd användning

Clean, Clean 24" och Clean Height adjustable (härefter även kallade produkten), är medicintekniska produkter avsedda för att lindra eller kompensera ett funktionshinder till följd av en skada eller en funktionsnedsättning.

Produkten är utformad för att användas när man utför personlig hygien i duschen, vid handfatet eller över toaletten, samt för förflyttningar till och från hygienrummet.

Avsedd målgrupp

Den avsedda målgruppen för produkten är baserad på individens funktionsförmåga och inte på en specifik diagnos, hälsotillstånd eller ålder. Produkten är avsedd för personer som är minst 146 cm långa och väger minst 40 kg. Sekundära användare är vårdpersonal som använder produkten och kliniker/tekniker som gör inställningar på den.

Avsedd användarmiljö

Produkten är avsedd för inomhusbruk i hemmiljö eller institutioner och lämpar sig för användning i badrum, men inte i simbassänger eller liknande korrosiva miljöer.

Avsedd tillämpning

Produkten är avsedd för kort- och långvarigt bruk och kan användas flera gånger per dag.

Produkten är avsedd att användas med intakt hud.

Produkten är avsedd för rekonditionering och återanvändning.

Förväntad livslängd

Livslängd 10 år. För fullständig information om produktens livslängd, se www.etac.com.

Indikationer

Indikation för användning är funktionsnedsättning, inklusive, men inte begränsat till, en person med fysiska funktionsnedsättningar som behöver ryggstöd och/eller armstöd för att bibehålla en sittande position och hjälp med förflyttning till/från stolen.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

Varningar

Varningar som beskriver ett riskmoment vid en specifik åtgärd eller inställning av produkten finns i respektive avsnitt.



Kontrollera användarens känslighet för trycksår före användning.



Defekt produkt får inte användas. Risk för personskada.



Upphetad produkt kan orsaka brännskada.



Klämrisk vid användning av bäcken.



Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till personskada.

Deklaration om överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Produkten är testad och uppfyller kraven enligt EN ISO 10993-1 och ISO 17966:2016.

Förköpsinformation

Förköpsinformation hittar du under www.etac.com.

Allvarligt tillbud

Om ett allvarligt tillbud inträffar i samband med användning av produkten ska det utan dröjsmål rapporteras till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

Specialanpassning

är allt som går utanför Manualens instruktioner och inställningar. Produkt specialanpassad av kund får ej behålla Etac:s CE märkning. Etac:s garanti upphör att gälla.

Produktbeskrivning

Se Figur A



A1. Ryggstöd **A2.** Armstöd **A3.** Sits **A4.** Fotstöd **A5.** Länkhjul **A6.** Produktetikett (varningar, CE-märkning)
A7. Artikelnummeretikett (ser.nr., tillverkningsdatum)

A8. Drivhjul **A9.** Brukarbroms

A10. Höjdreglering

Symboler, etiketter

Se figur B

Symboler i manualen och på produkten:

B1. Varning, försiktighetsåtgärd eller begränsning.
B2. Tänkvärda råd och tips. **B3.** Material för återvinning.
B4. Detaljen/funktionen är låst och kan inte flyttas/justeras. **B5.** Klämrisk! **B6.** Verktyg ringnyckel **B7.** Max brukarvikt (se teknisk data). **B8.** Video **B9-C10.** Rengöring (se underhåll). **B11.** Kliv ej på fotstödet, tipprisk.
B12. Sittställningen påverkar stabiliteten. **B13.** Produktvikt
B14. Läs bruksanvisningen innan användning (blå och vit).

Förklaring artikelnummeretikett:

B15. Produktnamn. **B16.** Produktbeskrivning.
B17. Serienummer. **B18.** Artikelnummer. **B19.** CE-märkt
B20. Medicinteknisk produkt **B21.** Tillverkningsdatum.
B22. Streckkod enl GS1-128 GTIN-14 och serienummer.*

*Produkts tillverkningsdatum kan utläsas i den streckkod som finns på produkten. Under streckkoden står siffran 11 inom parentes. Sifferkombinationen efter denna parentes är tillverkningsdatumet.

Tekniska data

Se Figur C

Handhavande

Se Figur D

Montering vid leverans

Förflyttning över tröskel:

Enbart stol, sätt en fot på hjulfästet.

Med brukare, kör stolen baklänges.

Stillastående:



Rikta hjulen framåt och aktivera bromsarna för att minska tipp risken när stolen används stillastående och vid överflyttning. Risk för personskada om produkten välter.

D5



Sitt inte på sitsens framkant. Risk för personskada om produkten välter.

Lås alltid så många hjul som möjligt när stolen används stillastående.

Överflyttning:



Rikta hjulen framåt och aktivera bromsarna för att minska tipp risken när stolen används stillastående och vid överflyttning. Risk för personskada om produkten välter.

Gör en riskbedömning och dokumentera. Som vårdgivare

D1-D2 är du ansvarig för brukarens säkerhet. Bedöms momentet som riskfyllt bör hjälpmedel användas. För hjälpmedel till manuell överflyttning, besök www.etac.com.

D3

D4



Se till att hjulen är låsta när brukaren sätter sig eller reser sig ur stolen. Risk för personskada.

Lossa det armstöd som är i överflyttningens riktning.

Utför överflyttningen.

D5-D10

Armstöd:

Armstöden är svängbara och avtagbara.

D11

Armstöden är låsbara.

D12

Fotstöd:

Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.

D13

Fotstödet är avtagbart.

D14



Stå inte på fotplattan. Risk för personskada om produkten välter.

Inställningar

Se Figur E

Höjdinställning:

Höjden kan regleras enkelt genom att skruven placeras i önskat läge.



Kontrollera att alla fyra hjulen är lika inställda, annars försämras stabiliteten.

E1-E2



Kontrollera att vingmuttrarna är åtdragna. Risk för personskada.

Fotstöd:

Fotstödet är vinkelställbart och höjdinställbart i 4 lägen.

E3

Fotstödet är vinkelställbart och höjdinställbart i 8 lägen.

E4

Tillbehör	Se Figur F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Bäckén		☐	☐	☐
F2. Bäckén och lock med handtag		☐	☐	☐
F3. Lock med handtag		☐	☐	☐
F4. Engångsbäcken		☐	☐	☐
F5. Bäckengejder		☐	☐	☐
F6. Hinkgejder		☐	☐	☐
F7. Gejder engångsbäcken		☐	☐	☐
F8. Tillsats för låg upphängning av bäcken/hink		☐	☐	☐
F9. Mjuksits		☐	☐	☐
F10. Komfortsits		☐	☐	☐
F11. Hel sittdyna		☐	☐	☐
F12. Sitslock		☐	☐	☐
F13. Mjuk komfortsits*		☐	☐	☐
F14. Komfortskal		☐	☐	☐
F15. Armstödsdyna par		☐	☐	☐
F16. Mjukrygg		☐	☐	☐

Tillbehör	Se Figur F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Bålstöd		☐	☐	☐
F18. Förhöjningsklossar		☐	☐	☐
F19. Hjul 75 mm låsbara 2st		☐	☐	☐
F20. Drivhjulsadapter		☐	☒	☐
F21. Tvålkopp		☐	☐	☐
F22. Tvärså		☐	☐	☐
F23. Fotstöd, uppfällbara och avtagbara		☐	☐	☐
F24. Ryggklädsel		☐	☐	☐
F25. Säkerhetsrem		☐	☐	☐
F26. Höftbälte		☐	☐	☐
F27. Bröstmålte		☐	☐	☐
F28. Bröst- och höftbälte		☐	☐	☐
F29. Stänkskydd		☐	☐	☐

*Passar endast Clean-modeller med sitsöppning fram

General

Thank you for choosing an Etac product. In order to avoid damage during assembly, handling and use, it is important to read this manual and save it for future reference. You can also find it at

www.etac.com. You can select your language via the "International" and "Local websites" link. Here you will also find other product documentation, such as prescriber information, pre purchase guide, and reconditioning instructions.

In the manual, the user is the person sitting in the chair. The carer is the person helping the user.

Item list: ● = Applies to, ○ = Accessories

See the item list on the right which displays the information applicable to each product.



The images which are referred to on each page are found at the start of the manual (pages 3 to 9). See Figures A to F for the corresponding text.

Device description

The Clean family is a range of mobile shower commode chairs whereof Clean and Clean Height adjustable are assistant propelled and Clean 24" can be propelled by the user.

Intended purpose

Clean, Clean 24" and Clean Height adjustable (hereafter also referred to as "the device" or "the product"), are medical devices intended for alleviation of or compensation for a functional impairment due to an injury or disability. The device is designed to be used when performing hygiene tasks in the shower, at a sink, or over the toilet, as well as for transfers to and from the hygiene room.

Intended user group

The user group for the device is based on the individual's functional ability and not on a specific diagnosis, health condition or age. It is intended for individuals with a height of 146 cm or more, or a mass of 40 kg or more.

Secondary users of the device are caregivers providing assistance and clinicians/technicians who set up the device.

Intended environment

The device is intended for indoor use at home environments or institutions and is suitable for use in bathrooms, but not swimming pools or similar corrosive environments.

Intended application

The device is intended for short-term and long-term use and can be applied several times per day.

The device is intended for use with intact skin. The device is intended for refurbishment and reuse.

Expected service life

The expected service life is 10 years. For complete information regarding the service life of the device, see www.etac.com.

Indications

Indication for use is disability, including, but not limited to, an individual with physical disabilities who needs backrest and/or armrests to maintain a sitting position and assistance with transfers to/from the chair.

Contra indications:

There are no known contraindications.

Warnings

Warnings describing a risk element for a specific action or setting of the device can be found in the relevant section.



Check user sensitiveness for pressure ulcer before use.



A defective device must not be used. Risk of injury.



A heated device can cause burns.



Body parts may get pinched while applying or removing the pan.



Ignoring the instructions for use may result in injury.

Declaration of conformity

The device meets the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

The device is tested and meets the requirements of the EN ISO 10993-1 and ISO 17966:2016.

Pre-purchase information

Pre-purchase information can be found at www.etac.com.

Adverse event

In case of an adverse event occurred in relation to use of the device, it must be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to the manufacturer.

Customization

is everything that goes beyond the manual's instructions and settings. Device specially adapted by the customer must not retain Etac's CE marking. Etac's warranty expires.

Device description

See figure A



- A1.** Back support **A2.** Arm support **A3.** Seat **A4.** Foot support **A5.** Castor **A6.** Product label (warnings, CE-marking)
A7. Item number label (ser.no., production date)
- A8.** Rear wheel **A9.** User brake
- A10.** Height adjustment

Symbols, labels

See figure B

Symbols in the manual and on the device:

B1. Warning, precaution or limitation. **B2.** Useful advice and tips. **B3.** Material for recycling. **B4.** The part/function is locked and can not be moved/adjusted. **B5.** Pinch point! **B6.** Tool box-end spanner **B7.** Max user weight (see technical data). **B8.** Video **B9-B10.** Cleaning (see service and maintenance). **B11.** Do not stand on the footrest, risk of tipping. **B12.** Seating position affects the stability. **B13.** Product weight **B14.** Refer to user manual (blue and white).

Information on item no label:

B15. Product name. **B16.** Product description. **B17.** Serial number. **B18.** Item number. **B19.** CE marked **B20.** Medical device **B21.** Production date. **B22.** Bar code acc. to GS1-128 GTIN-14 and serial no.*

*The device's date of manufacture can be read from the barcode on the device. The number 11 is shown below the barcode in brackets. The number combination after these brackets is the date of manufacture.

Technical data

See figure C

Handling

See figure D

Installation upon delivery

Transfer over a threshold:

Chair only, push down on the wheel attachment.

With user, pull the chair backwards.

In stationary position:



Point the castors forward and activate the brakes to reduce the risk of tipping when the chair is used stationary and when transferring. Risk of injury if the device tips over.

D5



Do not sit on the front edge of the seat. Risk of injury if the device tips over.

Always lock as many castors as possible when the chair is to be used in a stationary position.

D6

Transferring:



Point the castors forward and activate the brakes to reduce the risk of tipping when the chair is used stationary and when transferring. Risk of injury if the device tips over.

Assess the risks and take notes. You as a carer are responsible for the safety of the user. Aids should be used if the

D1-D2 transfer is deemed as risky. Visit www.etac.com for manual transfer aids.

D3

D4



Make sure the castors are locked when the user sits down or gets up from the chair. Risk of injury.

Remove the armrest on the transfer side of the chair.

Carry out the transfer.

D5-D10

Arm supports:

The arm supports are swing away and detachable.

D11

The arm supports are lockable.

D12

Foot supports:

The carer can easily push in the foot support with their foot.

D13

The foot support is detachable.

D14



Do not stand on the foot plate. Risk of injury if the device tips over.

Settings

See figure E

Height adjustment:

The height can be adjusted with ease by placing the screw in the required position.



Check that all four castors are similarly adjusted, otherwise stability will be reduced.

E1-E2



Ensure that the wing nuts are tightened. Risk of injury.

Foot supports:

The foot support has 4 different angle and height settings.

E3

The foot support has 8 different angle and height settings.

E4

Accessories		See figure F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1.	Pan	☐	☐	☐
F2.	Pan and lid with handle	☐	☐	☐
F3.	Lid with handle	☐	☐	☐
F4.	Disposable pan	☐	☐	☐
F5.	Pan holder	☐	☐	☐
F6.	Bucket holder	☐	☐	☐
F7.	Disposable pan holder	☐	☐	☐
F8.	Attachment for low mounting of pan/bucket	☐	☐	☐
F9.	Soft seat	☐	☐	☐
F10.	Comfort seat	☐	☐	☐
F11.	Comfort cushion	☐	☐	☐
F12.	Seat lid	☐	☐	☐
F13.	Soft comfort seat*	☐	☐	☐
F14.	Comfort padding	☐	☐	☐
F15.	Armrest cushion, pair	☐	☐	☐
F16.	Soft back	☐	☐	☐

Accessories		See figure F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17.	Trunk support	☐	☐	☐
F18.	Heightening spacers	☐	☐	☐
F19.	Two 75 mm lockable castors	☐	☐	☐
F20.	Rear wheel adaptor	☐	☒	☐
F21.	Soap dish	☐	☐	☐
F22.	Crossbar	☐	☐	☐
F23.	Foot support, foldable and detachable	☐	☐	☐
F24.	Backrest upholstery	☐	☐	☐
F25.	Safety belt	☐	☐	☐
F26.	Positioning belt	☐	☐	☐
F27.	Chest harness belt	☐	☐	☐
F28.	Chest and hip positioning belts	☐	☐	☐
F29.	Splash guard	☐	☐	☐

*Only suitable for Clean models with a seat opening at the front

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac. For at undgå beskadigelse under samling, håndtering og brug er det vigtigt at læse denne manual og gemme den til fremtidig reference. Du kan også finde den på www.etac.com. Du kan vælge dit sprog via "International" og "Local websites". Her finder du endvidere supplerende produktokumentation som f.eks. oplysninger til ordinerende læger, vejledninger før køb og renoveringsanvisninger.

I manualen er brugeren den person, som sidder i stolen. Hjælperen er den person, der hjælper brugeren.

Stykliste: ● = Gælder for, ○ = Tilbehør

Se styklisten til højre, som viser de oplysninger, der gælder for hvert produkt.



De billeder, der henvises til på hver side, findes i starten af manualen (side 3 til 9). Se figur A til F for den tilsvarende tekst.

Beskrivelse af produktet

Clean-familien er en serie af mobile bruse- og toiletstole, hvoraf Clean og Clean højdejusterbar køres af hjælperen, og Clean 24" kan køres af brugeren.

Tilsigtet formål

Clean, Clean 24" og Clean højdejusterbar (herefter også kaldet produktet) er medicinsk udstyr, der er beregnet til at mildne eller kompensere for en funktionsnedsættelse på grund af en skade eller et handicap. Produktet er beregnet til brug ved udførelse af hygiejneopgaver under bruseren, ved håndvasken eller over toilettet samt til forflytninger til og fra hygiejnerummet.

Målbrugergruppe

Produktets brugergruppe er baseret på funktionsevne og ikke en specifik diagnose, helbredstilstand eller alder. Det er beregnet til personer med en højde på mindst 146 cm eller en vægt på mindst 40 kg.

Sekundære brugere af produktet er hjælpere, der yder assistance, og klinikere/teknikere, der konfigurerer produktet.

Tilsigtet miljø

Produktet er beregnet til indendørs brug i hjemmet eller på institutioner og er velegnet til brug i badeværelser, men ikke i svømmehaller eller lignende korroderende omgivelser.

Tilsigtet anvendelse

Produktet er beregnet til kortvarig og langvarig brug og kan anvendes flere gange om dagen.

Produktet er beregnet til brug med intakt hud. Produktet er beregnet til rengøring og genanvendelse.

Forventet brugslevetid

Den forventede brugslevetid er 10 år. For fuldstændige oplysninger om produktets brugslevetid henvises til www.etac.com.

Indikationer

Indikationen for brug er nedsat funktionsevne, herunder, men ikke begrænset til, en person med fysiske handicap, der har brug for ryglæn og/eller armlæn for at opretholde en siddende stilling og hjælp til forflytninger til/fra stolen.

Kontraindikationer:

Der er ingen kendte kontraindikationer.

Advarsler

Advarsler, der beskriver et risikoelement for en specifik handling eller indstilling af produktet, kan findes i det relevante afsnit.



Kontrollér brugerens følsomhed over for tryksår før brug



Et defekt produkt må ikke anvendes. Risiko for personskade.



Et opvarmet produkt kan forårsage forbrændinger.



Kropsdele kan komme i klemme, når bækkenet sættes på eller tages af.



Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre personskade.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Produktet er testet og opfylder kravene i EN ISO 10993-1 og ISO 17966:2016.

Oplysninger før køb

Oplysninger før køb kan findes på www.etac.com.

Uønsket hændelse

Hvis der opstår en uønsket hændelse i forbindelse med produktet, skal hændelsen indberettes til den lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed uden unødigt forsinkelse. Den lokale forhandler vil videresende oplysningerne til producenten.

Tilpasning

omfatter alt, hvad der ligger uden for manualens instruktioner og indstillinger. Et produkt, der er særligt tilpasset af kunden, må ikke have Etacs CE-mærkning. Etacs garanti udløber.

Beskrivelse af produktet

Se figur A



- A1.** Ryglæn **A2.** Armstøtte **A3.** Sæde **A4.** Fodstøtte **A5.** Hjul **A6.** Produktmærkat (advarsler, CE-mærkning)
A7. VarenummERMærkat (serienr., produktionsdato)
A8. Baghjul **A9.** Brugerbremse
A10. Justering af højde

Symboler, mærkater

Se figur B

Symboler i manualen og på produktet:

- B1.** Advarsel, forholdsregel eller begrænsning.
B2. Nyttige råd og tips. **B3.** Materiale til genanvendelse.
B4. Delen/funktionen er låst og kan ikke flyttes/justeres.
B5. Fare for at komme i klemme! **B6.** Stjerneskrueøgle
B7. Maks. brugervægt (se tekniske data). **B8.** Video
B9-B10. Rengøring (se service og vedligeholdelse).
B11. Stå ikke på fodstøtten, da der er risiko for, at produktet vælter. **B12.** Siddestilling påvirker stabiliteten.
B13. Produktets vægt **B14.** Læs brugsanvisningen (blå og hvid).

Oplysninger om varenummERMærkat:

- B15.** Produktnavn. **B16.** Produktbeskrivelse.
B17. Serienummer. **B18.** Varenummer. **B19.** CE-mærket
B20. Medicinsk udstyr **B21.** Produktionsdato.
B22. Stregkode iht. GS1-128 GTIN-14 og serienummer*

*Produktets produktionsdato kan aflæses på stregkoden på produktet. Tallet 11 vises under stregkoden i parentes. Talkombinationen efter denne parentes er produktionsdatoen.

Tekniske data

Se figur C

Håndtering

Se figur D

Installation ved levering

Forflytning over en tærskel:

Kun stolen, tryk ned på hjulbeslaget.

Træk stolen bagud sammen med brugeren.

I stationær position:



Drej hjulene fremad, og aktivér bremsene for at mindske risikoen for, at stolen vælter, når den bruges stationært og under forflytninger. Risiko for personskade, hvis produktet vælter.

D5



Sid ikke på sædets forreste kant. Risiko for personskade, hvis produktet vælter.

Lås altid så mange hjul som muligt, når stolen skal bruges i stationær position.

Forflytning:



Drej hjulene fremad, og aktivér bremsene for at mindske risikoen for, at stolen vælter, når den bruges stationært og under forflytninger. Risiko for personskade, hvis produktet vælter.

Vurder risiciene, og tag noter. Som omsorgsperson er du ansvarlig for brugerens sikkerhed. Der skal anvendes hjælpemidler, hvis forflytningen vurderes at være risikabel. Se www.etac.com for oplysninger om manuelle forflytningshjælpemidler.

- D1-D2** pemidler, hvis forflytningen vurderes at være risikabel. Se www.etac.com for oplysninger om manuelle forflytningshjælpemidler.
D3

D4



Sørg for, at hjulene er låst, når brugeren sætter sig ned eller rejser sig fra stolen. Risiko for personskade.

Fjern armlænet på forflytningssiden af stolen.

Udfør forflytningen.

D5-D10

Armstøtter:

Armstøtterne er svingbare og aftagelige.

D11

Armstøtterne kan låses.

D12

Fodstøtter:

- D6** Hjælperen kan nemt skubbe fodstøtten ind med foden.

D13

Fodstøtten er aftagelig.

D14



Stå ikke på fodpladen. Risiko for personskade, hvis produktet vælter.

Indstillinger

Se figur E

Indstilling af højden:

Højden kan nemt justeres ved at placere skruen i den ønskede position.



Kontrollér, at alle fire hjul er justeret ens, ellers reduceres stabiliteten.

E1-E2



Sørg for, at vingemøtrikkerne er spændt. Risiko for personskade.

Fodstøtter:

Fodstøtten har 4 forskellige vinkel- og højdeindstillinger.

E3

Fodstøtten har 8 forskellige vinkel- og højdeindstillinger.

E4

Tilbehør	Se figur F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Bækken		☐	☐	☐
F2. Bækken og låg med håndtag		☐	☐	☐
F3. Låg med håndtag		☐	☐	☐
F4. Engangsbækken		☐	☐	☐
F5. Holder til bækken		☐	☐	☐
F6. Holder til spand		☐	☐	☐
F7. Holder til engangsbækken		☐	☐	☐
F8. Beslag til lav montering af bækken/spand		☐	☐	☐
F9. Blødt sæde		☐	☐	☐
F10. Komfortsæde		☐	☐	☐
F11. Komfortpude		☐	☐	☐
F12. Sædelåg		☐	☐	☐
F13. Blødt komfortsæde*		☐	☐	☐
F14. Komfortpolstring		☐	☐	☐
F15. Armstøttepude, par		☐	☐	☐
F16. Blød ryg		☐	☐	☐

*Kun egnet til Clean-modeller med sædeåbning fortil

Tilbehør	Se figur F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Sidestøtte		☐	☐	☐
F18. Højdeafstandsstykker		☐	☐	☐
F19. To 75 mm låsbare hjul		☐	☐	☐
F20. Adapter til baghjul		☐	☒	☐
F21. Sæbeskål		☐	☐	☐
F22. Tværstang		☐	☐	☐
F23. Fodstøtte, sammenklappelig og aftagelig		☐	☐	☐
F24. Ryglænsbolstring		☐	☐	☐
F25. Sikkerhedssele		☐	☐	☐
F26. Positioneringssele		☐	☐	☐
F27. Brystsele		☐	☐	☐
F28. Bryst- og hoftepositioneringssele		☐	☐	☐
F29. Stænkskærm		☐	☐	☐

de Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben. Um Schäden bei der Montage, Handhabung und Verwendung zu vermeiden, ist es wichtig, dieses Handbuch zu lesen und es zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Sie finden es auch unter www.etac.com. Sie können Ihre Sprache über den Link „International“ und „Lokale Websites“ auswählen. Hier finden Sie auch weitere Produktdokumentationen, wie Informationen für den verschreibenden Arzt, Informationen vor dem Kauf und Instandsetzungsanleitungen.

In dieser Bedienungsanleitung ist der Benutzer die Person, die auf dem Stuhl sitzt. Die Pflegeperson ist die Person, die dem Benutzer hilft.

Teileliste: ● = Gilt für, ○ = Zubehör

Die Teileliste rechts gibt die auf das jeweilige Produkt zutreffenden Informationen an.



Die Bilder, auf die auf allen Seiten Bezug genommen wird, befinden sich vorne im Handbuch (Seiten 3 bis 9). Siehe Abbildungen A bis F für den entsprechenden Text.

Produktbeschreibung

Die Clean-Familie ist eine Produktfamilie von mobilen Dusch- und Toilettenstühlen. Clean und das höhenverstellbare Clean-Modell können durch einen Helfer bedient werden, Clean 24" kann vom Benutzer selbst bedient werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Clean, Clean 24" und das höhenverstellbare Clean-Modell (nachfolgend auch „das Gerät“ oder „das Produkt“ genannt) sind Medizinprodukte, die zur Unterstützung von Menschen mit funktionellen Störungen aufgrund von Verletzungen oder Behinderungen vorgesehen sind. Das Produkt ist für die Durchführung der Körperhygienemaßnahmen in der Dusche, am Waschbecken oder über der Toilette sowie zum Transport zum und vom Badezimmer vorgesehen.

Vorgesehene Benutzergruppe

Die für das Produkt vorgesehene Benutzergruppe richtet sich nach den funktionellen Fähigkeiten des Einzelnen und nicht nach einer bestimmten Diagnose, einem bestimmten Gesundheitszustand oder dem Alter. Das Produkt ist für Personen mit einer Körpergröße von mindestens 146 cm und einem Gewicht von mindestens 40 kg bestimmt.

Sekundäre Benutzer des Geräts sind Pflegekräfte, die Hilfe leisten, und Ärzte/Techniker, die das Gerät einrichten.

Vorgesehene Anwendungsumgebung

Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen in Privathaushalten oder Einrichtungen bestimmt und eignet sich für die Verwendung in Nassbereichen, jedoch nicht in Schwimmbädern oder ähnlichen korrosiven Umgebungen.

Vorgesehene Anwendung

Das Produkt ist für den kurz- und langfristigen Gebrauch bestimmt und kann mehrmals täglich angewendet werden.

Das Gerät ist für die Verwendung auf intakter Haut vorgesehen. Das Gerät ist für die Aufbereitung und Wiederverwendung vorgesehen.

Voraussichtliche Lebensdauer

Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Vollständige Informationen zur Lebensdauer des Produkts: siehe www.etac.com.

Indikationen

Die Indikation zur Verwendung besteht bei einer Behinderung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personen mit körperlichen Behinderungen, die eine Rückenlehne und/oder Armlehnen benötigen, um eine sitzende Position beizubehalten, sowie Hilfe beim Umsetzen auf den/vom Stuhl.

Kontraindikationen:

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Warnhinweise, die Risikoelemente für bestimmte Einsatzarten oder Einstellungen des Produkts beschreiben, sind im entsprechenden Abschnitt zu finden.



Vor dem Gebrauch Empfindlichkeit des Benutzers für Druckgeschwüre prüfen



Ein defektes Gerät darf nicht verwendet werden. Verletzungsgefahr.



Ein erhitztes Gerät kann Verbrennungen hervorrufen.



Beim Anbringen oder Entfernen des Beckens können Körperteile eingeklemmt werden.



Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen führen.

CE-Kennzeichnung

Das Gerät entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Das Produkt ist geprüft und erfüllt die Anforderungen der EN ISO 10993-1 und ISO 17966:2016.

Informationen vor dem Kauf

Informationen vor dem Kauf finden Sie unter www.etac.com.

Unerwünschte Ereignisse

Alle unerwünschten Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sollten unverzüglich Ihrem Händler vor Ort sowie der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Der Händler vor Ort leitet die Informationen an den Hersteller weiter.

Kundenspezifische Anpassung

Darunter fällt alles, was über die Anweisungen und Einstellungen in der Bedienungsanleitung hinausgeht. Die CE-Kennzeichnung von Etac verfällt für Produkte, die durch den Kunden speziell angepasst wurden. Etacs Garantie erlischt.

Produktbeschreibung

Siehe Abbildung A



A1. Rückenlehne **A2.** Armlehne **A3.** Sitz **A4.** Fußstütze **A5.** Lenkrolle **A6.** Produktetikett (Warnhinweise, CE-Kennzeichnung) **A7.** Artikelnummer Etikett (Seriennummer, Produktionsdatum)

A8. Hinterrad **A9.** Benutzerbremse

A10. Einstellung der Höhe

Symbole, Beschriftungen

Siehe Abbildung B

Symbole im Handbuch und am Gerät:

B1. Warn-, Vorsichtshinweise oder Einschränkungen.
B2. Nützliche Ratschläge und Tipps. **B3.** Recyclingfähiges Material. **B4.** Das Teil/die Funktion ist gesperrt und kann nicht bewegt/justiert werden. **B5.** Quetschgefahr!
B6. Werkzeug: Gabelschlüssel **B7.** Max. Benutzergewicht (siehe technische Daten). **B8.** Video **B9–B10.** Reinigung (siehe Service und Wartung). **B11.** Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze, es besteht Kippgefahr. **B12.** Die Sitzposition beeinflusst die Stabilität. **B13.** Produktgewicht **B14.** Gebrauchsanweisung lesen (blau und weiß).

Angaben auf Art.-Nr.-Etikett:

B15. Produktname. **B16.** Produktbeschreibung.
B17. Seriennummer. **B18.** Artikelnummer.
B19. CE-konform **B20.** Medizinprodukt
B21. Herstellungsdatum. **B22.** Barcode gem. GS1-128 GTIN-14 und Seriennr.*

*Das Herstellungsdatum des Produkts kann am Barcode auf dem Produkt abgelesen werden. Die Zahl 11 wird unter dem Barcode in Klammern angezeigt. Die Zahlenkombination hinter diesen Klammern ist das Herstellungsdatum.

Technische Daten

Siehe Abbildung C

Handhabung

Siehe Abbildung D

Einrichtung bei Lieferung

Umsetzen über eine Schwelle:

Nur Stuhl: Drücken Sie die Radbefestigung nach unten. **D3**

Mit Benutzer: Ziehen Sie den Stuhl rückwärts. **D4**

In fester Position:



Stellen Sie die Lenkräder nach vorne und aktivieren Sie die Bremsen, um die Kippgefahr bei stationärer Verwendung des Stuhls und beim Transfer zu verringern. Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts. **D5**



Setzen Sie sich nicht auf die Vorderkante des Sitzes. Verletzungsgefahr durch Umkippen des Geräts.

Wird der Stuhl in einer festen Position verwendet, stets so viele Lenkrollen wie möglich verriegeln.

Umsetzen:



Stellen Sie die Lenkräder nach vorne und aktivieren Sie die Bremsen, um die Kippgefahr bei stationärer Verwendung des Stuhls und beim Transfer zu verringern. Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts.

Die Risiken abschätzen und Notizen machen. Sie als Helfer sind für die Sicherheit des Patienten verantwortlich. Wird

D1–D2 das Umsetzen als riskant eingestuft, sollten Hilfsmittel verwendet werden. Manuelle Transferhilfen finden Sie unter www.etac.com.



Vergewissern Sie sich, dass die Rollen arretiert sind, wenn sich der Benutzer auf den Stuhl setzt oder von diesem aufsteht. Verletzungsgefahr.

Die Armlehne auf der Seite des Stuhls entfernen, an der das Umsetzen stattfinden soll.

Den Transfer durchführen.

D5–D10

Armlehnen:

Die Armlehnen sind schwenk- und abnehmbar. **D11**

Die Armlehnen sind arretierbar. **D12**

Fußstützen:

Die Pflegekraft kann die Fußstütze einfach mit dem Fuß einschieben. **D13**

Die Fußstütze ist abnehmbar. **D14**



Nicht auf die Fußstütze stellen. Verletzungsgefahr durch Umfallen des Produkts.

Einstellungen

Siehe Abbildung E

Einstellung der Höhe:

Die Höhe lässt sich einfach einstellen, indem die Schraube in die gewünschte Position gebracht wird.



Stellen Sie sicher, dass alle vier Lenkrollen gleich eingestellt sind, da ansonsten die Stabilität des Stuhls beeinträchtigt wird.

E1–E2



Stellen Sie sicher, dass die Flügelmuttern fest angezogen sind. Verletzungsgefahr.

Fußstützen:

Die Fußstütze ist auf vier unterschiedliche Winkel und Höhen einstellbar. **E3**

Die Fußstütze ist auf acht unterschiedliche Winkel und Höhen einstellbar. **E4**

Durch Verschieben des Stifts stehen weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

E5



Wenn die Fußstütze entfernt wird, sind die Stützstifte freigelegt und es besteht die Gefahr von Schürf- oder Kratzwunden an den Füßen.



Wenn der Stuhl auf eine Höhe von 47,5 cm eingestellt ist, darf die unterste Fußstützenposition nicht verwendet werden.

Rückenlehnenpolsterung

E7-E10

Benutzerbremse

E11-E13



Quetschgefahr an Hinterrad und Fahrwerk/Bremse.

Service und Wartung

Das Gerät mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel säubern (pH-Wert zwischen 5 und 9). Abspülen und trocknen.

Das Gerät mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (70 %) desinfizieren.

Das Gerät muss nicht weiter gewartet werden.

Das Produkt und sein Zubehör können bei 85 °C 3 Minuten lang gereinigt werden (sofern nichts anderes angegeben ist). Dies gilt für die Wiederaufbereitung.

Die verwendeten Materialien sind beständig gegen herkömmliche Desinfektionsmittel.

Folgende Oberflächenbehandlungsverfahren wurden zum Schutz vor Korrosion eingesetzt:

Lackierte Oberflächen = Polyester-Pulverbeschichtung

Nicht lackierte Stahloberflächen = Fe/Zn-Ni

5 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler.

Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen unter www.etac.com.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Lagerung

Das Gerät sollte in Innenräumen trocken bei einer Temperatur über 5 °C gelagert werden. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als vier Monate) gelagert wurde, muss seine Funktion vor der Verwendung von einer Fachkraft überprüft werden.

Recycling gemäß den länderspezifischen Vorschriften.

Clean
Clean 24"
Clean H. adj.

○ ○ ○

●

● ● ●

● ● ●

Zubehör	Siehe Abbildung F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Becken		☐	☐	☐
F2. Becken und Deckel mit Griff		☐	☐	☐
F3. Deckel mit Griff		☐	☐	☐
F4. Einwegbecken		☐	☐	☐
F5. Beckenhalterung		☐	☐	☐
F6. Eimerhalterung		☐	☐	☐
F7. Einwegbeckenhalterung		☐	☐	☐
F8. Aufsätze für niedrige Befestigung von Becken/Eimer		☐	☐	☐
F9. Weichsitz		☐	☐	☐
F10. Komfortsitz		☐	☐	☐
F11. Komfortkissen		☐	☐	☐
F12. Deckel des Sitzes		☐	☐	☐
F13. Weicher Komfortsitz*		☐	☐	☐
F14. Komfortpolsterung		☐	☐	☐
F15. Armlehnenkissen, 2 Stück		☐	☐	☐

Zubehör	Siehe Abbildung F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16. Weiches Rückenpolster		☐	☐	☐
F17. Transportträger		☐	☐	☐
F18. Abstandhalter zur Vergrößerung		☐	☐	☐
F19. Zwei verriegelbare Lenkrollen (75 mm)		☐	☐	☐
F20. Hinterradadapter		☐	☒	☐
F21. Seifenablage		☐	☐	☐
F22. Querstange		☐	☐	☐
F23. Fußstütze, zusammenlegbar und abnehmbar		☐	☐	☐
F24. Rückenlehnenpolsterung		☐	☐	☐
F25. Sicherheitsgurt		☐	☐	☐
F26. Positionierungsgurt		☐	☐	☐
F27. Brustgeschirrgurt		☐	☐	☐
F28. Brust- und Hüftgurte zur Positionierung		☐	☐	☐
F29. Spritzschutz		☐	☐	☐

*Nur geeignet für Clean-Modelle mit nach vorne zeigender Sitzöffnung

it Informazioni generali

Grazie per aver scelto un prodotto Etac. Per evitare danni durante il montaggio, la manipolazione e l'uso, è importante leggere il presente manuale e conservarlo per consultazioni future. È disponibile anche sul sito www.etac.com. È possibile selezionare la lingua tramite il link "International" e "Local websites". Qui è possibile reperire anche altri documenti relativi al prodotto, tra cui informazioni mediche, guida all'acquisto e istruzioni per il ricondizionamento.

Nel manuale, con il termine utente si intende la persona che siede sulla sedia. L'assistente è invece la persona che lo aiuta.

Elenco dei componenti: ● = Si applica a ○ = Accessori

Vedere l'elenco dei componenti a destra contenente le informazioni relative a ciascun prodotto.



Le immagini a cui si fa riferimento in ciascuna pagina si trovano all'inizio del manuale (pagine da 3 a 9). Vedere le Figure da A a F per il testo corrispondente.

Descrizione del dispositivo

La famiglia Clean è una gamma di sedie comoda da doccia mobili in cui Clean e Clean ad altezza regolabile sono a spinta assistita e Clean 24" può essere spinta dall'utente.

Uso previsto

Clean, Clean 24" e Clean ad altezza regolabile (di seguito denominato anche "il dispositivo" o "il prodotto") sono dispositivi medici destinati ad alleviare o compensare una compromissione funzionale dovuta a lesioni o disabilità. Il dispositivo può essere utilizzato nella doccia, vicino al lavabo o sul wc e può essere impiegato per il trasferimento dell'utente dalla/alla stanza dedicata all'igiene.

Gruppo di utenti previsti

Il gruppo di utenti del dispositivo si basa sulle capacità funzionali dell'individuo e non su diagnosi specifiche, condizioni di salute o età. È destinato a persone con un'altezza di 146 cm o superiore o un peso di 40 kg o superiore.

Gli utenti secondari del dispositivo sono gli operatori che forniscono assistenza e i medici/tecnici che installano il dispositivo.

Ambiente previsto

Il dispositivo è destinato all'uso interno in ambienti domestici o strutture ed è adatto all'uso in bagni, ma non piscine o ambienti corrosivi simili.

Uso previsto

Il dispositivo è progettato per un uso a breve e a lungo termine e può essere applicato più volte al giorno.

Il dispositivo è destinato all'uso con la cute intatta.

Il dispositivo è destinato al ricondizionamento e al riutilizzo.

Durata utile prevista

La durata utile prevista è di 10 anni. Per informazioni più complete sulla durata del dispositivo, consultare www.etac.com.

Indicazioni

Il prodotto è indicato in condizioni di disabilità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone con disabilità fisica che necessitano di schienale e/o braccioli per mantenere una posizione seduta e di assistenza durante i trasferimenti da/verso la sedia.

Controindicazioni:

Non vi è alcuna controindicazione nota.

Avvertenze

Le avvertenze che descrivono un elemento di rischio per un'azione o un'impostazione specifica del dispositivo sono riportati nella sezione corrispondente.



Verificare la sensibilità dell'utente alle ulcere da pressione prima dell'uso



Non utilizzare un dispositivo difettoso. Rischio di lesioni.



Un dispositivo riscaldato può causare ustioni.



Durante l'applicazione o la rimozione della padella, alcune parti del corpo possono rimanere impigliate.



L'inosservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme ai requisiti del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

Il dispositivo è testato e soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Informazioni pre-acquisto

Le informazioni di pre-acquisto sono disponibili all'indirizzo www.etac.com.

Evento avverso

In caso di evento avverso verificatosi in relazione all'uso del dispositivo, deve essere segnalato tempestivamente al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

Personalizzazione

Comprende tutti gli aspetti che non rientrano nelle istruzioni e nelle impostazioni del manuale. I dispositivi adattati dai clienti non devono riportare il marchio CE Etac. La garanzia Etac è soggetta a scadenza.

Descrizione del dispositivo

Vedere Figura A



A1. Schienale **A2.** Bracciolo **A3.** Sedile **A4.** Supporto piedi **A5.** Ruota orientabile **A6.** Etichetta prodotto (avvertenze, marcatura CE) **A7.** Etichetta n. articolo (n. di serie, data di produzione)

A8. Ruota posteriore **A9.** Freno dell'utente

A10. Regolazione dell'altezza

Simboli, etichette

Vedere Figura B

Simboli nel manuale e sul dispositivo:

B1. Avvertenze, precauzioni o restrizioni. **B2.** Consigli e suggerimenti utili. **B3.** Materiale destinato al riciclaggio. **B4.** La parte/funzione è bloccata e non può essere spostata/regolata. **B5.** Pericolo di schiacciamento! **B6.** Chiave ad anello poligonale **B7.** Peso massimo dell'utente (vedere dati tecnici). **B8.** Video **B9-B10.** Pulizia (vedere Assistenza e manutenzione). **B11.** Non stare in piedi sul poggiatesta, rischio di ribaltamento. **B12.** La posizione di seduta influisce sulla stabilità. **B13.** Peso del prodotto **B14.** Leggere le istruzioni per l'uso (blu e bianco)

Informazioni sull'etichetta del cod. articolo:

B15. Nome prodotto. **B16.** Descrizione prodotto. **B17.** Numero di serie. **B18.** Codice articolo. **B19.** Marchio CE **B20.** Dispositivo medico **B21.** Data di fabbricazione. **B22.** Codice a barre secondo GS1-128 GTIN-14 e numero di serie*

*La data di produzione del dispositivo può essere verificata dal codice a barre sul dispositivo. Il numero 11 è indicato tra parentesi sotto il codice a barre. La combinazione numerica dopo queste parentesi è la data di produzione.

Dati tecnici

Vedere Figura C

Manipolazione

Vedere Figura D

Installazione al momento della consegna

Trasferimento oltre una soglia:

Solo sedia, spingere verso il basso l'attacco della ruota. **D3**

Con l'utente, tirare indietro la sedia.

In posizione statica:

D1-D2 Valutare i rischi e prendere appunti. In quanto assistenti personali, siete responsabili della sicurezza dell'utente. È necessario ricorrere ad ausili se il trasferimento è ritenuto rischioso. Consultare il sito www.etac.com per gli ausili di trasferimento manuale.

D4



Orientare le ruote in avanti e attivare i freni per ridurre il rischio di ribaltamento quando la sedia viene utilizzata in posizione fissa e durante il trasferimento. Rischio di lesioni in caso di ribaltamento del dispositivo.

D5



Accertarsi che le ruote siano bloccate quando l'utente si siede o si alza dalla sedia. Rischio di lesioni.

Rimuovere il bracciolo del lato di trasferimento.

Eseguire il trasferimento.

D5-D10

Braccioli:

I braccioli sono swing-away e rimovibili.

D11

I braccioli sono bloccabili.

D12

Supporti piedi:

L'assistente può facilmente spingere il supporto piedi con il piede.

D13

Il supporto piedi è rimovibile.

D14



Non sedersi sul bordo anteriore del sedile. Rischio di lesioni in caso di ribaltamento del dispositivo.

Bloccare sempre il maggior numero possibile di ruote orientabili quando la sedia deve essere utilizzata in posizione statica.

Trasferimento:



Orientare le ruote in avanti e attivare i freni per ridurre il rischio di ribaltamento quando la sedia viene utilizzata in posizione fissa e durante il trasferimento. Rischio di lesioni in caso di ribaltamento del dispositivo.



Non stare in piedi sulla pedana. Rischio di lesioni in caso di caduta del prodotto.

Impostazioni

Vedere Figura E

Regolazione dell'altezza:

L'altezza può essere regolata facilmente posizionando la vite nella posizione desiderata.



Controllare che tutte e quattro le ruote orientabili siano regolate allo stesso modo; in caso contrario la stabilità risulterà compromessa.

E1-E2



Assicurarsi che i dadi a farfalla siano serrati. Rischio di lesioni.

Supporti piedi:

Il supporto piedi ha 4 diverse impostazioni di inclinazione e altezza.

E3

Il supporto piedi ha 8 diverse impostazioni di inclinazione e altezza.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



28

Accessori	Vedere Figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Padella		☐	☐	☐
F2. Padella e coperchio con maniglia		☐	☐	☐
F3. Coperchio con maniglia		☐	☐	☐
F4. Padella monouso		☐	☐	☐
F5. Supporto per padella		☐	☐	☐
F6. Supporto per secchio		☐	☐	☐
F7. Supporto per padella monouso		☐	☐	☐
F8. Aggancio per montaggio inferiore di padella/secchio		☐	☐	☐
F9. Seduta morbida		☐	☐	☐
F10. Sedile comfort		☐	☐	☐
F11. Cuscino comfort		☐	☐	☐
F12. Coprisedile		☐	☐	☐
F13. Sedile comfort morbido*		☐	☐	☐
F14. Imbottitura comfort		☐	☐	☐
F15. Braccioli imbottiti, paio		☐	☐	☐

Accessori	Vedere Figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16. Schienale morbido		☐	☐	☐
F17. Supporto per il tronco		☐	☐	☐
F18. Rialzi		☐	☐	☐
F19. Due rotelle bloccabili da 75 mm		☐	☐	☐
F20. Adattatore ruota posteriore		☐	☒	☐
F21. Porta sapone		☐	☐	☐
F22. Sbarra		☐	☐	☐
F23. Supporto piedi, pieghevole e staccabile		☐	☐	☐
F24. Rivestimento dello schienale		☐	☐	☐
F25. Cintura di sicurezza		☐	☐	☐
F26. Cintura di posizionamento		☐	☐	☐
F27. Cintura pettorale		☐	☐	☐
F28. Cinture di posizionamento per torace e fianchi		☐	☐	☐
F29. Paraspruzzi		☐	☐	☐

*Idoneo solo per i modelli Clean con apertura del sedile anteriore

nl Algemeen

Hartelijk dank dat u voor een product van Etac hebt gekozen. Om schade tijdens montage, hantering en gebruik te voorkomen, is het belangrijk om deze handleiding te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. U vindt deze handleiding ook op www.etac.com. U kunt uw taal selecteren via de links 'International' en 'Local websites'. Hier vindt u ook andere productdocumentatie, zoals informatie voor voorschrijvers, een keuzehulp en revisie-instructies.

In deze handleiding is de gebruiker degene die in de stoel zit. De verzorger is degene die de gebruiker helpt.

Lijst met artikelen: ● = Van toepassing op, ○ = Accessoires

Zie de lijst met artikelen rechts; hierin staat alle informatie die van toepassing is op elk product.



De afbeeldingen waarnaar op elke pagina wordt verwezen, staan aan het begin van de handleiding (pagina's 3 tot en met 9). Zie figuren A tot en met F voor de bijbehorende tekst.

Beschrijving hulpmiddel

De Clean-serie is een reeks verrijdbare douchestoelen waarvan de Clean en Clean Height adjustable door de begeleider worden voortbewogen en de Clean 24" door de gebruiker kan worden voortbewogen.

Beoogd doel

Clean, Clean 24" en Clean Height adjustable (hierna ook 'het hulpmiddel' of 'het product' genoemd) zijn medische hulpmiddelen die bedoeld zijn om een functiebeperking als gevolg van letsel of een beperking te verlichten of te compenseren. Het hulpmiddel is ontworpen om te worden gebruikt voor het uitvoeren van hygiënetaken in de douche, bij de wastafel of boven het toilet, maar ook voor verplaatsingen van en naar de verzorgingsruimte.

Beoogde gebruikersgroep

De gebruikersgroep voor het hulpmiddel is gebaseerd op het functionele vermogen van het individu en niet op een specifieke diagnose, gezondheidstoestand of leeftijd. Het product is bedoeld voor personen met een lengte van 146 cm of meer, of een gewicht van 40 kg of meer.

Secundaire gebruikers van het hulpmiddel zijn zorgverleners die hulp bieden en artsen/technici die het hulpmiddel opstellen.

Beoogde omgeving

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik binnenshuis in thuisomgevingen of instellingen en is geschikt voor gebruik in badkamers, maar niet voor zwembaden of vergelijkbare corrosieve omgevingen.

Beoogde toepassing

Het hulpmiddel is bedoeld voor kort- en langdurig gebruik en kan meerdere keren per dag worden gebruikt.

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik met intacte huid. Het hulpmiddel is bedoeld voor renovatie en hergebruik.

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur is 10 jaar. Alle informatie over de levensduur van het hulpmiddel vindt u op www.etac.com.

Indicaties

Indicatie voor gebruik is beperking, inclusief maar niet beperkt tot een persoon met lichamelijke beperkingen die rugsteun en/of armleggers nodig heeft om een zittende positie te behouden en die hulp nodig heeft bij het verplaatsen naar/van de stoel.

Contra-indicaties:

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen

Waarschuwingen die een risico-element voor een specifieke actie of instelling van het hulpmiddel beschrijven, zijn te vinden in het betreffende hoofdstuk.



Controleer vóór gebruik de gevoeligheid van de gebruiker voor decubitus



Een defect hulpmiddel mag niet worden gebruikt. Risico op letsel.



Een verwarmd hulpmiddel kan brandwonden veroorzaken.



Tijdens het aanbrengen of verwijderen van de toiletemmer kunnen lichaamsdelen bekneld raken.



Het negeren van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot letsel.

Conformiteitsverklaring

Dit hulpmiddel voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Het hulpmiddel is getest en voldoet aan de eisen van EN ISO 10993-1 en ISO 17966:2016.

Informatie vóór aankoop

Informatie vóór aankoop vindt u op www.etac.com.

Ongewenst voorval

Mocht er een ongewenst voorval plaatsvinden met het gebruik van het product, dan moet u dat tijdig melden aan de leverancier van het product en aan de bevoegde autoriteit in uw land. De leverancier zal die informatie doorsturen naar de fabrikant.

Afstemming op de gebruiker

is alles wat verdergaat dan de instructies en instellingen in de handleiding. Een hulpmiddel dat de klant aan zijn/haar specifieke wensen heeft aangepast, mag niet langer de CE-markering van Etac dragen. De garantie van Etac vervalt.

Beschrijving hulpmiddel

Zie Figuur A



A1. Rugleuning **A2.** Armsteun **A3.** Zitting **A4.** Voetsteun **A5.** Zwenkwiel **A6.** Productlabel (waarschuwingen, CE-markering) **A7.** Label met artikelnummer (ser.nr., productiedatum)

A8. Achterwiel **A9.** Gebruikersrem

A10. Hoogte-instelling

Symbolen, labels

Zie Figuur B

Symbolen in de handleiding en op het hulpmiddel:

B1. Waarschuwing, voorzorgsmaatregel of beperking.
B2. Handig advies en tips. **B3.** Te recyclen materiaal.
B4. Het onderdeel/de functie is vergrendeld en kan niet worden verplaatst/afgesteld. **B5.** Beknellingspunt!
B6. Gereedschapskist moersleutel **B7.** Max. gebruikersgewicht (zie technische gegevens). **B8.** Video
B9-B10. Reiniging (zie service en onderhoud). **B11.** Ga niet op de voetsteun staan, kantelgevaar. **B12.** De zitpositie beïnvloedt de stabiliteit. **B13.** Productgewicht
B14. Lees de gebruiksaanwijzing (blauw en wit)

Informatie op label met artikelnr.:

B15. Productnaam. **B16.** Productbeschrijving.
B17. Serienummer. **B18.** Artikelnummer.
B19. CE-markering **B20.** Medisch hulpmiddel
B21. Productiedatum. **B22.** Barcode volgens GS1-128 GTIN-14 en serienr.*

*De productiedatum van het hulpmiddel kan worden afgelezen van de barcode op het product. Onder de barcode wordt tussen haakjes het getal 11 weergegeven. De cijfercombinatie na deze haakjes is de productiedatum.

Technische gegevens

Zie Figuur C

Hanteren

Zie Figuur D

Installatie na levering

Verplaatsing over een drempel:

Alleen stoel, duw de wielhouder omlaag.

Met gebruiker, trek de stoel naar achteren.

In de vaste stand:



Richt de zwenkwieken naar voren en activeer de remmen om het risico op kantelen te verminderen wanneer de stoel stationair wordt gebruikt en tijdens transfers. Risico op letsel door kantelen van het hulpmiddel.

D5



Ga niet op de voorrand van de zitting zitten. Gevaar voor letsel als het hulpmiddel omkantelt.

Vergrendel altijd zoveel mogelijk zwenkwieken wanneer de stoel in een vaste stand moet worden gebruikt.

Verplaatsen:



Richt de zwenkwieken naar voren en activeer de remmen om het risico op kantelen te verminderen wanneer de stoel stationair wordt gebruikt en tijdens transfers. Risico op letsel door kantelen van het hulpmiddel.

D6

D1-D2

zorger bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik hulpmiddelen als het verplaatsen als gevaarlijk wordt beschouwd. Ga naar www.etac.com voor handmatige hulpmiddelen voor het verplaatsen.

D3

D4



Zorg ervoor dat de zwenkwieltjes vergrendeld zijn als de gebruiker in de stoel gaat zitten of eruit opstaat. Risico op letsel.

Verwijder de armsteun aan de kant waar de gebruiker in of uit de stoel wordt verplaatst.

Voer de verplaatsing uit.

D5-D10

Armsteunen:

De armsteunen zijn wegklapbaar en afneembaar.

D11

De armsteunen zijn blokkeerbaar.

D12

Voetsteunen:

De verzorger kan de voetsteun eenvoudig met de voet induwen.

D13

De voetsteun is afneembaar.

D14



Ga niet op de voetplaat staan. Gevaar voor letsel als het product omvalt.

Beoordeel de risico's en maak aantekeningen. Als ver-

Instellingen

Zie Figuur E

Hoogte verstellen:

De hoogte kan eenvoudig worden aangepast door de schroef in de gewenste positie te plaatsen.



Controleer of alle vier de zwenkwieken op dezelfde wijze zijn afgesteld, anders neemt de stabiliteit af.

E1-E2



Zorg ervoor dat de vleugelmoeren zijn vastgedraaid. Risico op letsel.

Voetsteunen:

De voetsteun heeft 4 verschillende hoek- en hoogte-instellingen.

E3

De voetsteun heeft 8 verschillende hoek- en hoogte-instellingen.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Service en onderhoud

Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden.

Transport, opslag en verwijdering

Accessoires		Zie Figuur F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1.	Toiletemmer	☐	☐	☐
F2.	Toiletemmer en deksel met handvat	☐	☐	☐
F3.	Deksel met handvat	☐	☐	☐
F4.	Wegwerptoiletemmer	☐	☐	☐
F5.	Toiletemmerhouder	☐	☐	☐
F6.	Emmerhouder	☐	☐	☐
F7.	Wegwerptoiletemmerhouder	☐	☐	☐
F8.	Verlengstuk voor verlaagde ophanging van toiletemmer/emmer	☐	☐	☐
F9.	Zachte zitting	☐	☐	☐
F10.	Comfortzitting	☐	☐	☐
F11.	Comfortkussen	☐	☐	☐
F12.	Zittingdeksel	☐	☐	☐
F13.	Zachte comfortzitting*	☐	☐	☐
F14.	Comfort polstering	☐	☐	☐
F15.	Armsteunkussen, per twee	☐	☐	☐

Accessoires		Zie Figuur F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16.	Zachte rugleuning	☐	☐	☐
F17.	Rompsteun	☐	☐	☐
F18.	Afstandsstukken voor hoogte-instelling	☐	☐	☐
F19.	Twee blokkeerbare zwenkwielen van 75 mm	☐	☐	☐
F20.	Adapter achterwiel	☐	☒	☐
F21.	Zeepbakje	☐	☐	☐
F22.	Dwarsbalk	☐	☐	☐
F23.	Voetsteun, inklapbaar en afneembaar	☐	☐	☐
F24.	Rugbekleding	☐	☐	☐
F25.	Veiligheidsriem	☐	☐	☐
F26.	Positioneringsband	☐	☐	☐
F27.	Borstgordel	☐	☐	☐
F28.	Positioneringsbanden voor borstkas en heup	☐	☐	☐
F29.	Spatbescherming	☐	☐	☐

*Alleen geschikt voor Clean-modellen met een opening aan de voorzijde van de zitting

Takk for at du valgte et produkt fra Etac. For å unngå skader ved montering, håndtering og bruk, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen og tar vare på den for fremtidig bruk. Du finner den også på www.etac.com. Du kan velge språk via lenken "International" og "Local websites". Her finner du også annen produktdokumentasjon, som informasjon om foreskrivning, veiledning før kjøp og instruksjoner for rehabilitering.

Brukeren i denne bruksanvisningen er personen som sitter i stolen. Assistenten er personen som hjelper brukeren.

Vareliste: ● = Gjelder, ○ = Tilbehør

Se artikkellisten til høyre, som viser aktuell informasjon for hvert produkt.



Bildene som det henvises til på hver side, finnes i begynnelsen av bruksanvisningen (side 3 til 9). Se Illustrasjon A til F for tilhørende tekst.

Produktbeskrivelse

Clean-familien er en serie mobile dusj-/toalettstoler der Clean og Clean høydejusterbar skyves av en assistent, mens Clean 24" kan drives av brukeren.

Tiltenkt bruk

Clean, Clean 24" og Clean høydejusterbar (heretter også kalt «enheten» eller «produktet») er medisinsk utstyr beregnet på å lindre eller kompensere for nedsatt funksjonsevne som følge av skade eller funksjonsnedsettelse. Produktet er utviklet for bruk ved hygieneoppgaver i dusjen, ved en vask eller over toalettet, samt ved forflytninger til og fra hygienerommet.

Brukergruppe

Produktets brukergruppe er basert på den enkeltes funksjonsevne og ikke på en spesifikk diagnose, helsetilstand eller alder. Det er beregnet for personer med en minimumshøyde på 146 cm, eller en minimumsvekt på 40 kg.

Sekundærbrukere av produktet er pleiere som gir assistanse, og helsepersonell/teknikere som konfigurerer produktet.

Tiltenkt miljø

Produktet er ment for innendørs bruk i hjemmemiljøer eller institusjoner, og er egnet for bruk i baderom, men ikke i svømmebassenger eller lignende korroderende miljøer.

Bruksområde

Produktet er ment for korttids- og langtidsbruk, og kan brukes flere ganger daglig.

Produktet er ment for bruk med intakt hud. Produktet er ment for renovering og gjenbruk.

Forventet levetid

Forventet levetid er 10 år. Les mer om produktets levetid på www.etac.com.

Indikasjoner

Indikasjoner for bruk er funksjonsnedsettelse, inkludert, men ikke begrenset til, en person med fysiske funksjonsnedsettelser som trenger ryggstøtte og/eller armene for å opprettholde en sittende stilling og assistanse ved forflytninger til/fra stolen.

Kontraindikasjoner:

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

Advarsler

Advarsler som beskriver et risikoelement for en bestemt handling eller innstilling av produktet, finnes i den relevante delen.



Kontroller om brukeren er utsatt for trykksår før bruk.



Et defekt produkt skal ikke brukes. Risiko for personskade.



Oppvarmede enheter kan forårsake forbrenning.



Kroppsdeler kan komme i klem når bekket settes på eller fjernes.



Hvis bruksanvisningen ikke følges, kan det føre til personskade.

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravene i forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Produktet er testet og oppfyller kravene i NS-EN ISO 10993-1 og ISO 17966:2016.

Informasjon før kjøp

Produktinformasjon er tilgjengelig på www.etac.com.

Uønskede hendelser

Hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse relatert til bruk av utstyret, skal hendelsen rapporteres til lokal forhandler og nasjonale myndigheter innen rimelig tid. Den lokale forhandleren vil videresende informasjon til produsenten.

Tilpasning

er alt som går utover anvisningene og innstillingene i bruksanvisningen. Produkter som er spesialtilpasset kunden skal ikke bære Etacs CE-merke. Etac-garantien ugyldiggjøres.

Produktbeskrivelse

Se Illustrasjon A



A1. Ryggstøtte **A2.** Armlene **A3.** Sete **A4.** Fotstøtte **A5.** Svinghjul **A6.** Produktetikett (advarsler, CE-merking)
A7. Varenummeretikett (serienr., produksjonsdato)

A8. Bakhjul **A9.** Brukerbrems

A10. Høydejustering

Symboler, etiketter

Se Illustrasjon B

Symboler i bruksanvisningen og på produktet:

B1. Advarsel, forsiktighet eller begrensning. **B2.** Nyttige råd og tips. **B3.** Materialer til resirkulering. **B4.** Delen/funksjonen er låst og kan ikke beveges/justeres. **B5.** Klempunkt! **B6.** Fastnøkkel **B7.** Maks brukervekt (se tekniske data). **B8.** Video **B9–B10.** Rengjøring (se service og vedlikehold). **B11.** Du skal ikke stå på fotstøtten, veltefare. **B12.** Sitteposisjonen påvirker stabiliteten. **B13.** Produktvekt **B14.** Les bruksanvisningen (blå og hvit)

Informasjon på varenummeretikett:

B15. Produktnavn. **B16.** Produktbeskrivelse. **B17.** Serienummer. **B18.** Varenummer. **B19.** CE-merket **B20.** Medisinsk utstyr **B21.** Produksjonsdato. **B22.** Strekkode i samsvar med GS1-128 GTIN-14 og serienr.*

*Produktets produksjonsdato kan leses av fra strekkoden på produktet. Tallet 11 vises i parentes under strekkoden. Tallkombinasjonen etter disse parentesene er produksjonsdatoen.

Tekniske data

Se Illustrasjon C

Håndtering

Se Illustrasjon D

Installasjon ved levering

Forflytning over terskler:

Kun stol, skyv ned på hjulfestet.

Med bruker, trekk stolen baklengs.

I stasjonær posisjon:



Vend svinghjulene forover og sett på bremsene for å redusere veltefare når stolen brukes stasjonært og ved forflytning. Risiko for personskader hvis utstyret velter.

D5



Ikke sitt på forkanten av setet. Fare for personskade hvis enheten velter

Lås alltid så mange svinghjul som mulig når stolen skal brukes i stasjonær stilling.

Forflytning:



Vend svinghjulene forover og sett på bremsene for å redusere veltefare når stolen brukes stasjonært og ved forflytning. Risiko for personskader hvis utstyret velter.

D6



Ikke stå på fotplaten. Fare for personskade hvis produktet velter.

D1–D2 for brukerens sikkerhet. Hjelpemidler skal brukes hvis forflytningen anses som risikabel. Se manuelle forflytningshjelpemidler på www.etac.com.

D3

D4



Kontroller at alle svinghjul er låst når brukeren setter seg i eller reiser seg fra stolen. Risiko for personskade.

Fjern armlenet på forflytningssiden av stolen.

Utfør forflytningen.

D5–D10

Armlene:

Armlenene er svingbare og avtakbare.

D11

Armlenene er låsbare.

D12

Fotstøtte:

Pleieren kan enkelt skyve inn fotstøtten med foten.

D13

Fotstøtten kan tas av.

D14

Vurder risikoen og ta notater. Som pleier er du ansvarlig

Innstillinger

Se Illustrasjon E

Høydejustering:

Høyden kan enkelt justeres ved å plassere skruen i ønsket posisjon.



Kontroller at alle fire svinghjul er justert på samme måte, ellers vil stabiliteten bli redusert.

E1–E2



Kontroller at vingemutrene er strammet. Risiko for personskade.

Fotstøtte:

Fotstøtten har 4 innstillinger for vinkel og høyde.

E3

Fotstøtten har 8 innstillinger for vinkel og høyde.

E4

Tilbehør	Se Illustrasjon F			
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Bekken		☐	☐	☐
F2. Bekken og lokk med håndtak		☐	☐	☐
F3. Lokk med håndtak		☐	☐	☐
F4. Engangsbekken		☐	☐	☐
F5. Bekkenholder		☐	☐	☐
F6. Bøtteholder		☐	☐	☐
F7. Holder til engangsbekken		☐	☐	☐
F8. Feste for lav montering av bekken/bøtte		☐	☐	☐
F9. Mykt sete		☐	☐	☐
F10. Komfortsete		☐	☐	☐
F11. Komfortpute		☐	☐	☐
F12. Setedeksel		☐	☐	☐
F13. Mykt komfortsete*		☐	☐	☐
F14. Komfortpolstring		☐	☐	☐
F15. Pute til armlene, par		☐	☐	☐
F16. Myk rygg		☐	☐	☐

*Kun egnet for Clean-modeller med seteåpning foran

Tilbehør	Se Illustrasjon F			
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Støtte for overkroppen		☐	☐	☐
F18. Forhøyningssklosser		☐	☐	☐
F19. To 75 mm låsbare svinghjul		☐	☐	☐
F20. Adapter til bakhjul		☐	☒	☐
F21. Såpeskål		☐	☐	☐
F22. Krysstag		☐	☐	☐
F23. Fotstøtte, sammenleggbare og avtakbar		☐	☐	☐
F24. Ryggstøttepolstring		☐	☐	☐
F25. Sikkerhetsbelte		☐	☐	☐
F26. Posisjoneringsbelte		☐	☐	☐
F27. Brystbelte		☐	☐	☐
F28. Bryst- og hofteposisjoneringsbelter		☐	☐	☐
F29. Sprutvern		☐	☐	☐

Благодарим ви, че избрахте продукт на Etac. За да избегнете повреди по време на сглобяването, боравенето и използването, е важно да прочетете това ръководство и да го запазите за бъдеща справка. Можете да го намерите и на

www.etac.com. Можете да изберете вашия език чрез връзките „International“ и „Local websites“. Тук ще намерите и друга документация за продукта, като информация за предписване, ръководство с информация преди покупка и инструкции за възстановяване.

В ръководството потребителят е човекът, седящ на стола. Болногледачът е лицето, което помага на потребителя.

Списък на елементите: ● = Важи за,

○ = Принадлежности

Вижте списъка с елементите вдясно, които показват информацията, приложима за всеки продукт.



Изображенията, които са посочени на всяка страница, се намират в началото на ръководството (стр. 3 до 9). Вижте Фигури А до F за съответния текст.

Описание на изделието

Семейството Clean е серия мобилни столове за душ, като Clean и Clean с регулиране на височината се задвижват от помощник, а Clean 24" може да бъде задвижван от потребителя.

Предназначение

Clean, Clean 24" и Clean с регулиране на височината (наричани отук нататък и „изделието“ или „продукта“) са медицински изделия, предназначени за облекчаване на или компенсиране за функционално увреждане поради нараняване или увреждане. Изделието е предназначено да се използва при изпълнение на хигиенни задачи под душа, на мивката или на тоалетната, както и за прехвърляне във и от хигиенните помещения.

Целева потребителска група

Потребителската група на изделието се базира на функционалната способност на конкретния човек, а не на специална диагностика, здравословно състояние или възраст. Предназначено е за хора с височина 146 см или повече, или с маса от 40 кг или повече.

Вторичните потребители на изделието са болногледачите, които осигуряват помощ и медицинските специалисти/техници, които настройват изделието.

Предназначена среда на употреба

Изделието е предназначено за употреба на закрито в домашни условия или в институции и е подходящ за използване в бани, но не и в плавни басейни или други подобни корозионни среди.

Предназначено приложение

Изделието е предназначено за краткосрочна и дългосрочна употреба и може да се прилага няколко пъти на ден.

Изделието е предназначено за употреба в контакт с неповредена кожа. Изделието е предназначено за ремонт и повторна употреба.

Очакван експлоатационен живот

Очакваният експлоатационен живот е 10 години. За пълна информация относно експлоатационния живот на изделието, вижте www.etac.com.

Показания

Показание за употреба е увреждане, включително, но не само, индивид с физически увреждания, който се нуждае от опора за гърба и/или от подлакътници, за да поддържа седяща позиция и помощ при прехвърляне към/от стола.

Противопоказания:

Няма известни противопоказания.

Предупреждения

Предупреждения, описващи даден рисков елемент за определено действие или настройка на изделието, могат да се намерят в съответния раздел.



Проверете чувствителността на потребителя за язва под налягане преди употреба



Не използвайте дефектно изделие. Риск от нараняване.



Нагрятото изделие може да причини изгаряния.



Части от тялото могат да бъдат прищипани при поставяне или изваждане на легненето.



Пренебрегването на инструкциите за употреба може да доведе до наранявания.

Декларация за съответствие

Изделието отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия.

Изделието е тествано и отговаря на изискванията, посочени в EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Информация преди покупка

Информация преди покупка може да бъде намерена на www.etac.com.

Нежелано събитие

В случай на нежелано събитие, свързано с употребата на изделието, то трябва своевременно да бъде докладвано на вашия местен търговец и на националния компетентен орган. Местният търговец ще предаде информацията на производителя.

Персонализиране

е всичко, което надхвърля инструкциите и настройките в ръководството. Изделието, специално адаптирано от клиента, не трябва да запазва CE маркировката на Etac. Гаранцията на Etac изтича.

Описание на изделието

Вижте Фигура А



A1. Опора за гърба **A2.** Опора за ръка **A3.** Седалка **A4.** Опора за крака **A5.** Колелце **A6.** Етикет на продукта (предупреждения, CE маркировка) **A7.** Етикет на номера на продукта (сериен номер, дата на производство)

A8. Задно колело **A9.** Спирачка за потребителя

A10. Регулиране на височината

Символи, етикети

Вижте Фигура В

Символи в ръководството и на изделието:

B1. Предупреждение, предпазна мярка или ограничение. **B2.** Полезни съвети и насоки. **B3.** Материал за рециклиране. **B4.** Частта/функцията е заключена и не може да се мести/регутира. **B5.** Точка на зацепване! **B6.** Комбиниран гаечен ключ **B7.** Макс. тегло на потребителя (вижте техническите данни). **B8.** Видео **B9 – B10.** Почистяване (вижте „Обслужване и поддръжка“). **B11.** Не стойте върху поставката за крака, съществува опасност от преобръщане. **B12.** Позицията на седалка оказва влияние върху стабилността. **B13.** Тегло на продукта **B14.** Прочетете инструкциите за

употреба (синьо и бяло).

Информация за етикета на номера на продукта:

B15. Име на продукта. **B16.** Описание на продукта. **B17.** Сериен номер. **B18.** Номер на артикула. **B19.** Маркировка CE **B20.** Медицинско изделие **B21.** Дата на производство. **B22.** Баркод съгл. GS1-128 GTIN-14 и сериен номер*

*Датата на производство на изделието може да се види от баркода на изделието. Под баркода в скоби е показано числото 11. Числовата комбинация след тези скоби е датата на производство.

Технически данни

Вижте Фигура С

Боравене

Вижте Фигура D

Монтаж при доставка

Прехвърляне през праг:

Само за стола, натиснете надолу приставката на колелото.

С потребителя, издърпайте стола назад.

В положение на покой:

D1-D2 болногледач сте отговорен/на за безопасността на потребителя. Трябва да се използват помощни средства, ако прехвърлянето се счита за рисково. Посетете **D3** www.etac.com за помощни средства за ръчно прехвърляне.

D4

Уверете се, че колелцата са заключени, когато потребителят сяда или става от стола. Риск от нараняване.



Насочете колелата напред и задействайте спирачките, за да намалите риска от преобръщане, когато количката се използва стационарно и по време на прехвърляне. Опасност от нараняване поради преобръщане на изделието.

D5

Отстранете подлакътника от страната на прехвърляне на стола.

Извършете прехвърлянето.

D5-D10

Опори за ръце:

Опорите за ръце могат да се завъртат и да се свалят. **D11**

Опорите за ръце могат да се заключват. **D12**

Опори за крака:

D6

Болногледачът може лесно да натиска опората за краката със своя крак. **D13**

Опората за краката може да се сваля. **D14**



Не сядайте на предния ръб на седалката. Риск от нараняване, ако устройството се преобърне.

Винаги заключвайте колелото се може повече колелца, когато столът ще се използва в стационарно положение.

Прехвърляне:



Насочете колелата напред и задействайте спирачките, за да намалите риска от преобръщане, когато количката се използва стационарно и по време на прехвърляне. Опасност от нараняване поради преобръщане на изделието.



Не стойте върху плочата за крака. Риск от нараняване, ако продуктът се преобърне.

Преценете рисковете и си вземете бележки. Вие като

Настройки

Вижте Фигура Е

Регулиране на височината:

Височината може да се регулира лесно, като се постави винта в нужната позиция.



Проверете дали и четирите колелца са регулирани еднакво, в противен случай стабилността ще се намали.

E1 – E2

Уверете се, че крилчатите гайки са затегнати. Риск от нараняване.

Опори за крака:

Опората за крака има 4 различни настройки на ъгъл и височина.

E3

Опората за крака има 8 различни настройки на ъгъл и височина.

E4

Чрез преместване на щифта се предлагат повече възможности за регулиране.

E5

Когато опората за краката е свалена, опорните щифтове са открити и представляват риск от одраскване на краката.



Когато столът се регулира на височина от 47,5 см, най-ниската позиция на опората за крака не трябва да се използва.

Тапицерия на опората за гърба**E7 – E10****Спирачка за потребителя****E11 – E13**

Риск от притискане при задното колело и шасито/спирачката.

Обслужване и поддръжка

Почиствайте изделието, като използвате стандартен неабразивен почистващ препарат (pH между 5 и 9). Изплакнете и подсушете.

Дезинфекцирайте изделието с разтвор на дезинфектант от 70%.

изделието не изисква никаква друга поддръжка. изделието и неговите принадлежности могат да се почистват безопасно при 85°C в продължение на 3 минути (освен ако не е посочено друго). Това важи за преработване.

Съставните материали са устойчиви на общи дезинфектанти.

За защита от корозия се използват следните методи за повърхностна обработка:

Лакирани повърхности = полиуретаново прахово покритие

Нелакирани стоманени повърхности = Fe/Zn-Ni
5-годишна гаранция срещу материални и производствени дефекти. За правилата и условията вижте www.etac.com.

Транспорт, съхранение и изхвърляне**Съхранение**

Изделието трябва да се съхранява на закрито на сухо място при температура над 5°C. Ако изделието е съхранявано дълго време (повече от четири месеца), функциите му трябва да бъдат проверени от експерт преди употреба.

Да се рециклира в съответствие с националните разпоредби.

Принадлежности		Вижте Фигура F		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1.	Легенче			☐	☐	☐
F2.	Легенче и капак с дръжка			☐	☐	☐
F3.	Капак с дръжка			☐	☐	☐
F4.	Легенче за еднократна употреба			☐	☐	☐
F5.	Поставка за легенче			☐	☐	☐
F6.	Поставка за кофа			☐	☐	☐
F7.	Поставка за легенче за еднократна употреба			☐	☐	☐
F8.	Приставка за по-ниско закрепване на легенче/кофа			☐	☐	☐
F9.	Мека седалка			☐	☐	☐
F10.	Комфортна седалка			☐	☐	☐
F11.	Удобна възглавница			☐	☐	☐
F12.	Капак за седалка			☐	☐	☐
F13.	Мека комфортна седалка*			☐	☐	☐
F14.	Комфортна тапицерия			☐	☐	☐
F15.	Възглавничка за подлакътник, двойка			☐	☐	☐
F16.	Мека задна част			☐	☐	☐

Принадлежности		Вижте Фигура F		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17.	Подпора за багажник			☐	☐	☐
F18.	Дистанционери за повдигане			☐	☐	☐
F19.	Две заключващи се колелца от 75 мм			☐	☐	☐
F20.	Адаптер за задно колело			☐	☒	☐
F21.	Сапунерка			☐	☐	☐
F22.	Напречна греда			☐	☐	☐
F23.	Опора за краката, сгъваема и сваляща се			☐	☐	☐
F24.	Тапицерия на облегалката			☐	☐	☐
F25.	Обезопасителен колан			☐	☐	☐
F26.	Колан за позициониране			☐	☐	☐
F27.	Гръден колан			☐	☐	☐
F28.	Колани за позициониране на гръдния кош и бедрата			☐	☐	☐
F29.	Защита срещу пръски			☐	☐	☐

*Подходящ само за модели Clean с отвор на седалката отпред

cs Obecné informace

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Etac. Abyste se vyvarovali poškození při sestavování produktu, manipulaci s ním a jeho používání, přečtěte si tento návod a uchovejte ho pro budoucí použití. Najdete ho také na webových stránkách www.etac.com. Příslušný jazyk můžete zvolit prostřednictvím odkazů „International“ a „Local web-sites“. Naleznete zde také další dokumentaci k produktům, jako jsou např. informace pro předepisující osoby, průvodce před nákupem a pokyny pro obnovu.

V této příručce je uživatel osoba, která sedí na vozíku. Doprovod je osoba, která pomáhá uživateli.

Seznam položek: ● = Platí pro, ○ = Příslušenství

Prohlédněte si seznam položek napravo, kde jsou uvedeny informace týkající se jednotlivých výrobků.



Obrázky odkazované na jednotlivých stranách jsou uvedeny na začátku příručky (str. 3 až 9). Pro příslušný text, viz obrázky A až F.

Popis zařízení

Clean je řada mobilních sprchovacích toaletních křesel, z nichž modely Clean a Clean Height s nastavitelnou výškou obsluhuje asistent a model Clean 24" může obsluhovat uživatel.

Určený účel

Křesla Clean, Clean 24" a Clean Height s nastavitelnou výškou (dále rovněž jen „zařízení“ nebo „výrobek“) jsou zdravotnické prostředky určené ke zmírnění nebo kompenzaci funkčního omezení v důsledku zranění nebo invalidity. Zařízení je určeno k použití při provádění hygienických úkonů ve sprše, u umyvadla nebo na toaletě a rovněž při přesunech do a z místnosti určené k provádění hygienických úkonů.

Cílová skupina uživatelů

Definice skupiny uživatelů zařízení je založena na funkčních schopnostech jednotlivce, nikoli na konkrétní diagnóze, zdravotním stavu nebo věku. Výrobek je určen pro osoby s tělesnou výškou vyšší než 146 cm nebo s hmotností vyšší než 40 kg.

Sekundárními uživateli zařízení jsou pečovatelé poskytující pomoc a zdravotníci pracovníci/technici, kteří provádí nastavení zařízení.

Určené prostředí použití

Zařízení je určeno k použití v interiéru v domácím prostředí nebo institucích a je vhodné pro použití v koupelnách, nikoli však v bazénech nebo v podobných korozivních prostředích.

Určené použití

Zařízení je určeno ke krátkodobému a dlouhodobému použití a lze jej používat několikrát denně.

Zařízení je určeno k použití v kontaktu s neporušenou pokožkou. Zařízení je určeno k renovaci a opětovnému použití.

Předpokládaná životnost výrobku

Předpokládaná životnost je 10 let. Kompletní informace o životnosti zařízení naleznete na webových stránkách www.etac.com.

Indikace

Indikace použití je invalidita, mimo jiné včetně osob s tělesným postižením, které potřebují opěrku zad a/nebo područku pro udržení polohy vsedě a pomoc při přesunech na křeslo a/nebo z křesla.

Kontraindikace:

Nejsou známe žádné kontraindikace.

Varování

Varování popisující rizika konkrétních úkonů nebo nastavení zařízení naleznete v příslušné části návodu.



Před použitím zkontrolujte citlivost uživatele na proleženiny.



Vadné zařízení nesmí být používáno. Nebezpečí poranění.



Zahřáté zařízení může způsobit popálení.



Při nasazování nebo sundávání mísy může dojít k přiskřípnutí části těla.



Nedodržení návodu k použití může vést ke zranění.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Zařízení je otestováno a splňuje požadavky normy EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Informace před zakoupením

Informace před zakoupením naleznete na adrese www.etac.com.

Nežádoucí příhody

V případě, že v souvislosti s používáním zařízení dojde k nežádoucí příhodě, je třeba ji včas nahlásit místnímu prodejci a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce informaci předá výrobci.

Vlastní nastavení

je vše, co přesahuje pokyny a nastavení uvedené v příručce. Zařízení speciálně upravené zákazníkem nesmí nést označení CE společnosti Etac. Záruka společnosti Etac pozbývá platnosti.

Popis zařízení

Viz obrázek A



A1. Zádová opěrka **A2.** Područka **A3.** Sedadlo **A4.** Stupačka **A5.** Kolečko **A6.** Štítek výrobku (varování, označení CE)
A7. Štítek s číslem položky (výr. č., datum výroby)

A8. Zadní kolo **A9.** Brzda uživatele

A10. Nastavení výšky

Symboly, štítky

Viz obrázek B

Symboly v návodu a na zařízení:

B1. Varování, upozornění nebo omezení. **B2.** Užitečné rady a tipy. **B3.** Materiál pro recyklaci. **B4.** Součást/funkce je zablokována a nelze s ní pohybovat/seřizovat ji. **B5.** Nebezpečí přiskřípnutí! **B6.** Nářadí očkový klíč **B7.** Maximální hmotnost uživatele (viz technické údaje). **B8.** Video **B9–B10.** Čištění (viz část Servis a údržba). **B11.** Nestůjte na stupačce, hrozí nebezpečí převrácení. **B12.** Poloha sedadla má vliv na stabilitu. **B13.** Hmotnost výrobku **B14.** Přečtěte si návod k použití (modrá a bílá)

Informace o: položka číslo značení:

B15. Název výrobku. **B16.** Popis výrobku. **B17.** Výrobní číslo. **B18.** Číslo položky. **B19.** Označení CE **B20.** Lékařské zařízení **B21.** Datum výroby. **B22.** Čárový kód podle GS1-128 GTIN-14 a výrobní číslo*

*Datum výroby výrobku lze načíst z čárového kódu na zařízení. Pod čárovým kódem je v závorkách uvedeno číslo 11. Číselná kombinace za závorkami je datum výroby.

Technické údaje

Viz obrázek C

Manipulace

Viz obrázek D

Instalace po dodání

Přesun přes práh:

Pouze u křesla, zatlačte na nástavec s kolem.

S uživatelem táhněte křeslo dozadu.

V klidové poloze:



Otočte kolečka dopředu a aktivujte brzdy pro snížení nebezpečí převržení, když je křeslo používáno stacionárně a při přesunu. Nebezpečí úrazu v případě převržení prostředku.

D5



Nesedejte si na přední hranu sedadla. Nebezpečí úrazu v případě převrácení zařízení.

Pokud má být křeslo používáno v klidové poloze, vždy zamkněte co nejvíce koleček.

Přesun:



Otočte kolečka dopředu a aktivujte brzdy pro snížení nebezpečí převržení, když je křeslo používáno stacionárně a při přesunu. Nebezpečí úrazu v případě převržení prostředku.

Vyhodnoťte rizika a udělejte si poznámky. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost uživatele. Pokud je přesun pova-

D1–D2 žován za riskantní, je nutno používat pomůcky. Pomůcky pro manuální přesun naleznete na webu www.etac.com.

D3

D4



Ujistěte se, že když si uživatel do křesla sedá nebo z něj vstává, jsou kolečka zamknuta. Nebezpečí poranění.

Na straně přesunu z křesla sundejte područku.

Provedte přesun.

D5–D10

Područky:

Područky jsou odklopné a odnímatelné.

D11

Područky jsou uzamykatelné.

D12

Stupačky:

Ošetřovatel může stupačku snadno zatlačit nohou.

D13

D6

Stupačka je odnímatelná.

D14



Na stupačku nikdy nestoupejte. Nebezpečí úrazu v případě převrácení výrobku.

Nastavení

Viz obrázek E

Nastavení výšky:

Výšku lze snadno nastavit umístěním šroubu do požadované polohy.



Zkontrolujte, zda jsou všechna čtyři kolečka nastavena podobně, jinak se sníží stabilita.

E1–E2



Ujistěte se, že jsou křídlové matice utažené. Nebezpečí poranění.

Stupačky:

Stupačka má 4 různá nastavení úhlu a výšky.

E3

Stupačka má 8 různých nastavení úhlu a výšky.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Servis a údržba

5 let záruka na materiálové a výrobní vady. Podmínky záruky viz www.etac.com.

Přeprava, skladování a likvidace

Zařízení skladujte ve vnitřních prostorách na suchém místě při teplotě nad 5 °C. Pokud je zařízení skladováno dlouhodobě (déle než čtyři měsíce), musí jeho funkčnost před použitím zkontrolovat odborník.

Příslušenství	Viz obrázek F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Mísa		☐	☐	☐
F2. Mísa a víko s držadlem		☐	☐	☐
F3. Víko s držadlem		☐	☐	☐
F4. Jednorázová mísa		☐	☐	☐
F5. Držák mísy		☐	☐	☐
F6. Držák nádoby		☐	☐	☐
F7. Držák jednorázové mísy		☐	☐	☐
F8. Nástavec pro spodní montáž mísy/nádoby		☐	☐	☐
F9. Měkké prkénko		☐	☐	☐
F10. Pohodlné prkénko		☐	☐	☐
F11. Pohodlný polštář		☐	☐	☐
F12. Víko prkénka		☐	☐	☐
F13. Měkké pohodlné prkénko*		☐	☐	☐
F14. Pohodlné polstrování		☐	☐	☐
F15. Polštář na područce, dva kusy		☐	☐	☐
F16. Měkké opěradlo		☐	☐	☐

Příslušenství	Viz obrázek F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Opěra trupu		☐	☐	☐
F18. Distanční vložky		☐	☐	☐
F19. Dvě aretační kolečka 75 mm		☐	☐	☐
F20. Adaptér zadního kola		☐	☒	☐
F21. Miska na mýdlo		☐	☐	☐
F22. Příčka		☐	☐	☐
F23. Stupačka, sklopná a odnímatelná		☐	☐	☐
F24. Polstrování opěradla		☐	☐	☐
F25. Bezpečnostní pás		☐	☐	☐
F26. Polohovací pás		☐	☐	☐
F27. Hrudní popruh		☐	☐	☐
F28. Polohovací pásy na hrudník a boky		☐	☐	☐
F29. Kryt proti rozstříku		☐	☐	☐

*Vhodné pouze pro modely křesla Clean s otvorem v přední části sedadla

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Etac. Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών κατά τη συναρμολόγηση, τον χειρισμό και τη χρήση, είναι σημαντικό να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε, επειδή είναι πιθανό να το χρειαστείτε στο μέλλον. Μπορείτε να το βρείτε επίσης στον ιστότοπο www.etac.com. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας μέσω του συνδέσμου «International (Διεθνής ιστότοπος)» και «Local websites (Τοπικοί ιστότοποι)». Εδώ θα βρείτε και άλλα έγγραφα για το προϊόν, όπως πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας με δικαίωμα συνταγογράφησης, οδηγό προαγοράς και οδηγίες αποκατάστασης.

Στο εγχειρίδιο, ο χρήστης είναι το άτομο που κάθεται στο αμαξίδιο. Ο φροντιστής είναι το άτομο που βοηθά τον χρήστη.

Κατάλογος ειδών: ● = Ισχύει για, ○ = Παρελκόμενα

Δείτε στη δεξιά πλευρά του καταλόγου ειδών όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που ισχύουν για κάθε προϊόν.



Οι εικόνες που αναφέρονται σε κάθε σελίδα βρίσκονται στην αρχή του εγχειριδίου (σελίδες 3 έως 9). Για το αντίστοιχο κείμενο, ανατρέξτε στις εικόνες Α έως ΣΤ.

Περιγραφή ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Η οικογένεια των προϊόντων Clean είναι μια σειρά φορητών αμαξιδίων τουαλέτας και ντους, της οποίας τα μοντέλα Clean και Clean Height Adjustable ωθούνται από βοηθό, ενώ το μοντέλο Clean 24" μπορεί να ωθηθεί από τον ίδιο τον χρήστη.

Προβλεπόμενος σκοπός

Τα μοντέλα Clean, Clean 24" και Clean Height Adjustable (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται και ως «το ιατροτεχνολογικό προϊόν» ή απλώς «το προϊόν») είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται για την ανακούφιση ή την αντιστάθμιση μιας λειτουργικής βλάβης λόγω τραυματισμού ή αναπηρίας. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά την εκτέλεση εργασιών υγιεινής στο ντους, στον νιπτήρα ή επάνω από την τουαλέτα, καθώς και για τη μεταφορά προς και από τον χώρο υγιεινής.

Προβλεπόμενη ομάδα χρηστών

Η ομάδα χρηστών για το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθορίζεται με βάση τη λειτουργική ικανότητα κάθε ατόμου και όχι κάποια συγκεκριμένη διάγνωση, πάθηση ή ηλικία. Προορίζεται για άτομα ύψους 146 cm και άνω ή βάρους 40 kg και άνω.

Οι δευτερεύοντες χρήστες του ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι φροντιστές που παρέχουν βοήθεια και ιατροί/τεχνικοί που εγκαθιστούν και ρυθμίζουν το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Προβλεπόμενο περιβάλλον

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κατοικιών ή ιδρυμάτων. Η χρήση του ενδείκνυται σε μπάνια, αλλά όχι σε πισίνες ή παρόμοια διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Προβλεπόμενη εφαρμογή

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί πολλές φορές την ημέρα.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για χρήση σε επαφή με υγιή επιδερμίδα. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση.

Αναμενόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής είναι 10 έτη. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.etac.com.

Ενδείξεις

Ένδειξη χρήσης αποτελεί η αναπηρία, περίπτωση στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι σωματικές αναπηρίες ενός ατόμου που χρειάζεται στήριγμα πλάτης και/ή μπράτσα για να παραμένει καθιστό και βοήθεια στη μεταφορά προς/από το αμαξίδιο.

Αντενδείξεις:

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις που περιγράφουν ένα στοιχείο κινδύνου για μια συγκεκριμένη ενέργεια ή ρύθμιση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρατίθενται στη σχετική ενότητα.



Πριν τη χρήση, ελέγξτε την ευαισθησία του χρήστη για εμφάνιση ελκών πίεσης.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν αν είναι ελαττωματικό. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν θερμαίνεται, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει εγκαύματα.



Κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση του δοχείου, υπάρχει κίνδυνος να αγκυλωθούν κάποια σημεία του σώματος.



Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΕΕ) 2017/745.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 10993-1 και ISO 17966:2016.

Πληροφορίες για προαγορά

Πληροφορίες για προαγορά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.etac.com.

Ανεπιθύμητα συμβάντα

Αν τυχόν σημειωθεί κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν όσον αφορά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να το αναφέρετε έγκαιρα στον τοπικό σας αντιπρόσωπο και στην εθνική αρμόδια αρχή. Ο τοπικός αντιπρόσωπος θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον κατασκευαστή.

Εξατομίκευση

είναι καθετί που δεν εμπίπτει στις οδηγίες και στις ρυθμίσεις οι οποίες παρατίθενται στο εγχειρίδιο. Κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν στο οποίο έχουν γίνουν ειδικές προσαρμογές από τον πελάτη δεν πρέπει να εξακολουθεί να φέρει να φέρει τη σήμανση CE της Etac. Η εγγύηση της Etac λήγει.

Περιγραφή ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Ανατρέξτε στην Εικόνα Α.



A1. Στήριγμα πλάτης **A2.** Στήριγμα χεριού **A3.** Κάθισμα **A4.** Στήριγμα ποδιών **A5.** Τροχός **A6.** Ετικέτα προϊόντος (προειδοποιήσεις, σήμανση CE) **A7.** Ετικέτα κωδικού είδους (σειριακός αριθμός, ημερομηνία παραγωγής)

A8 Πίσω τροχός **A9.** Φρένο χρήστη

A10 Ρύθμιση ύψους

Σύμβολα, ετικέτες

Ανατρέξτε στην Εικόνα Β.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο και στο ιατροτεχνολογικό προϊόν:

B1. Προειδοποίηση, προφύλαξη ή περιορισμός. **B2.** Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. **B3.** Υλικό για ανακύκλωση. **B4.** Το εξάρτημα/Η λειτουργία έχει κλειδωθεί και δεν είναι δυνατή η μετακίνηση/ρύθμιση. **B5.** Αιχμηρό σημείο! **B6.** Κλειδί σύσφιξης πολυγωνικών κεφαλών **B7.** Μέγιστο βάρος χρήστη (Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα.) **B8.** Βίντεο **B9-B10.** Καθαρισμός (Ανατρέξτε στις εργασίες επισκευής και συντήρησης.) **B11.** Μην πατάτε επάνω στο υποπόδιο. Υπάρχει κίνδυνος να πέσετε. **B12.** Η θέση στην οποία κάθεται ο χρήστης επηρεάζει τη σταθερότητα. **B13.** Βάρος προϊόντος **B14.** Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης (γαλανόλευκο).

Πληροφορίες στην ετικέτα κωδ. είδους:

B15. Ονομασία προϊόντος. **B16.** Περιγραφή προϊόντος. **B17.** Σειριακός αριθμός. **B18.** Κωδικός είδους. **B19.** Σήμανση CE **B20.** Ιατρική συσκευή **B21.** Ημερομηνία παραγωγής. **B22.** Γραμμοκωδικός κατά GS1-128 και GTIN-14 και σειριακός αριθμός*

*Μπορείτε να διαβάσετε την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τον γραμμοκωδικό που αναγράφεται στο ιατροτεχνολογικό προϊόν. Κάτω από τον γραμμοκωδικό, εμφανίζεται ο αριθμός 11 μέσα σε αγκύλες. Ο συνδυασμός των αριθμών μετά από τις αγκύλες αυτές είναι η ημερομηνία κατασκευής.

Τεχνικά δεδομένα

Ανατρέξτε στην Εικόνα Γ.

Χειρισμός

Ανατρέξτε στην Εικόνα Δ.

Εγκατάσταση κατά την παράδοση

Μεταφορά πάνω από κατώφλι:

Αν πρόκειται να μεταφέρετε μόνο το αμαξίδιο, πιάστε προς τα κάτω το προσάρτημα του τροχού.

Αν ο χρήστης βρίσκεται στο αμαξίδιο, τραβήξτε το προς τα πίσω.

Σε θέση ακινητοποίησης:



Στρέψτε τους τροχούς προς τα εμπρός και ενεργοποιήστε τα φρένα για να μειωθεί ο κίνδυνος ανατροπής κατά τη χρήση του καθίσματος σε σταθερή θέση και κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ανατροπής του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Δ5



Δεν πρέπει να κάθεστε στο μπροστινό άκρο του καθίσματος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Όποτε το αμαξίδιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέση ακινητοποίησης, πάντα πρέπει να ασφαλίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους τροχούς.

Μεταφορά:



Στρέψτε τους τροχούς προς τα εμπρός και ενεργοποιήστε τα φρένα για να μειωθεί ο κίνδυνος ανατροπής κατά τη χρήση του καθίσματος σε σταθερή θέση και κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ανατροπής του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Δ1-Δ2 Αξιολογήστε τους κινδύνους και σημειώστε τους. Ως φροντιστής έχετε την ευθύνη για την ασφάλεια του χρήστη. Αν η μεταφορά θεωρηθεί επικίνδυνη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βοηθήματα.

Δ3 Για να βρείτε χειροκίνητα βοηθήματα μεταφοράς, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.etac.com.

Δ4



Όποτε ο χρήστης κάθεται ή σηκώνεται από το αμαξίδιο, πρέπει να βεβαιώνετε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Αφαιρέστε το μπράτσο που βρίσκεται στην πλευρά της μεταφοράς του αμαξιδίου.

Πραγματοποιήστε τη μεταφορά.

Δ5-Δ10

Στηρίγματα χεριών:

Τα στηρίγματα των χεριών κινούνται και αποσπώνται.

Δ11

Τα στηρίγματα των χεριών είναι ασφαλιζόμενα.

Δ12

Στηρίγματα ποδιών:

Ο φροντιστής μπορεί να σπρώξει εύκολα με το πόδι του το στήριγμα ποδιών προς τα μέσα.

Δ13

Το στήριγμα ποδιών είναι αποσπώμενο.

Δ14



Δεν πρέπει να στέκεστε επάνω στην πλάκα ποδιών. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Ρυθμίσεις

Ανατρέξτε στην Εικόνα Ε.

Ρύθμιση ύψους:

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το ύψος τοποθετώντας τη βίδα στην απαιτούμενη θέση.

E1-E2



Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις τροχοί είναι ρυθμισμένοι με παρόμοιο τρόπο. Αλλιώς, θα μειωθεί η σταθερότητα.



Πρέπει να βεβαιώνετε ότι τα παξιμάδια-πεταλούδες είναι σφιγμένα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Στηρίγματα ποδιών:

Το στηρίγμα ποδιών διαθέτει 4 διαφορετικές ρυθμίσεις γωνίας και ύψους.

E3

Το στηρίγμα ποδιών διαθέτει 8 διαφορετικές ρυθμίσεις γωνίας και ύψους.

E4

Μετακινώντας τον πόρο, έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες επιλογές ρύθμισης.

E5

Κατά την αφαίρεση του στηρίγματος ποδιών, τα μπουλόνια στήριξης είναι εκτεθειμένα και υπάρχει κίνδυνος να γδάρουν τα πόδια του χρήστη.



Όποτε ρυθμίζετε το αμαξίδιο σε ύψος 47,5 cm, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη θέση του υποποδίου.

Ταπετσαρία στηρίγματος πλάτης**E7-E10****Φρένο χρήστη****E11-E13**

Υπάρχει κίνδυνος συμπίεσης στον πίσω τροχό και στο πλαίσιο/φρένο.

Εργασίες επισκευής και συντήρησης

Καθαρίστε το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μη λειαντικό καθαριστικό (με pH μεταξύ 5 και 9). Ξεπλύνετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν και στεγνώστε το. Απολυμάνετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα απολυμαντικού με περιεκτικότητα 70%. Δεν απαιτούνται άλλες εργασίες συντήρησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Μπορείτε να καθαρίζετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν και τα παρελκόμενά του με ασφάλεια σε θερμοκρασία 85°C επί 3 λεπτά (εφόσον δεν καθορίζεται κάποια διαφορετική μέθοδος). Αυτό ισχύει και για την αποκατάσταση.

Τα συστατικά υλικά είναι ανθεκτικά στα συνηθισμένα απολυμαντικά. Για προστασία από τη διάβρωση, έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής μέθοδοι επεξεργασίας των επιφανειών: Λακαρισμένες επιφάνειες = Επίστρωση με πούδρα πολυεστέρα Μη λακαρισμένες χαλύβδινες επιφάνειες = Fe/Zn-Ni 5ετής εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.etac.com.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη**Αποθήκευση**

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικούς χώρους, σε σημείο χωρίς υγρασία και σε θερμοκρασία άνω των 5°C. Αν έχει παραμείνει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από τέσσερις μήνες), η λειτουργία του πρέπει να ελέγχεται από ειδικό πριν τη χρήση.

Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί όπως προβλέπεται από τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

Παρελκόμενα	Ανατρέξτε στην Εικόνα ΣΤ.	Clean	Clean 24"	Clean H. Adj.
ΣΤ1 Δοχείο		☐	☐	☐
ΣΤ2 Δοχείο και καπάκι με λαβή		☐	☐	☐
ΣΤ3 Καπάκι με λαβή		☐	☐	☐
ΣΤ4 Δοχείο μίας χρήσης		☐	☐	☐
ΣΤ5 Υποδοχή δοχείου		☐	☐	☐
ΣΤ6 Υποδοχή κάδου		☐	☐	☐
ΣΤ7 Υποδοχή δοχείου μίας χρήσης		☐	☐	☐
ΣΤ8 Προσάρτημα για χαμηλή τοποθέτηση δοχείου/ κάδου		☐	☐	☐
ΣΤ9 Μαλακό κάθισμα		☐	☐	☐
ΣΤ10 Κάθισμα άνεσης		☐	☐	☐
ΣΤ11 Μαξιλάρι άνεσης		☐	☐	☐
ΣΤ12 Καπάκι καθίσματος		☐	☐	☐
ΣΤ13 Μαλακό κάθισμα άνεσης*		☐	☐	☐
ΣΤ14 Υπόθεμα άνεσης		☐	☐	☐
ΣΤ15 Μαξιλάρι μπράτσου, ζεύγος		☐	☐	☐

Παρελκόμενα	Ανατρέξτε στην Εικόνα ΣΤ.	Clean	Clean 24"	Clean H. Adj.
ΣΤ16 Μαλακή πλάτη		☐	☐	☐
ΣΤ17 Στήριγμα κορμού		☐	☐	☐
ΣΤ18 Τάκοι υπερύψωσης		☐	☐	☐
ΣΤ19 Δύο ασφαλιζόμενοι τροχοί 75 mm		☐	☐	☐
ΣΤ20 Προσαρμογέας πίσω τροχού		☐	☒	☐
ΣΤ21 Σαπουνοθήκη		☐	☐	☐
ΣΤ22 Εγκάρσια ράβδος		☐	☐	☐
ΣΤ23 Στήριγμα ποδιών, αναδιπλούμενο και αποσπώμενο		☐	☐	☐
ΣΤ24 Ταπετσαρία στηρίγματος πλάτης		☐	☐	☐
ΣΤ25 Ζώνη ασφαλείας		☐	☐	☐
ΣΤ26 Ζώνη συγκράτησης στη σωστή θέση		☐	☐	☐
ΣΤ27 Ζώνη τύπου σαγής για τον θώρακα		☐	☐	☐
ΣΤ28 Ζώνες συγκράτησης θώρακα και ισχίων στη σωστή θέση		☐	☐	☐
ΣΤ29 Πτερύγιο προστασίας από πιτσιλιές		☐	☐	☐

*Ενδείκνυται μόνο για μοντέλα Clean με άνοιγμα καθίσματος στην μπροστινή πλευρά.

es Información general

Gracias por elegir un producto Etac. Para evitar daños durante el montaje, la manipulación y el uso, es importante leer este manual y guardarlo para futuras consultas. El manual también está disponible en www.etac.com. Puede seleccionar su idioma a través del enlace «Internacional» y «Sitios web locales». Aquí encontrará también otra documentación del producto, como información del profesional sanitario, guía previa a la compra e instrucciones de reacondicionamiento.

En el manual, el usuario hace referencia a la persona que se sienta en la silla. El cuidador es la persona que ayuda al usuario.

Lista de productos: ● = Se aplica a, ○ = Accesorios

Consulte la lista de elementos de la derecha, donde se muestra la información correspondiente a cada producto.



Las imágenes a las que se hace referencia en cada página se encuentran al principio del manual (páginas de la 3 a la 9). Consulte las figuras de la A a la F para ver el texto correspondiente.

Descripción del dispositivo

Clean es una gama de inodoros portátiles de ducha, en los que los asientos Clean y Clean Height regulables son impulsados por un asistente y los asientos Clean 24" pueden ser impulsados por el usuario.

Uso previsto

Clean, Clean 24" y Clean Height regulable (en adelante, también denominados «el dispositivo» o «el producto») son dispositivos médicos diseñados para aliviar o compensar una discapacidad funcional debida a una lesión o incapacidad. El dispositivo puede utilizarse en las tareas de higiene personal en duchas, lavabos e inodoros, así como en traslados hacia y desde la sala de higiene.

Grupo de usuarios previsto

El grupo de usuarios del dispositivo se basa en la capacidad funcional de la persona y no en un diagnóstico, estado de salud o edad específicos. Está diseñado para personas con una altura de 146 cm o más, o una masa de 40 kg o más.

Los usuarios secundarios del dispositivo son cuidadores que proporcionan asistencia y médicos/técnicos que configuran el dispositivo.

Entorno previsto

El dispositivo está diseñado para su uso en interiores en entornos domésticos o instituciones y es adecuado para su uso en cuartos de baño, pero no en piscinas ni entornos corrosivos similares.

Uso previsto

El dispositivo está diseñado para un uso a corto y largo plazo y se puede aplicar varias veces al día.

El dispositivo está diseñado para el uso con piel intacta. El dispositivo se ha diseñado para que pueda reacondicionarse y reutilizarse.

Vida útil prevista

La vida útil prevista es de 10 años. Para obtener más información sobre la vida útil del producto, consulte www.etac.com.

Indicaciones

La indicación de uso es la discapacidad, que incluye, entre otros, a una persona con discapacidades físicas que necesita respaldo o reposabrazos para mantener una posición sentada y asistencia en los traslados hacia o desde la silla.

Contraindicaciones:

No existen contraindicaciones conocidas.

Advertencias

Las advertencias que describen un elemento de riesgo para una acción o configuración específica del dispositivo se pueden encontrar en la sección correspondiente.



Compruebe la sensibilidad del usuario a las úlceras por presión antes de su uso



No utilice un dispositivo defectuoso. Riesgo de lesiones.



Si el dispositivo se calienta puede provocar quemaduras.



Algunas partes del cuerpo pueden pellizcarse al colocar o retirar la bandeja.



El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar lesiones.

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los requisitos del Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

El dispositivo ha sido probado y cumple los requisitos de la norma EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Información previa a la compra

La información previa a la compra se puede encontrar en www.etac.com.

Acontecimientos adversos

En caso de que se produzca un acontecimiento adverso en relación con el uso del dispositivo, deberá informar de la incidencia, a su debido tiempo, a su distribuidor local y a la autoridad competente nacional. El distribuidor local enviará la información al fabricante.

Personalización

es todo lo que va más allá de las instrucciones y ajustes del manual. El dispositivo adaptado especialmente por el cliente no debe mantener el marcado CE de Etac. La garantía de Etac expira.

Descripción del dispositivo

Consulte la figura A



A1. Respaldo **A2.** Reposabrazos **A3.** Asiento **A4.** Reposapiés **A5.** Rueda **A6.** Etiqueta del producto (advertencias, marcado CE) **A7.** Etiqueta del número de artículo (n.º de serie, fecha de producción)

A8. Rueda trasera **A9.** Freno del usuario

A10. Ajuste de la altura

Símbolos, etiquetas

Consulte la figura B

Símbolos presentes en el manual y en el dispositivo:

B1. Advertencia, precaución o limitación. **B2.** Consejos y sugerencias útiles. **B3.** Materiales para reciclar. **B4.** La pieza o función está bloqueada y no se puede mover ni ajustar. **B5.** Punto de pellizco **B6.** Llave de boca **B7.** Peso máx. del usuario (consulte los datos técnicos). **B8.** Vídeo **B9-B10.** Limpieza (consulte Servicio y mantenimiento). **B11.** No se ponga de pie sobre el reposapiés, ya que podría volcar. **B12.** La posición del asiento influye en la estabilidad. **B13.** Peso del producto **B14.** Lea las instrucciones de uso (azul y blanco).

Información en la etiqueta del n.º de producto:

B15. Nombre del producto. **B16.** Descripción del producto. **B17.** Número de serie. **B18.** Número de artículo. **B19.** Marchio CE **B20.** Producto sanitario **B21.** Fecha de fabricación. **B22.** Código de barras según GS1-128 GTIN-14 y n.º de serie*

*La fecha de fabricación del dispositivo se puede leer en su código de barras. El número 11 se muestra debajo del código de barras entre paréntesis. La combinación numérica después de estos soportes es la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Consulte la figura C

Manipulación

Consulte la figura D

Montaje tras la entrega

Traslado por encima de un umbral:

Solo la silla, empuje hacia abajo la fijación de la rueda. **D3**

Con el usuario, tire de la silla hacia atrás. **D4**

En posición estacionaria:



Apunte las ruedas hacia delante y active los frenos para reducir el riesgo de vuelco cuando la silla se utilice de forma estacionaria y durante el traslado. Peligro de lesiones por vuelco del dispositivo. **D5**



No se siente en el borde delantero del asiento. Peligro de lesiones por vuelco del equipo.

Bloquee siempre tantas ruedas como sea posible cuando la silla se vaya a utilizar en una posición estacionaria. **D6**

Traslado:



Apunte las ruedas hacia delante y active los frenos para reducir el riesgo de vuelco cuando la silla se utilice de forma estacionaria y durante el traslado. Peligro de lesiones por vuelco del dispositivo.

Evalúe los riesgos y tome notas. Como asistente, usted es responsable de la seguridad del usuario. Se deben utilizar dispositivos de ayuda en el caso de que el traslado se con-

D1-D2 sidere arriesgado. Visite www.etac.com para obtener información acerca de las ayudas manuales para traslados.



Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas cuando el usuario se siente o se levante de la silla. Riesgo de lesiones.

Retire el reposabrazos del lado de traslado de la silla.

Realice el traslado. **D5-D10**

Reposabrazos:

Los reposabrazos son abatibles y desmontables. **D11**

Los reposabrazos se pueden bloquear. **D12**

Reposapiés:

El cuidador puede empujar fácilmente el reposapiés con el pie. **D13**

El reposapiés es desmontable. **D14**



No se apoye nunca en el reposapiés. Peligro de lesiones por vuelco del producto.

Configuración

Consulte la figura E

Ajuste de la altura:

La altura puede ajustarse fácilmente colocando el tornillo en la posición requerida.



Compruebe que las cuatro ruedas estén ajustadas de forma similar; de lo contrario, la estabilidad disminuirá.

E1-E2



Asegúrese de que las tuercas de mariposa estén apretadas. Riesgo de lesiones.

Reposapiés:

El reposapiés tiene 4 ajustes diferentes en ángulo y altura. **E3**

El reposapiés tiene 8 ajustes diferentes en ángulo y altura. **E4**

E5



E7-E10

E11-E13



Servicio y mantenimiento

Garantía de 5 años por defectos de materiales y fabricación. Consulte los términos y condiciones en www.etac.com.

Transporte, almacenamiento y eliminación

52

Accesorios	Consulte la figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Cuña		☐	☐	☐
F2. Cuña y tapa con asa		☐	☐	☐
F3. Tapa con asa		☐	☐	☐
F4. Cuña desechable		☐	☐	☐
F5. Soporte para cuña		☐	☐	☐
F6. Soporte para cubo		☐	☐	☐
F7. Guía de cuña desechable		☐	☐	☐
F8. Accesorio para montaje bajo de la cuña/cubo		☐	☐	☐
F9. Asiento acolchado		☐	☐	☐
F10. Asiento confort		☐	☐	☐
F11. Cojín confort		☐	☐	☐
F12. Tapa del asiento		☐	☐	☐
F13. Asiento cómodo y blando*		☐	☐	☐
F14. Acolchado confort		☐	☐	☐
F15. Cojín para reposabrazos, par		☐	☐	☐
F16. Respaldo acolchado		☐	☐	☐

Accesorios	Consulte la figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Soporte para el tronco		☐	☐	☐
F18. Separadores de refuerzo		☐	☐	☐
F19. Dos ruedas de 75 mm con dispositivo de bloqueo		☐	☐	☐
F20. Adaptador para rueda trasera		☐	☒	☐
F21. Soporte para jabón		☐	☐	☐
F22. Travesaño		☐	☐	☐
F23. Reposapiés, plegable y desmontable		☐	☐	☐
F24. Tapizado del respaldo		☐	☐	☐
F25. Cinturón de seguridad		☐	☐	☐
F26. Cinturón de colocación		☐	☐	☐
F27. Cinturón de arnés pectoral		☐	☐	☐
F28. Cinturones de posicionamiento de pecho y cadera		☐	☐	☐
F29. Protector contra salpicaduras		☐	☐	☐

*Solo apto para modelos Clean con una abertura del asiento en la parte delantera

Üldine teave

Täname, et valisite Etaci toote. Kokkupaneku, käsitlemise ja kasutamise ajal kahjustuste vältimiseks tuleb see juhend läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida. Leiate selle ka veebilehelt www.etac.com. Oma keele saate valida linkide „International“ ja „Local web-sites“ kaudu. Siit leiate ka muu tootedokumentatsiooni, nagu näiteks väljakirjutaja teabe, ostueelsed juhised ja remondijuhised.

Kasutusjuhendis on „kasutaja“ toolis istuv isik. „Hooldaja“ on kasutajat abistav isik.

Artiklite loend: ● = Kehtivus, ○ = Tarvikud

Vaadake parempoolset artiklite loendit, mis näitab iga toote kohta kehtivat teavet.



Pildid, millele igal leheküljel viidatakse, leiate juhendi algusest (lk 3–9). Vastava teksti leiate joonistelt A kuni F.

Seadme kirjeldus

Tooteperekonda Clean kuuluvad mobiilsed dušitoolid, millest Clean ja Clean Height adjustable on abilise poolt pööratavad ning Clean 24" kasutaja poolt pööratav.

Ettenähtud kasutusotstarve

Clean, Clean 24" ja Clean Height adjustable (edaspidi „seade“ või „toode“) on meditsiiniseadmed, mis on ette nähtud vigastusest või puudest tingitud funktsionaalse kahjustuse leevendamiseks või kompenseerimiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks hügieenitoimingute tegemiseks duši all, valamü ääres või tualeti kohal, samuti pesemisruumi sisenemiseks ja sealt väljumiseks.

Ettenähtud kasutajarühm

Seadme kasutajarühma määratleb inimese funktsionaalne võimekus, mitte konkreetne diagnoos, tervislik seisund ega vanus. See on mõeldud isikutele pikkusega vähemalt 146 cm ja kaaluga vähemalt 40 kg.

Seadme sekundaarsed kasutajad on hooldajad, kes kasutajat abistavad, ja klinitsistid/tehnikud, kes seadme ette valmistavad.

Ettenähtud kasutuskeskkond

Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumis koduses keskkonnas või asutustes ning sobib kasutamiseks vannitubades, kuid mitte ujumisbasseinides ega sarnastes korrosiivsetes keskkondades.

Ettenähtud kasutusala

Seade on mõeldud lühiajaliseks ja pikaajaliseks kasutamiseks ning seda võib kasutada mitu korda päevas.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kokkupuutel terve nahaga. Seade on mõeldud korduvaks uuendamiseks ja uuesti kasutamiseks.

Eeldatav kasutusiga

Eeldatav kasutusiga on 10 aastat. Täieliku teabe seadme kasutuse kohta leiate veebilehelt www.etac.com.

Näidustused

Kasutamine on näidustatud inimestele, kellel on puue, sealhulgas seljatoe ja/või käetugede vajadus istumise- sendi hoidmiseks ning abi vajadus toolile istumiseks ja toolilt ümber asumiseks.

Vastunäidustused

Teadaolevad vastunäidustused puuduvad.

Hoiatused

Sobivast jaotisest leiate hoiatused, mis kirjeldavad konkreetsete tegevuste või seadme seadistustega seotud riske.



Enne kasutamist kontrollige kasutaja tundlikkust survehaavandite tekkimise suhtes



Defektset seadet ei tohi kasutada. Vigastuste oht.



Kuumutatud seade võib põhjustada põletusi.



Panni pealepanemisel või eemaldamisel võivad kehaosad muljuda saada.



Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada vigastusi.

Vastavusdeklaratsioon

Seade vastab meditsiiniseadmete määrase (EL) 2017/745 nõuetele.

Seadet on testitud ja see vastab standardi EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016 nõuetele.

Ostueelne teave

Ostueelne teave on saadaval veebilehel www.etac.com.

Kõrvaltoimed

Seadme kasutamisega seotud kõrvaltoimetest tuleb ilma tarbetu viivitusega teavitada meie kohalikku edasimüüjat ja riiklikku pädevat ametiasutust. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.

Kohandamine

hõlmab kõiki toiminguid, mis lähevad kaugemale kasutusjuhendis esitatud juhistest ja seadistustest. Kliendi poolt spetsiaalselt kohandatud seadmele ei tohi alles jätta Etaci CE-märgist. Etaci garantii kaotab kehtivuse.

Seadme kirjeldus

Vt joonis A



- A1.** Seljatugi **A2.** Käetugi **A3.** Iste **A4.** Jalatugi **A5.** Ratask **A6.** Toote silt (hoiatused, CE-märgis)
A7. Artikli numbri silt (seerianr, tootmiskuupäev)
A8. Tagaratas **A9.** Kasutaja pidur
A10. Kõrguse reguleerimine

Sümbolid, sildid

Vt joonis B

Kasutusjuhendis ja seadmel olevad sümbolid

- B1.** Hoiatus, ettevaatusabinõu või piirang. **B2.** Kasulikud nõuanded ja näpunäited. **B3.** Ringlussevõetav materjal.
B4. Osa/funktsioon on lukustatud ja seda ei saa liigutada/reguleerida. **B5.** Muljumisoht! **B6.** Tööriist silmusvõti
B7. Kasutaja maksimaalne kaal (vt tehnilisi andmeid).
B8. Video **B9–B10.** Puhastamine (vt Korrashoid ja hool-dus). **B11.** Ärge astuge jalatoele, ümberkukkumisoht.
B12. Istumisasend mõjutab stabiilsust. **B13.** Toote kaal
B14. Lugege kasutusjuhendit (sinine ja valge)

Teave artikli numbri sildil:

- B15.** Toote nimi. **B16.** Toote kirjeldus.
B17. Seerianumber. **B18.** Artikli number. **B19.** CE märgis-tusega **B20.** Meditsiiniseade **B21.** Tootmiskuupäev.
B22. Võõtkood vastavalt GS1-128 GTIN-14 ja seerianumb-rile*

*Seadme tootmiskuupäeva saab lugeda seadme võõtkoo-dilt. Number 11 on esitatud sulgudes võõtkoodi all. Nende sulgude järel olev number on valmistamiskuupäev.

Tehnilised andmed

Vt joonis C

Käsitsemine

Vt joonis D

Paigaldamine tarnimisel

Üle läve liikumine

Ainult tool, vajutage rattakinnitus alla.

Kui kasutaja istub toolis, tõmmake tooli tahapoole.

Statsionaarses asendis



Suunake rullikud ettepoole ja aktiveerige pidurid, et vähendada ümberkukkumisohtu, kui tooli kasutatakse seisvas asendis ja ümberpaigutamisel. Vigastusohu seadme ümberkukkumise korral.

D5



Ärge istuge istme esiservale. Vigastuste oht seadme ümbermineku korral.

Kui tooli kasutatakse statsionaarses asendis, lukustage alati võimalikult paljud rattad.

Seadmega liikumine



Suunake rullikud ettepoole ja aktiveerige pidurid, et vähendada ümberkukkumisohtu, kui tooli kasutatakse seisvas asendis ja ümberpaigutamisel. Vigastusohu seadme ümberkukkumise korral.

Hinnake riske ja tehke märkmeid. Teie kui hooldaja vastutate kasutaja ohutuse eest. Kui liikumine hinnatakse

D1–D2 riskantseks, tuleks kasutada abivahendeid. Manuaalsed liikumisabivahendid leiab veebisaidilt www.etac.com.

D3

D4



Veenduge, et rattad oleksid lukustatud, kui kasutaja istub või tõuseb toolilt. Vigastuste oht.

Eemaldage käetugi sellelt poolelt, kuhu kasutaja paigutatakse.

Tehke kasutaja paigutamise toiming.

D5–D10

Käetoed

Käetoed on eemale pööratavad ja eemaldatavad.

D11

Käetoed on lukustatavad.

D12

Jalatoed

Hooldaja saab jalatoe jalaga hõlpsalt sisse lükata.

D13

Jalatugi on eemaldatav.

D14



Ärge seiske jalaplaadil. Vigastuste oht toote ümberkukkumisel.

Seadistused

Vt joonis E

Kõrguse reguleerimine

Kõrgust saab hõlpsalt reguleerida, kui asetada kruvi sobi-vasse asendisse.

E1–E2



Kontrollige, kas kõik neli ratast on sarnaselt reguleeri-tud, muidu väheneb stabiilsus.



Veenduge, et tiibmutrid oleksid pingutatud. Vigastuste oht.

Jalatoed

Jalatoel on 4 erinevat nurga ja kõrguse seadistust.

E3

Jalatoel on 8 erinevat nurga ja kõrguse seadistust.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Korrashoid ja hooldus

Transportimine, hoiundamine ja kõrvaldamine

Tarvikud	Vt joonis F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Siiber		☐	☐	☐
F2. Siiber ja kaas käepidemega		☐	☐	☐
F3. Kaas käepidemega		☐	☐	☐
F4. Ühekordselt kasutatav siiber		☐	☐	☐
F5. Siibri hoidik		☐	☐	☐
F6. Poti hoidik		☐	☐	☐
F7. Ühekordselt kasutatav potihoidik		☐	☐	☐
F8. Kinnitus siibri/poti madalale paigaldamiseks		☐	☐	☐
F9. Pehme iste		☐	☐	☐
F10. Mugavusiste		☐	☐	☐
F11. Mugavuspadi		☐	☐	☐
F12. Istme kaas		☐	☐	☐
F13. Pehme mugavusiste*		☐	☐	☐
F14. Mugavuspolster		☐	☐	☐
F15. Käetoe padi, paar		☐	☐	☐
F16. Pehme seljaosa		☐	☐	☐

Tarvikud	Vt joonis F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Tagaosa tugi		☐	☐	☐
F18. Kõrgusseibid		☐	☐	☐
F19. Kaks 75 mm lukustatavat ratast		☐	☐	☐
F20. Tagaratta adapter		☐	☒	☐
F21. Seebialus		☐	☐	☐
F22. Ristlatt		☐	☐	☐
F23. Jalatugi, kokkupandav ja eemaldatav		☐	☐	☐
F24. Seljatoepolster		☐	☐	☐
F25. Turvarihm		☐	☐	☐
F26. Paigutusrihm		☐	☐	☐
F27. Rinnarakmerihm		☐	☐	☐
F28. Rindkere ja puusade pingutusrihmad		☐	☐	☐
F29. Pritsmetõke		☐	☐	☐

*Sobib ainult eesmise istmeavaga Cleani mudelitele

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen. Jotta asennuksen, käsittelyn ja käytön aikana ei sattuisi vahinkoja, on tärkeää lukea tämä käyttöohje ja säilyttää se tulevaa tarvetta varten. Sen saa myös osoitteesta www.etac.com. Voit valita kieleksi kohdasta "International" ja "Local websites". Täältä löydät myös muita tuoteasiakirjoja, kuten tuotteen määrääjän tiedot, ostoa edeltävät ohjeet ja huolto-ohjeet.

Käyttöohjeessa käyttäjällä tarkoitetaan tuolissa istuvaa henkilöä. Avustajalla tarkoitetaan käyttäjää avustavaa henkilöä.

Tuoteluettelo: ● = Koskee tuotetta ○ = Lisävarusteet

Oikealla olevassa tuoteluettelossa on kutakin tuotetta koskevat tiedot.



Kunkin sivun kuvat löytyvät käyttöohjeen alusta (sivut 3-9). Katso vastaava teksti kuvista A-F.

Laitteen kuvaus

Clean-tuoteperheeseen kuuluu siirrettäviä suihku- ja wc-tuoleja, joista Clean ja korkeussäädöllä varustettu Clean Height Adjustable ovat avustajan käytettävissä ja Clean 24" käyttäjän itsensä käytettävissä.

Käyttötarkoitus

Clean, Clean 24" ja Clean Height Adjustable (jäljempänä "laite" tai "tuote") ovat lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu sairauden tai vamman aiheuttaman toimintakyvyn heikentymisen lievittämiseen tai korvaamiseen. Laite on suunniteltu käytettäväksi hygienian hoidossa suihkussa, pesualtaalla tai WC:n yläpuolella sekä kuljetukseen pesuhuoneeseen ja sieltä pois.

Käyttäjryhmä

Laitteen käyttäjäryhmän määrittäminen perustuu potilaan toimintakykyyn eikä tiettyyn diagnoosiin, terveydentilaan tai ikään. Tuote on tarkoitettu henkilöille, joiden pituus on vähintään 146 cm tai joiden paino on vähintään 40 kg.

Tuotteen toissijaisia käyttäjiä ovat hoitajat, jotka avustavat tuotteen käytössä, ja lääkärit/tekniikot, jotka tekevät tuotteen käyttöönottoasetukset.

Käyttöympäristö

Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön kotiympäristössä tai laitoksissa, ja se sopii käytettäväksi kylpyhuoneissa, mutta ei uima-altaissa tai vastaavissa syövyttävissä ympäristöissä.

Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää useita kertoja päivässä.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kosketuksissa ehjään ihoon. Laitteen voi kunnostaa ja käyttää uudelleen.

Odotettavissa oleva käyttöikä

Odotettavissa oleva käyttöikä on 10 vuotta. Lisätietoja tuotteen käyttöiästä saa osoitteesta www.etac.com.

Käyttöaiheet

Käyttöaiheena on toimintakyvyn heikkeneminen muun muassa henkilöllä, jolla on fyysinen vamma ja joka tarvitsee selkänjoaa ja/tai käsinojaa pysyäkseen istuma-asennossa ja apua tuolille siirtymisessä.

Vasta-aiheet:

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

Varoitukset

Tiettyyn toimenpiteeseen tai laitteen asettamiseen liittyvät riskit on kuvattu kyseisen jakson kohdassa.



Tarkista käyttäjän herkkyys painehaavoille ennen käyttöä



Viallista laitetta ei saa käyttää. Loukkaantumisvaara.



Kuumentunut tuote voi aiheuttaa palovammoja.



Kehonosat voivat jäädä puristuksiin alusastian asettamisen tai poistamisen aikana.



Käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen.

Laite on testattu ja täyttää standardien EN ISO 10993-1 ja ISO 17966:2016 vaatimukset.

Ostoa edeltävät tiedot

Ostoa edeltävät tiedot saa osoitteesta www.etac.com.

Haittatapahtuma

Jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee haittatapahtuma, vaaratilanteet on ilmoitettava paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

Mukautus

Tämä on kaikkea, joka menee käyttöoppaan ohjeita ja säätöjä pidemmälle. Asiakaskohtaisesti muokatussa laitteessa ei saa olla Etacin CE-merkkiä. Etacin takuu raukeaa.

Laitteen kuvaus

Katso kuva A



A1. Selkänoja **A2.** Käsivarsituki **A3.** Istuinosa **A4.** Jalkatuki **A5.** Pyörä **A6.** Tuotetarra (varoitukset, CE-merkintä)
A7. Tuotenumerotarra (sarjanumero, valmistuspäivä)

A8. Takapyörä **A9.** Jarru

A10. Korkeuden säätö

Symbolit ja tarrat

Katso kuva B

Käyttöohjeessa ja laitteessa olevat symbolit:

B1. Varoitus, varotoimi tai rajoitus. **B2.** Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä. **B3.** Materiaalin kierrättäminen. **B4.** Osa/toiminto on lukittu, eikä sitä voi liikuttaa/säätää. **B5.** Puristumisvaara! **B6.** Työkalulaatikon kiintoavain **B7.** Käyttäjän enimmäispaino (katso tekniset tiedot). **B8.** Video **B9-B10.** Puhdistus (katso Huolto ja kunnossapito). **B11.** Älä seiso jalkatuen päällä, kaatumisvaara. **B12.** Istuma-asento vaikuttaa vakauteen. **B13.** Tuotteen paino **B14.** Lue käyttöohjeet (sininen ja valkoinen)

Tuotenumerotarran tiedot:

B15. Tuotteen nimi. **B16.** Laitteen kuvaus. **B17.** Sarjanumero. **B18.** Tuotenumero. **B19.** CE-merkintä **B20.** Lääkinnällinen laite **B21.** Valmistuspäivämäärä. **B22.** Viivakoodi standardin GS1-128 GTIN-14 ja sarjanumeron* mukaan

*Laitteen valmistuspäivämäärä voidaan lukea laitteessa olevasta viivakoodista. Numero 11 näkyy viivakoodin alapuolella suluissa. Näiden sulkujen perässä oleva numeroyhdistelmä on valmistuspäivämäärä.

Tekniset tiedot

Katso kuva C

Käsittely

Katso kuva D

Asennus toimitettaessa

Siirtäminen kynnyksen yli:

Käyttäjä ei tuolissa: paina pyörän kiinnitysosaa alaspäin.

Käyttäjä tuolissa: vedä tuolia taaksepäin.

Tuoli paikallaan:



Käännä pyörät eteenpäin ja aktivoi jarrut kaatumisvaaran vähentämiseksi, kun tuolia käytetään paikallaan ja siirrettäessä potilasta. Kaatuvasta laitteesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

D5



Älä istu istuimen etureunalla. Laitteen kaatumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

Lukitse aina mahdollisimman monta pyörää, kun pyörätuolia käytetään paikallaan.

Siirto:



Käännä pyörät eteenpäin ja aktivoi jarrut kaatumisvaaran vähentämiseksi, kun tuolia käytetään paikallaan ja siirrettäessä potilasta. Kaatuvasta laitteesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

Arvioi riskit ja tee muistiinpanoja. Hoitajana sinä olet

D1-D2 vastuussa käyttäjän turvallisuudesta. Apuvälineitä tulee käyttää, jos siirron katsotaan olevan riskialtista. Katso manuaaliset siirtoapuvälineet osoitteesta www.etac.com.

D3

D4



Varmista, että pyörät on lukittu, kun käyttäjä istuu tai nousee tuolista. Loukkaantumisvaara.

Irrota käsinoja tuolin siirtopuolelta.

Suorita siirto.

D5-D10

Käsinojat:

Käsinojat ovat käännettävät ja irrotettavat.

D11

Käsinojat voi lukita.

D12

Jalkatuet:

Hoitaja voi helposti työntää jalkatuen

D6

paikalleen jalallaan.

D13

Jalkatuen voi irrottaa.

D14



Jalkalevyllä ei saa seistä. Laitteen kaatumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

Asetukset

Katso kuva E

Korkeussäätö:

Korkeutta voidaan säätää helposti asettamalla ruuvi halutun asentoon.



Tarkista, että kaikki neljä pyörää on säädetty samalla tavalla. Muutoin pyörätuolin vakaus heikkenee.

E1-E2



Varmista, että siipimutterit on kiristetty. Loukkaantumisvaara.

Jalkatuet:

Jalkatuessa on 4 eri kulma- ja korkeusasetusta.

E3

Jalkatuessa on 8 eri kulma- ja korkeusasetusta.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Huolto ja kunnossapito

Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Säilytys

Kierrätettävä kansallisten määräysten mukaisesti.

Lisävarusteet	Katso kuva F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Alusastia		☐	☐	☐
F2. Alusastia ja kansi kädensijalla		☐	☐	☐
F3. Kansi ja kädensija		☐	☐	☐
F4. Kertakäyttöinen alusastia		☐	☐	☐
F5. Alusastian pidike		☐	☐	☐
F6. Ämpärin pidike		☐	☐	☐
F7. Kertakäyttöinen alusastiapidike		☐	☐	☐
F8. Madallusosat alusastian tai ämpärin matalampaa kiinnitystä varten		☐	☐	☐
F9. Istuinpehmuste		☐	☐	☐
F10. Comfort-istuin		☐	☐	☐
F11. Comfort-tyyny		☐	☐	☐
F12. Istuimen kansi		☐	☐	☐
F13. Soft Comfort -istuin*		☐	☐	☐
F14. Comfort-pehmuste		☐	☐	☐
F15. Käsinojan pehmuste, pari		☐	☐	☐

Lisävarusteet	Katso kuva F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16. Selkänojan pehmuste		☐	☐	☐
F17. Vartalotuki		☐	☐	☐
F18. Korotuspalat		☐	☐	☐
F19. Kaksi 75 mm:n lukittavaa pyörää		☐	☐	☐
F20. Takapyörän sovitin		☐	☒	☐
F21. Saippuateline		☐	☐	☐
F22. Poikkipalkki		☐	☐	☐
F23. Jalkatuki, taitettava ja irrotettava		☐	☐	☐
F24. Selkänojan verhoilu		☐	☐	☐
F25. Turvavyö		☐	☐	☐
F26. Lannevyö		☐	☐	☐
F27. Rintavaljaan vyö		☐	☐	☐
F28. Rinta- ja lantiovyöt		☐	☐	☐
F29. Roiskesuojaus		☐	☐	☐

*Sopii vain Clean-malleihin, joissa on istuinaukko edessä

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac. Afin d'éviter tout dommage pendant le montage, la manipulation et l'utilisation, il est important de lire ce manuel et de le conserver pour toute consultation ultérieure. Il est également disponible à l'adresse suivante : www.etac.com. Vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur « International » puis en sélectionnant un site Web local. Vous y trouverez également d'autres documents sur les produits, tels que des informations sur le prescripteur, un guide de pré-achat et des instructions de reconditionnement.

Dans le manuel, l'« utilisateur » désigne la personne assise sur la chaise. Le « soignant » désigne la personne aidant l'utilisateur.

Liste des pièces : ● = S'applique à, ○ = Accessoires

Consultez la liste des pièces à droite pour connaître les informations qui s'appliquent à chaque produit.



Les images auxquelles il est fait référence à chaque page se trouvent au début du manuel (pages 3 à 9). Reportez-vous aux figures A à F pour le texte correspondant.

Description du dispositif

La gamme Clean est une gamme de chaises de douche et de toilettes mobiles dont les modèles Clean et Clean à hauteur réglable sont installés par un assistant et dont le modèle Clean 24" peut être installé par l'utilisateur.

Usage prévu

Clean, Clean 24" et Clean à hauteur réglable (ci-après également appelé « le dispositif » ou « le produit ») sont des dispositifs médicaux destinés à soulager ou à compenser une déficience fonctionnelle due à une blessure ou un handicap. Le dispositif est conçu pour être utilisé lors de la toilette dans une douche, au lavabo ou au-dessus de la cuvette des toilettes, ainsi que pour les transferts depuis ou vers la salle de bains.

Groupe d'utilisateurs visé

Le groupe cible du dispositif dépend de la capacité fonctionnelle et non de l'âge ou de la pathologie spécifique de la personne. Il est destiné aux personnes dont la taille est supérieure ou égale à 146 cm ou dont le poids est supérieur ou égal à 40 kg.

Les utilisateurs secondaires du dispositif sont les soignants qui fournissent une assistance et les cliniciens/techniciens qui configurent le dispositif.

Environnement prévu

Le dispositif est destiné à une utilisation en intérieur dans des environnements domestiques ou des institutions et convient à une utilisation dans les salles de bains, mais pas dans les piscines ni dans tout autre environnement corrosif similaire.

Utilisation prévue

Le dispositif est destiné à une utilisation à court et à long terme et peut être utilisé plusieurs fois par jour.

Le dispositif est destiné à être utilisé au contact d'une peau non lésée. Le dispositif est prévu pour être remis à neuf et réutilisé.

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue est de 10 ans. Pour des informations détaillées sur la durée de vie du dispositif, consultez le site www.etac.com.

Indications

L'utilisation est indiquée en cas de handicap, y compris, mais sans s'y limiter, chez les personnes souffrant d'un handicap physique qui ont besoin d'un dossier et/ou d'accoudoirs pour maintenir une position assise et d'une assistance lors des transferts vers/depuis le fauteuil.

Contre-indications :

Il n'existe aucune contre-indication connue.

Avertissements

Les avertissements décrivant un élément de risque pour une action ou un réglage spécifique du dispositif se trouvent dans la section correspondante.



Vérifiez la prédisposition de l'utilisateur aux escarres avant utilisation.



N'utilisez pas de dispositif défectueux. Risque de blessure.



Lorsqu'il est exposé à la chaleur, le dispositif peut provoquer des brûlures.



Des parties du corps peuvent être pincées lors de l'application ou du retrait du bassin.



Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner des blessures.

Déclaration de conformité

Le dispositif est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Le dispositif a été testé et satisfait aux exigences des normes EN ISO 10993-1 et ISO 17966:2016

Informations avant l'achat

Les informations avant l'achat sont disponibles sur www.etac.com.

Événement indésirable

En cas d'événement indésirable lié à l'utilisation de l'appareil, signalez tout incident à votre revendeur local et aux autorités nationales compétentes dans les meilleurs délais. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

Personnalisation

désigne tout ce qui va au-delà des instructions et réglages figurant dans le manuel. Un dispositif adapté par le client ne doit pas conserver le marquage CE d'Etac. La garantie Etac n'est plus applicable.

Description du dispositif

Voir Figure A.



A1. Dossier **A2.** Accoudoir **A3.** Siège **A4.** Repose-pieds **A5.** Roulette **A6.** Étiquette du produit (avertissements, marquage CE)
A7. Étiquette de référence produit (numéro de série, date de production)

A8. Roue arrière **A9.** Frein utilisateur

A10. Réglage de la hauteur

Pictogrammes, étiquettes

Voir Figure B

Pictogrammes utilisés dans le manuel et sur le dispositif :

B1. Avertissement, précaution ou limitation. **B2.** Conseils et astuces. **B3.** Matériau à recycler. **B4.** La pièce/fonction est verrouillée et ne peut pas être déplacée/réglée. **B5.** Point de pincement ! **B6.** Clé polygonale **B7.** Poids max. de l'utilisateur (voir les caractéristiques techniques). **B8.** Vidéo **B9-B10.** Nettoyage (voir la section Entretien et maintenance). **B11.** Ne vous tenez pas sur le repose-pieds, risque de basculement. **B12.** La position assise affecte la stabilité. **B13.** Poids du produit **B14.** Lire le mode d'emploi (bleu et blanc)

Informations sur l'article sans étiquette :

B15. Désignation **B16.** Description du produit **B17.** Numéro de série **B18.** Référence de l'article **B19.** Marquage CE **B20.** Dispositif médical **B21.** Date de fabrication **B22.** Code-barres selon les normes GS1-128 et GTIN-14 et numéro de série*

*La date de fabrication du dispositif est indiquée sur le code du dispositif. Le numéro 11 est indiqué entre parenthèses sous le code-barres. La combinaison de chiffres après ces parenthèses correspond à la date de fabrication.

Caractéristiques techniques

Voir Figure C

Manipulation

Voir Figure D

Installation à la livraison

Transfert au-delà d'un seuil :

Fauteuil uniquement, appuyez sur la fixation de la roue.

Avec l'utilisateur, tirez le fauteuil vers l'arrière.

En position stationnaire :



Orientez les roulettes vers l'avant et activez les freins pour réduire le risque de basculement lorsque le fauteuil est utilisé à l'arrêt et lors du transfert. Risque de blessure en cas de basculement de l'appareil. **D5**



Ne pas s'asseoir sur le bord avant du siège. Risque de blessure en cas de basculement de l'appareil.

Verrouillez toujours autant de roulettes que possible lorsque le fauteuil doit être utilisé en position stationnaire.

Transfert :



Orientez les roulettes vers l'avant et activez les freins pour réduire le risque de basculement lorsque le fauteuil est utilisé à l'arrêt et lors du transfert. Risque de blessure en cas de basculement de l'appareil.

Évaluez les risques et prenez des notes. En tant que soignant, vous êtes responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez des

D1-D2 systèmes d'aide si vous considérez que le transfert présente des risques. Rendez-vous sur le site www.etac.com pour découvrir nos aides au transfert manuel.

D3

D4



Assurez-vous que les roulettes sont verrouillées lorsque l'utilisateur s'assoit ou se lève de son fauteuil. Risque de blessure.

Ôtez l'appui-bras sur le côté transfert du fauteuil.

Procédez au transfert.

D5-D10

Accoudoirs :

Ils sont escamotables et amovibles.

D11

Ils peuvent être verrouillés.

D12

Repose-pieds :

Le soignant peut facilement enfoncer le repose-pieds avec son pied.

D13

Le repose-pieds est amovible.

D14



Ne pas se mettre debout sur les repose-pieds. Risque de blessure en cas de chute du produit.

Paramètres

Voir Figure E

Réglage de la hauteur :

Vous réglerez facilement la hauteur en insérant le boulon dans la position requise.



Vérifiez que les quatre roues sont réglées de la même manière, sinon la stabilité sera réduite.

E1-E2



Assurez-vous que les écrous papillons sont serrés. Risque de blessure.

Repose-pieds :

Le repose-pieds dispose de 4 réglages d'angle et de hauteur différents.

E3

Le repose-pieds dispose de 8 réglages d'angle et de hauteur différents.

E4

D'autres options de réglage sont disponibles en déplaçant la goupille.

E5



Lorsque le repose-pieds est retiré, les goupilles de support sont exposées et présentent un risque de griffure au niveau des pieds.



Lorsque le fauteuil est réglé à une hauteur de 47,5 cm, la position la plus basse du repose-pieds ne doit pas être utilisée.

Rembourrage du dossier

E7-E10

Frein utilisateur

E11-E13



Risque de pincement au niveau de la roue arrière et du châssis/frein.

Entretien et maintenance

Nettoyez le dispositif avec un agent nettoyant non abrasif standard (dont le pH est compris entre 5 et 9). Rincer et sécher.

Désinfectez le dispositif avec une solution désinfectante à 70 %.

Le dispositif ne requiert aucun autre entretien.

Le dispositif et ses accessoires peuvent être nettoyés en toute sécurité à 85 °C pendant 3 minutes (sauf stipulation contraire). Cela s'applique au reconditionnement.

Les matériaux constitutifs résistent aux désinfectants courants.

Les méthodes de traitement de la surface utilisées pour protéger le produit de la corrosion sont les suivantes :

Surfaces laquées = revêtement en poudre de polyester

Surfaces en acier non laqué = Fe/Zn-Ni

Garantie de cinq ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Les conditions générales sont disponibles sur www.etac.com.

Transport, stockage et élimination

Entreposage

Le dispositif doit être stocké à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température supérieure à 5 °C. Si le dispositif a été stocké pendant une longue période (plus de quatre mois), son fonctionnement doit être vérifié par un expert avant utilisation.

Recyclage conformément aux réglementations nationales.

Accessoires		Voir Figure F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1.	Bassin	☐	☐	☐
F2.	Bassin et couvercle avec anse	☐	☐	☐
F3.	Couvercle avec anse	☐	☐	☐
F4.	Bassin jetable	☐	☐	☐
F5.	Support pour bassin	☐	☐	☐
F6.	Support pour seau	☐	☐	☐
F7.	Support jetable pour bassin	☐	☐	☐
F8.	Attaches pour fixation basse du bassin / seau (lot de 2)	☐	☐	☐
F9.	Siège souple	☐	☐	☐
F10.	Siège Comfort	☐	☐	☐
F11.	Coussin Comfort	☐	☐	☐
F12.	Couvercle de siège	☐	☐	☐
F13.	Siège confort souple*	☐	☐	☐
F14.	Rembourrage Comfort	☐	☐	☐
F15.	Coussin d'appui-bras, paire	☐	☐	☐

Accessoires		Voir Figure F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16.	Dossier souple	☐	☐	☐
F17.	Cale tronc	☐	☐	☐
F18.	Cales de surélévation	☐	☐	☐
F19.	Deux roulettes verrouillables de 75 mm	☐	☐	☐
F20.	Adaptateur de roue arrière	☐	☒	☐
F21.	Porte-savon	☐	☐	☐
F22.	Barre transversale	☐	☐	☐
F23.	Repose-pieds, pliable et amovible	☐	☐	☐
F24.	Rembourrage du dossier	☐	☐	☐
F25.	Ceinture de sécurité	☐	☐	☐
F26.	Ceinture de positionnement	☐	☐	☐
F27.	Ceinture pectorale	☐	☐	☐
F28.	Ceintures de maintien de la poitrine et des hanches	☐	☐	☐
F29.	Pare-éclaboussures	☐	☐	☐

*Convient uniquement aux modèles Clean avec ouverture de siège à l'avant

Hvala vam što ste odabrali proizvod tvrtke Etac. Kako biste izbjegli oštećenja tijekom sastavljanja, rukovanja i uporabe, važno je pročitati ovaj priručnik i spremati ga za buduću upotrebu. Možete ga pronaći i na www.etac.com. Jezik možete odabrati putem poveznice „Međunarodna” i „Lokalna web-mjesta”. Ovdje možete pronaći i drugu dokumentaciju proizvoda, kao što su informacije o propisivaču, upute za predkupovanje i upute za prilagodbu.

U priručniku, korisnik je osoba koja sjedi na stolcu. Njegovatelj je osoba koja pomaže korisniku.

Popis stavki: ● = Vrijedi za, ○ = Pribor

Pogledajte popis stavki na desnoj strani na kojem se prikazuju informacije primjenjive za svaki proizvod.



Slike koje se spominju na svakoj stranici nalaze se na početku priručnika (stranice 3 do 9). Pogledajte slike A do F za odgovarajući tekst.

Opis uređaja

Obitelj Clean predstavlja asortiman mobilnih stolica za tuširanje kod kojih se Clean i Clean s podesivom visinom koriste uz asistenciju pomoćnika, dok korisnik može samostalno koristiti Clean 24".

Predviđena namjena

Clean, Clean 24" i Clean s podesivom visinom (u daljnjem tekstu i kao „uređaj” ili „proizvod”) medicinski su uređaji namijenjeni ublažavanju ili kompenzaciji funkcionalnog oštećenja uslijed ozljede ili invaliditeta. Uređaj je namijenjen obavljanju higijene pod tušem, u umivaoniku ili iznad WC školjke te za prijenos u higijensku sobu i iz nje.

Predviđena skupina korisnika

Skupina korisnika uređaja temelji se na funkcionalnoj sposobnosti pojedinca, a ne na specifičnoj dijagnozi, zdravstvenom stanju ili dobi. Namijenjen je osobama visine 146 cm ili više, ili mase 40 kg ili više.

Sekundarni su korisnici uređaja njegovatelji koji pružaju pomoć i kliničari/tehničari koji postavljaju uređaj.

Predviđeno okruženje

Proizvod je namijenjen uporabi u zatvorenom prostoru u kućnom okruženju ili ustanovama i prikladan je za uporabu u kupaonicama, ali ne i u bazenima i sličnim korozivnim okruženjima.

Predviđena primjena

Proizvod je namijenjen kratkotrajnoj i dugotrajnoj uporabi i može se primijeniti nekoliko puta dnevno.

Proizvod je namijenjen uporabi s neoštećenom kožom. Uređaj je namijenjen renoviranju i ponovnoj uporabi.

Očekivani vijek uporabe

Očekivani vijek uporabe je 10 godina. Kompletne informacije o vijeku uporabe uređaja potražite na www.etac.com.

Indikacije

Indikacija za upotrebu je invaliditet, uključujući, ali ne ograničavajući se na, osobu s fizičkim invaliditetom koja treba naslon za leđa i/ili naslone za ruke za održavanje sjedećeg položaja i pomoć pri prijenosu na/iz stolice.

Kontraindikacije:

Nema poznatih kontraindikacija.

Upozorenja

Upozorenja koja opisuju element rizika za određenu radnju ili postavku uređaja potražite u odgovarajućem odjeljku.



Prije uporabe provjerite osjetljivost korisnika na dekubitus



Ne upotrebljavajte neispravno sredstvo. Opasnost od ozljeda.



Zagrijani uređaj može uzrokovati opekline.



Pri postavljanju ili uklanjanju posude moguće je uklještenje dijelova tijela.



Nepridržavanje uputa za upotrebu može dovesti do ozljeda.

Izjava o sukladnosti

Proizvod ispunjava uvjete Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima.

Proizvod je ispitan i ispunjava uvjete norme EN ISO 10993-1 (Biološka procjena medicinskih proizvoda), ISO 17966:2016 (Pomoćni proizvodi za osobe s invaliditetom - opći zahtjevi i metode ispitivanja).

Pretkupovne informacije

Pretkupovne informacije možete pronaći na www.etac.com.

Neželjeni događaj

U slučaju neželjenog događaja povezanog s uporabom proizvoda, potrebno ga je pravovremeno prijaviti vašem lokalnom zastupniku i nacionalnom nadležnom tijelu. Lokalni zastupnik prosljeđit će informaciju proizvođaču.

Prilagodba

je sve što nadilazi upute i postavke priručnika. Proizvod kojeg je kupac posebno prilagodio ne smije zadržati CE oznaku tvrtke Etac. Etac-ovo jamstvo istječe.

Opis uređaja

Pogledajte sliku A



A1. Potpora za leđa **A2.** Potpora za ruke **A3.** Sjedalo **A4.** Potpora za stopala **A5.** Kotačić **A6.** Oznaka proizvoda (upozorenja, CE oznaka) **A7.** Oznaka s brojem proizvoda (ser. br., datum proizvodnje)

A8. Stražnji kotač **A9.** Korisnička kočnica

A10. Namještanje visine

Simboli, oznake

Pogledajte sliku B

Simboli u priručniku i na uređaju:

B1. Upozorenje, mjera opreza ili ograničenje. **B2.** Korisni prijedlozi i savjeti. **B3.** Materijal za recikliranje. **B4.** Dio/funkcija je blokirana i ne može se pomicati/podesiti. **B5.** Opasnost od ukleštenja! **B6.** Viljuškasti ključ **B7.** Maks. težina korisnika (pogledajte tehničke podatke). **B8.** Videozapis **B9-B10.** Čišćenje (pogledajte servis i održavanje). **B11.** Nemojte stajati na osloncu za noge, postoji opasnost od prevrtanja. **B12.** Položaj sjedala utječe na stabilnost. **B13.** Težina proizvoda **B14.** Pročitajte upute za uporabu (plava i bijela)

Informacije o stavci bez oznake:

B15. Naziv proizvoda. **B16.** Opis proizvoda. **B17.** Serijski broj. **B18.** Broj stavke. **B19.** Oznaka CE **B20.** Medicinski uređaj **B21.** Datum proizvodnje. **B22.** Crtični kod prema GS1-128 GTIN-14 i serijski br.*

* Datum proizvodnje uređaja može se očitati s crtichnog koda na uređaju. Broj 11 je prikazan ispod crtichnog koda u zagradama. Kombinacije brojeva koje se nalaze iza tih zagrada su datum proizvodnje.

Tehnički podaci

Pogledajte sliku C

Rukovanje

Pogledajte sliku D

Instalacija kod isporuke

Prijenos preko praga:

Samo stolac, gurnite priključak kotača prema dolje.

S korisnikom. povucite stolicu unatrag.

U stanju mirovanja:



Kotačiće usmjerite prema naprijed i aktivirajte kočnice kako biste smanjili rizik od prevrtanja kada se stolica upotrebljava u mirovanju i tijekom prijenosa. Opasnost od ozljeda zbog prevrtanja uređaja.

D5



Nemojte sjediti na prednjem rubu sjedala. Opasnost od ozljeda zbog prevrtanja uređaja.

Uvijek zaključajte što više kotačića kada stolac treba koristiti u stanju mirovanja.

Prijenos:



Kotačiće usmjerite prema naprijed i aktivirajte kočnice kako biste smanjili rizik od prevrtanja kada se stolica upotrebljava u mirovanju i tijekom prijenosa. Opasnost od ozljeda zbog prevrtanja uređaja.

Procijenite rizike i vodite bilješke. Vi kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost korisnika. Ako se prijenos

D1-D2 smatra rizičnim, treba koristiti pomagala. Posjetite www.etac.com za pomagala pri ručnom prijenosu.

D3

D4



Kotačići se moraju blokirati, kad korisnik sjeda ili ustaje sa stolca. Opasnost od ozljeda.

Uklonite naslon za ruke na strani stolice za prijenos.

Izvršite prijenos.

D5-D10

Potpore za ruke:

Potpore za ruke odmiču se i mogu se skinuti.

D11

Potpore za ruke mogu se zaključati.

D12

Potpore za stopala:

Njegovatelj može jednostavno ugurati potporu za stopala svojim stopalom.

D13

Potpore za stopala može se odvojiti.

D14



Nemojte stajati na ploči za noge. Opasnost od ozljeda zbog prevrtanja proizvoda.

Postavke

Pogledajte sliku E

Prilagodba visine:

Visina se može jednostavno prilagoditi postavljanjem vijka u željeni položaj.

E1-E2



Provjerite jesu li sva četiri kotačića jednako prilagođena, u protivnom će se smanjiti stabilnost.



Provjerite jesu li krilne matice zategnute. Opasnost od ozljeda.

Potpore za stopala:

Potpore za stopala ima 4 različite postavke kuta i visine.

E3

Potpore za stopala ima 8 različitih postavki kuta i visine.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Servis i održavanje

Prijevoz, skladištenje i odlaganje

Reciklirajte u skladu s nacionalnim propisima.

●	●	●	○	Clean
●		●	○	Clean 24"
●		●	○	Clean H. adi.

Dodatna oprema	Pogledajte sliku F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Posuda		☐	☐	☐
F2. Posuda i poklopac s ručkom		☐	☐	☐
F3. Poklopac s ručkom		☐	☐	☐
F4. Zamjenjiva posuda		☐	☐	☐
F5. Držak posude		☐	☐	☐
F6. Držak kante		☐	☐	☐
F7. Zamjenjivi držak posude		☐	☐	☐
F8. Nastavak za nisko postavljanje posude/kante		☐	☐	☐
F9. Mekano sjedalo		☐	☐	☐
F10. Udobno sjedalo		☐	☐	☐
F11. Udoban jastuk		☐	☐	☐
F12. Poklopac sjedala		☐	☐	☐
F13. Mekano udobno sjedalo*		☐	☐	☐
F14. Udobno ojašćenje		☐	☐	☐
F15. Jastuk naslona za ruke, par		☐	☐	☐
F16. Mekani naslon		☐	☐	☐

Dodatna oprema	Pogledajte sliku F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Potpora za trup		☐	☐	☐
F18. Držači razmaka		☐	☐	☐
F19. Dva kotačića s mogućnošću zaključavanja od 75 mm		☐	☐	☐
F20. Adapter stražnjeg kotača		☐	☒	☐
F21. Posudica za sapun		☐	☐	☐
F22. Poprečna prečka		☐	☐	☐
F23. Potpora za stopalo, sklopiva i odvojiva		☐	☐	☐
F24. Presvlaka za naslon		☐	☐	☐
F25. Zaštitni remen		☐	☐	☐
F26. Pojas za namještanje		☐	☐	☐
F27. Pojas za prsa		☐	☐	☐
F28. Pojasevi za namještanje prsa i kukova		☐	☐	☐
F29. Zaštita od prskanja		☐	☐	☐

*Prikladno samo za Clean modele s otvorom sjedala sprijeda

Almennt

Takk fyrir að velja vöru frá Etac. Mikilvægt er að lesa þessa handbók og varðveita til að forðast skemmdir við samsetningu, meðferð og notkun. Einnig má finna hana á www.etac.com. Hægt er að velja tungumálið í gegnum „alþjóðlegan“ og „staðbundinn vefsíðuhlekk“. Hér má einnig finna önnur fylgigögn vörunnar svo sem upplýsingar um tilvísun og leiðbeiningar fyrir kaup og endurgerð.

Í handbókinni er notandinn sá sem situr í stólnum. Umönnunaraðili er sá sem hjálpar notandanum.

Vörulisti: ● = Gildir um, ○ = Fylgihlutir

Sjá vörulista til hægri sem sýnir þær upplýsingar sem eiga við um hverja vöru.



Myndirnar sem vísað er í á hverri síðu er að finna í upphafi handbókarinnar (bls. 3 til 9). Sjá myndir A til F fyrir samsvarandi texta.

Lýsing á tæki

Clean-vörulínan býður upp á úrval af færanlegum sturtustólum, en þar á meðal eru Clean og Clean Height Adjustable sem aðstoðarmaður getur ýtt og svo Clean 24" sem notandinn getur ýtt sjálfur.

Tilgangur

Clean, Clean 24" og hæðarstillanlegur Clean-stóll (hér eftir kölluð „tækið“ eða „varan“) eru lækningatæki ætluð til að draga úr virkniskerðingu vegna áverka eða hreyfihömlunar, eða bæta upp fyrir slíka virkniskerðingu. Varan er hönnuð til að sinna persónulegu hreinlæti í sturtu, við vask eða yfir klósetti og einnig fyrir flutning til og frá baðherbergi.

Fyrirhugaður notendahópur

Notendahópur vörunnar byggist á virknigetu hvers og eins en er ekki bundinn við sérstaka greiningu, heilsufarsástand eða aldur. Varan er ætluð fyrir einstaklinga 146 cm að hæð eða hærri eða einstaklinga sem vega 40 kg eða meira.

Aðrir notendur vörunnar eru umönnunaraðilar sem veita aðstoð og aðilar sem setja vöruna upp.

Fyrirhugað umhverfi

Varan er ætluð til notkunar innandyrna á heimilum eða stofnunum og hentar til notkunar á baðherbergjum. Hún hentar ekki til notkunar í sundlaugum eða á svipuðum stöðum þar sem hætta er á tæringu vörunnar.

Fyrirhugað notkun

Varan er ætluð til notkunar í styttri eða lengri tíma og hana má nota nokkrum sinnum á dag.

Tækið er ætlað til notkunar í snertingu við óskaddaða húð. Varan er ætluð til endurnýtingar og hana má endurbæta.

Áætlaður endingartími

Áætlaður endingartími er 10 ár. Nánari upplýsingar um endingartíma vörunnar er að finna á www.etac.com.

Ábendingar

Ábending fyrir notkun er fötlun, meðal annars hjá einstaklingum með líkamlega fötlun sem þurfa á bakstoð og/eða armstoð að halda til að halda sitjandi stöðu og aðstoð við flutning í eða úr stólnum.

Frábendingar:

Það eru engar þekktar frábendingar.

Varnaðarorð

Finna má varnaðarorð með lýsingum á áhættuþáttum fyrir tiltekna athafnir eða stillingar vörunnar í viðkomandi kafla.



Athugið næmi notanda fyrir þrýstingssárum fyrir notkun



Ekki má nota gallað tæki. Hætta á meiðslum.



Tæki sem hitnar getur valdið bruna.



Hætta er á að líkamshlutar klemmist þegar bekken er sett á eða fjarlægt.



Sé notkunarleiðbeiningunum ekki fylgt getur það valdið meiðslum.

Samræmisfyrirlysing

Varan uppfyllir kröfur reglugerðar um lækningatæki (ESB) 2017/745.

Varan hefur verið prófuð og uppfyllir skilyrði staðla EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Upplýsingar fyrir kaup

Upplýsingar fyrir kaup er að finna á www.etac.com.

Aukaverkun

Ef vart verður við aukaverkanir í tengslum við tækið skal tilkynna slík tilvik tímanlega til næsta söluaðila og lögbærra landsyfirvalda. Söluaðili áframsendir upplýsingar til framleiðanda.

Sérstilling

eru allar frekari stillingar sem ekki eru í leiðbeiningum og stillingum handbókarinnar. Vara sem hefur verið sérstílt af viðskiptavinum má ekki halda CE-merkingu Etac. Ábyrgð Etac rennur út.

Lýsing á tæki

Sjá mynd A



A1. Bakstoð **A2.** Armstoð **A3.** Sæti **A4.** Fótstoð **A5.** Hjól **A6.** Vörunúmeri (viðvaranir, CE-merking)
A7. Merkimiði með vörunúmeri (raðnr., framleiðsludagsetning)

A8. Afturhjól **A9.** Notendabremsa

A10. Hæðarstilling

Tákn, merkimiðar

Sjá mynd B

Tákn sem koma fram í handbókinni og á vörunni:

B1. Viðvörðun, varnaðarorð eða takmörkun. **B2.** Gagnleg ráð og ábendingar. **B3.** Efni til endurvinnslu. **B4.** Hlutinn/virknin er læst og ekki er hægt að hreyfa hann/hana eða stilla. **B5.** Klemmustaður! **B6.** Skiptilykill í verkfærakassa **B7.** Hámarksþyngd notanda (sjá tæknilegar upplýsingar). **B8.** Myndband **B9-B10.** Hreinsun (sjá þjónustu og viðhald). **B11.** Ekki má standa á fótstöðinni, hætta á að velta. **B12.** Setstaða hefur áhrif á stöðugleika. **B13.** Þyngd vöru **B14.** Lestu notkunarleiðbeiningarnar (blár og hvítur).

Upplýsingar á merkimiða með vörunn:

B15. Vöruheiti. **B16.** Vörulýsing. **B17.** Raðnúmer. **B18.** Vörunúmer. **B19.** CE merkt **B20.** Lækningatæki **B21.** Framleiðsludagsetning. **B22.** Strikamerki skv. GS1-128 GTIN-14 og raðnr.*

*Framleiðsludagsetningu vörunnar má sjá á strikamerki hennar. Talan 11 er sýnd undir strikamerkinu í sviga. Talnaröðin eftir þennan sviga er framleiðsludagsetning.

Tæknilegar upplýsingar

Sjá mynd C

Meðferð

Sjá mynd D

Uppsetning við afhendingu

Flutningur yfir þröskuld:

Við flutning á stól eingöngu skal stíga niður á hjólabúnaðinn.

Við flutning á stól með notanda í skal toga stólinn afturábak.

Í kyrrstöðu:



Beinið hjólunum fram á við og virkið bremsurnar til að draga úr hættu á að velta þegar stólinn er kyrrstæður og við flutning. Hætta á meiðslum ef tækið veltur. **D5**



Ekki sitja fremst á sætinu. Hætta á meiðslum ef tækið veltur.

Læsið alltaf eins mörgum hjólum og hægt er þegar nota skal stólinn í kyrrstöðu.

Flutningur:



Beinið hjólunum fram á við og virkið bremsurnar til að draga úr hættu á að velta þegar stólinn er kyrrstæður og við flutning. Hætta á meiðslum ef tækið veltur.

Leggið mat á áhættu og gerið athugasemdir. Sem umönnunaraðili berð þú ábyrgð á öryggi notanda. Nota ætti

D1-D2 hjálpertæki ef flutningurinn telst áhættusamur. Farðu á www.etac.com fyrir hjálpertæki við handvirkan flutning.

D3



Tryggið að framhjólin séu læst þegar notandi sest í stólinn eða stendur upp úr honum. Hætta á meiðslum.

D4

Fjarlægjið armstöðina af flutningshlið stólsins.

Framkvæmið flutninginn.

D5-D10

Armstöðir:

Hægt er að setja armstöðirnar til hliðanna og taka þær af.

D11

Hægt er að læsa armstöðunum.

D12

Fótstöð:

Umönnunaraðili getur auðveldlega þrýst fótstöðinni niður með fætinum.

D13

Hægt er að taka fótstöðina af.

D14

D6



Standið ekki á fótplötunni. Hætta á meiðslum ef varan veltur.

Stillingar

Sjá mynd E

Hæðarstilling:

Auðvelt er að stilla hæðina með því að setja skrúfuna í óskaða stöðu.



Athugið hvort öll fjögur hjólin séu jafnt stillt, annars dregur úr stöðugleika.

E1-E2



Gangið úr skugga um að vængjarærnar eru hertar. Hætta á meiðslum.

Fótstöð:

Fótstöðin er með 4 mismunandi halla- og hæðarstillingar.

E3

Fótstöðin er með 8 mismunandi halla- og hæðarstillingar.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



Þjónusta og viðhald

Flutningur, geymsla og förgun

72

Fylgihlutir	Sjá mynd F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Bekken		☐	☐	☐
F2. Bekken með loki og handfangi		☐	☐	☐
F3. Lok með handfangi		☐	☐	☐
F4. Einnota bekken		☐	☐	☐
F5. Bekkenfesting		☐	☐	☐
F6. Festing fyrir fötu		☐	☐	☐
F7. Festing fyrir einnota bekken		☐	☐	☐
F8. Festing fyrir lága festingu á bekken/fötu		☐	☐	☐
F9. Mjúk sessa		☐	☐	☐
F10. Comfort-sessa		☐	☐	☐
F11. Comfort-púði		☐	☐	☐
F12. Sætislok		☐	☐	☐
F13. Mjúk Comfort-sessa*		☐	☐	☐
F14. Comfort-fylling		☐	☐	☐
F15. Armstoðarpúðar, par		☐	☐	☐
F16. Mjúkt bak		☐	☐	☐

Fylgihlutir	Sjá mynd F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Stoð fyrir búk		☐	☐	☐
F18. Hækkunarskífur		☐	☐	☐
F19. Tvö 75 mm læsanleg hjól		☐	☐	☐
F20. Millistykki fyrir afturhjól		☐	☒	☐
F21. Sápudiskur		☐	☐	☐
F22. Þverslá		☐	☐	☐
F23. Fótstoð, fellanleg og aftengjanleg		☐	☐	☐
F24. Bólstrun bakstoðar		☐	☐	☐
F25. Öryggisbelti		☐	☐	☐
F26. Staðsetningarbelti		☐	☐	☐
F27. Öryggisbelti um brjóstakassa		☐	☐	☐
F28. Brjóst- og mjaðmaöryggisbelti		☐	☐	☐
F29. Skvettuvörn		☐	☐	☐

*Hentar aðeins fyrir Clean-gerðir með opið sæti að framan

It Bendroji informacija

Dėkojame, kad pasirinkote „Etac“ gaminį. Siekiant išvengti žalos montuojant, tvarkant ir naudojant, svarbu perskaityti šį vadovą ir išsaugoti jį ateičiai. Šį vadovą taip pat rasite www.etac.com. Pageidaujamą kalbą galite pasirinkti spustelėję nuorodą „International“ ir „Local websites“. Čia taip pat rasite ir kitą gaminio dokumentaciją, pvz., informaciją apie receptą išrašantį asmenį, išankstinio pirkimo vadovą ir atnaujinimo instrukcijas.

Vadove nurodomas naudotojas yra asmuo, kuris naudojami neįgaliojo vežimėliu. Slaugytojas yra asmuo, padedantis naudotojui.

Prekių sąrašas: ● = Kam taikoma, ○ = Priedai

Žr. dešinėje esantį prekių sąrašą, kuriame pateikiama kiekvienam gaminiui taikoma ytiną informaciją.



Paveikslėliai, nurodyti kiekviename puslapyje, pateikiami vadovo pradžioje (3–9 psl.). Atitinkamą tekstą žr. A–F pav.

Prietaisas aprašymas

„Clean“ gaminių šeima priklauso mobiliosios dušo kėdutės, iš kurių „Clean“ ir reguliuojamo aukščio „Clean Height“ yra valdomos padėjęjo, o „Clean 24“ – naudotojo.

Paskirtis

„Clean“, „Clean 24“ ir reguliuojamo aukščio „Clean Height“ (toliau – prietaisas arba gaminys) yra medicinos prietaisai, skirti funkciniam sutrikimui dėl sužeidimo arba negalios sumažinti arba kompensuoti. Prietaisai skirti naudoti atliekant higienos procedūras duše, kriauklėje arba naudojantis tualetu. Juos taip pat galima įnešti ir išnešti iš vonios kambario ar tualetu.

Numatoma naudotojų grupė

Prietaiso naudotojų grupė priklauso nuo asmens funkcinių galimybių, o ne nuo konkrečios diagnozės, sveikatos būklės ar amžiaus. Jis skirtas asmenims, kurių ūgis yra nuo 146 cm arba kurie sveria nuo 40 kg.

Kiti prietaiso naudotojai yra slaugytojai, teikiantys pagalbą, ir prietaisą montuojantys gydytojai ar technikai.

Numatytoji naudojimo aplinka

Prietaisas skirtas naudoti namų aplinkoje ir įstaigose. Jį galima naudoti vonios kambariuose, bet ne baseinuose ar panašioje koroziją sukeliančioje aplinkoje.

Numatytasis naudojimas

Prietaisas skirtas trumpalaikiam ir ilgalaikiam naudojimui ir juo galima naudotis kelis kartus per dieną.

Prietaisą naudojančio asmens oda turi būti sveika. Prietaisą galima atnaujinti ir pakartotinai naudoti.

Numatoma eksploataavimo trukmė

Numatoma eksploataavimo trukmė yra 10 metų. Išsamios informacijos apie prietaiso eksploataavimo trukmę ieškokite www.etac.com.

Naudojimo indikacijos

Naudojimo indikacijos yra šios: negalia, įskaitant, bet neapsiribojant, asmenis, turinčius fizinę negalią, kuriems reikia nugaros ir (arba) rankų atramos, kad galėtų stabiliai sėdėti, ir pagalbos pasodinant ir padedant atsistoti nuo kėdės.

Kontraindikacijos

Nėra žinomų kontraindikacijų.

Ispėjimai

Ispėjimai, apibūdinantys konkretaus veiksmo ar prietaiso nustatymo keliamą riziką, pateikti atitinkamame skyriuje.



Prieš naudodami patikrinkite naudotojo jautrumą praguloms



Sugedusį prietaisą naudoti draudžiama. Pavojus susižaloti.



Įkaitęs prietaisas gali nudeginti.



Uždėdant ar nuimant naktpuodį gali būti suspaustos kūno dalys.



Nesilaikant naudojimo instrukcijų galima susižaloti.

Atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus.

Prietaisas išbandytas ir atitinka EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016 reikalavimus.

Išankstinio pirkimo informacija

Išankstinio pirkimo informaciją rasite svetainėje www.etac.com.

Nepageidaujami reiškiniai

Jei kyla su prietaiso naudojimu susijusių nepageidaujamų reiškinių, apie juos reikia laiku pranešti vietos prekybos atstovui ir nacionalinei kompetentingai institucijai. Vietos prekybos atstovas perduos informaciją gamintojui.

Pritaikymas

yra visi veiksmas, kurie nėra pateikti naudojimo instrukcijose ir nustatymuose. Prietaisas, specialiai pritaikytas pagal kliento poreikius, neturėtų turėti „Etac“ CE ženklo. Taip pat nustoja galioti „Etac“ garantija.

Prietaisas aprašymas

Žr. A pav.



A1. Galinė atrama **A2.** Rankų atrama **A3.** Sėdynė **A4.** Kojų atrama **A5.** Ratukas **A6.** Gaminio etiketė (įspėjimai, CE ženklas) **A7.** Prekės etiketė su numeriu (ser. nr., pagaminimo data)

A8. Galinis ratas **A9.** Naudotojo stabdys

A10. Aukščio reguliavimas

Simboliai, etiketės

Žr. B pav.

Simboliai vadove ir ant prietaiso:

B1. Įspėjimas, atsargumo priemonės arba apribojimas.
B2. Naudingi patarimai. **B3.** Perdirbamos medžiagos. **B4.** Dalis / funkcija užblokuota ir jos negalima pajudinti / reguliuoti. **B5.** Prispaudimo pavojus! **B6.** Įrankių dėžės veržliaraktis **B7.** Maks. naudotojo svoris (žr. techninius duomenis). **B8.** Vaizdo įrašas **B9–B10.** Valymas (žr. skyrių „Techninė priežiūra ir priežiūra ir priežiūra“).
B11. Nestovėkite ant kojų atramos, nes galite nuvirsti.
B12. Sėdėjimo padėtis turi įtakos stabilumui.
B13. Gaminio svoris **B14.** Perskaitykite naudojimo instrukciją (mėlyna ir balta).

Informacija ant prekės etiketės:

B15. Gaminio pavadinimas. **B16.** Gaminio aprašymas. **B17.** Serijos numeris. **B18.** Prekės numeris. **B19.** CE ženklas **B20.** Medicinos prietaisas **B21.** Pagaminimo data. **B22.** Brūkšninis kodas pagal GS1-128 GTIN-14 ir serijos nr.*

*Prietaiso pagaminimo datą galima sužinoti nuskaičius prietaiso brūkšninį kodą. Skliausteliuose po brūkšninio kodu rodomas skaičius 11. Skaičių derinys po šiais skliausteliais yra pagaminimo data.

Techniniai duomenys

Žr. C pav.

Tvarkymas

Žr. D pav.

Montavimas pristačius

Važiavimas per slenksčius:

Tik kėdė, paspauskite žemyn rato tvirtinimo įtaisą.

Naudotojui sėdint patraukite kėdę atgal.

Stacionari padėtis:



Nukreipkite ratukus į priekį ir įjunkite stabdžius, kad sumažintumėte apvirtimo riziką, kai kėdė naudojama stacionariai ir perkeliama. Apvirtus prietaisui kyla pavojus susižeisti.

D5



Nesėskite ant priekinio sėdynės krašto. Pavojus susižeisti, jei prietaisas parvirstų.

Kai kėdę naudojate stacionarioje padėtyje, visada užfiksuokite kuo daugiau ratukų.

D6

Perkėlimas:



Nukreipkite ratukus į priekį ir įjunkite stabdžius, kad sumažintumėte apvirtimo riziką, kai kėdė naudojama stacionariai ir perkeliama. Apvirtus prietaisui kyla pavojus susižeisti.

Įvertinkite riziką ir atkreipkite dėmesį. Jūs, kaip slaugytojas, atsakote už naudotojo saugumą. Jei perkėlimas kelia riziką,

D1–D2 kreipkitės pagalbos. Norėdami peržiūrėti rankinio perkėlimo pagalbines priemones, apsilankykite www.etac.com.

D3

D4



Įsitikinkite, kad ratukai yra užfiksuoti, kai naudotojas atsisėda arba atsistoja nuo kėdės. Pavojus susižaloti.

Nuimkite rankų atramą nuo kėdės perkėlimo pusėje.

Perkelkite.

D5–D10

Rankų atramos:

Rankų atramas galima atlenkti ir nuimti.

D11

Rankų atramos yra užfiksuojamos.

D12

Kojų atrama.

Slaugytojas gali lengvai įstumti pėdos atramą savo pėda.

D13

Kojų atramą galima nuimti.

D14



Nestovėkite ant pėdų plokštės. Pavojus susižeisti, jei gaminys parvirstų.

Nustatymai

Žr. E pav.

Aukščio reguliavimas:

Aukštis galima lengvai reguliuoti įsukant varžtą į reikiamą padėtį.

E1–E2



Patikrinkite, ar visi keturi ratukai yra vienodai sureguliuoti, nes kitu atveju sumažėja stabilumas.



Įsitikinkite, kad priveržtos sparnuotosios veržlės. Pavojus susižaloti.

Kojų atrama.

Kojų atrama turi 4 kampo ir aukščio nustatymus.

E3

Kojų atrama turi 8 kampo ir aukščio nustatymus.

E4

Norėdami daugiau reguliavimo galimybių, perkeltite kaištį.

E5

Nuėmus pėdų atramą, atidengiami atraminiai kaiščiai ir kyla pavojus subraižyti pėdas.



Kai kėdė nustatoma į 47,5 cm aukštį, negalima naudoti apatinės kojų atramos padėties.

Nugaros atramos apmušalai**E7-E10****Naudotojo stabdys****E11-E13**

Sugnybimo ties galiniu ratuku ir važiuokle / stabdžiu pavojus.

Priežiūra ir techninė priežiūra

Prietaisą valykite įprasta neabrazyvine valymo priemone (pH nuo 5 iki 9). Nuskalaukite ir nusauskinkite. Dezinfekuokite prietaisą 70 % dezinfekciniu tirpalu. Prietaisui nereikia jokios kitos priežiūros. Prietaisą ir jo priedus galima saugiai valyti 85 °C temperatūroje 3 minutes (jei nenurodyta kitaip). Šis valymas naudojama tik atnaujinant. Prietaiso medžiagos yra atsparios įprastoms dezinfekcinėms priemonėms.

Siekiant apsaugoti nuo korozijos, buvo naudojami šie paviršiaus apdorojimo metodai:
 Lakuoti paviršiai = poliesterio miltelių danga
 Nelakuoti plieno paviršiai = Fe/Zn-Ni
 Gaminiui suteikiama 5 metų medžiagų ir gamybos defektų garantija. Sąlygas rasite www.etac.com.

Transportavimas, laikymas ir šalinimas**Laikymas**

Prietaisą laikykite viduje, sausoje vietoje, aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje. Jei prietaisas laikomas ilgą laiką (ilgiau nei keturis mėnesius), prieš naudojimą jį turi patikrinti specialistas.

Perdirbkite pagal nacionalines taisykles.

Priedai	Žr. F pav.	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Klozetas		☐	☐	☐
F2. Klozetas ir dangtis su rankena		☐	☐	☐
F3. Dangtis su rankena		☐	☐	☐
F4. Vienkartinis klozetas		☐	☐	☐
F5. Klozeto laikiklis		☐	☐	☐
F6. Kibiro laikiklis		☐	☐	☐
F7. Vienkartinio klozeto laikiklis		☐	☐	☐
F8. Priedas, skirtas žemai pritvirtinti klozetą arba kibirą		☐	☐	☐
F9. Minkšta sėdynė		☐	☐	☐
F10. Komforto sėdynė		☐	☐	☐
F11. Komforto pagalvėlė		☐	☐	☐
F12. Sėdynės dangtis		☐	☐	☐
F13. Minkšta komforto sėdynė*		☐	☐	☐
F14. Komforto paminkštinimas		☐	☐	☐
F15. Rankų atramų pagalvėlių pora		☐	☐	☐

Priedai	Žr. F pav.	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16. Minkšta nugaros atrama		☐	☐	☐
F17. Liemens atrama		☐	☐	☐
F18. Paaukštinimo tarpikliai		☐	☐	☐
F19. Du 75 mm užfiksuojami ratukai		☐	☐	☐
F20. Galinio rato adapteris		☐	☒	☐
F21. Muilinė		☐	☐	☐
F22. Skersinis strypas		☐	☐	☐
F23. Kojų atrama, sulankstoma ir nuimama		☐	☐	☐
F24. Nugaros atlošo apmušalas		☐	☐	☐
F25. Saugos diržas		☐	☐	☐
F26. Padėties nustatymo diržas		☐	☐	☐
F27. Krūtinės diržas		☐	☐	☐
F28. Krūtinės ir klubo padėties nustatymo diržai		☐	☐	☐
F29. Apsauga nuo taškymosi		☐	☐	☐

*Tinka tik „Clean“ su sėdynės anga priekyje

Terima kasih kerana memilih produk Etac. Bagi mengelakkan kerosakan semasa pemasangan, pengendalian dan penggunaan, adalah penting bagi anda membaca manual ini dan menyimpannya untuk rujukan masa hadapan. Anda juga boleh mendapatkannya di www.etac.com. Anda boleh memilih bahasa anda melalui pautan "Antarabangsa" dan "Laman web tempatan". Di sini anda juga akan menemui dokumentasi produk yang lain, seperti maklumat pihak yang memberikan preskripsi, panduan prapembelian dan arahan pemulihan.

Dalam manual ini, pengguna ialah orang yang duduk di atas kerusi. Penjaga ialah orang yang menolong pengguna.

Senarai item: ● = Terpakai untuk, ○ = Aksesori-aksesori

Lihat senarai item di sebelah kanan yang memaparkan maklumat berkenaan setiap produk.



Imej yang dirujuk pada setiap halaman ditemui pada permulaan manual (halaman 3 hingga 9). Lihat Rajah A hingga F untuk teks yang sepadan.

Penerangan peranti

Keluarga Clean adalah rangkaian kerusi mandi mudah alih yang terdiri daripada Clean dan Clean Height boleh laras untuk pembantu sorong dan Clean 24" boleh disorong oleh pengguna.

Tujuan yang dimaksudkan

Clean, Clean 24" dan Clean Height boleh laras (seterusnya juga dirujuk sebagai "peranti" atau "produk") ialah peranti perubatan yang bertujuan untuk melegakan atau mengimbangi kemerosotan fungsi akibat kecederaan atau hilang upaya. Produk ini direka untuk digunakan semasa melakukan tugas pembersihan di bilik mandi, di atas singki atau di atas tandas, dan untuk pemindahan ke dan dari bilik pembersihan.

Kumpulan pengguna yang dimaksudkan

Kumpulan pengguna peranti ini adalah berdasarkan keupayaan fungsi individu dan bukan pada dianogsis, keadaan kesihatan atau umur tertentu. Alat ini bertujuan untuk individu dengan ketinggian 146 cm atau lebih, atau berat badan 40 kg atau lebih.

Pengguna sekunder peranti ini ialah penjaga yang memberikan bantuan dan doktor/juruteknik yang mengurus peranti.

Persekitaran yang dimaksudkan

Peranti ini bertujuan untuk kegunaan dalaman dalam persekitaran rumah atau institusi dan sesuai digunakan di bilik mandi, tetapi bukan untuk kolam renang atau persekitaran menghakis yang serupa.

Penggunaan yang dimaksudkan

Peranti ini bertujuan untuk kegunaan jangka pendek dan jangka panjang dan boleh digunakan beberapa kali sehari.

Peranti ini bertujuan untuk digunakan dengan kulit yang tidak rosak. Peranti ini bertujuan untuk pengubahsuaian dan penggunaan semula.

Jangka hayat perkhidmatan

Jangka hayat perkhidmatan ialah 10 tahun. Untuk maklumat lengkap berkenaan hayat perkhidmatan peranti, sila layari www.etac.com.

Indikasi

Indikasi penggunaan adalah ketidakupayaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada individu kurang upaya fizikal yang memerlukan sokongan belakang dan/atau tempat letak tangan untuk kekal dalam posisi duduk serta bantuan untuk duduk atau bangun dari kerusi.

Kontraindikasi:

Tiada kontraindikasi yang diketahui.

Amaran

Amaran yang menerangkan elemen risiko bagi suatu tindakan atau tetapan tertentu terhadap produk ini boleh didapati di bahagian yang berkaitan.



Periksa sensitiviti pengguna terhadap ulser tekanan sebelum guna



Peranti yang rosak tidak boleh digunakan. Risiko kecederaan.



Peranti yang panas boleh menyebabkan kulit melecur.



Bahagian badan akan tersepit semasa pemasangan atau pengeluaran mangkuk najis.



Mengabaikan arahan penggunaan boleh mengakibatkan kecederaan.

Pengisytiharan pematuhan

Peranti ini memenuhi syarat Peraturan Peranti Perubatan (EU) 2017/745.

Peranti ini diuji dan memenuhi syarat EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Maklumat prapembelian

Maklumat prapembelian boleh didapati di www.etac.com.

Kejadian buruk

Sekiranya berlaku kejadian buruk berkaitan dengan penggunaan peranti, sila laporkan kepada pengedar tempatan dan pihak berkuasa kompeten negara secepat mungkin. Pengedar tempatan akan menyampaikan maklumat tersebut kepada pengilang.

Penyesuaian

adalah semua yang melampaui arahan dan tetapan manual. Peranti yang diubahsuai khas oleh pelanggan tidak boleh mengekalkan tanda Etac CE. Tempoh waranti Etac tamat.

Penerangan peranti

Lihat Rajah A



A1. Sokongan belakang **A2.** Sokongan tangan **A3.** Tempat duduk **A4.** Sokongan kaki **A5.** Kastor **A6.** Label produk (amaran, tanda CE) **A7.** Label nombor item (no. siri, tarikh pengeluaran)

A8. Roda belakang **A9.** Brek pengguna

A10. Pelarasan ketinggian

Simbol, label

Lihat Rajah B

Simbol-simbol pada manual dan pada peranti:

B1. Amaran, langkah berjaga-jaga atau had. **B2.** Nasihat dan petua yang berguna. **B3.** Bahan untuk diktir semula. **B4.** Bahagian/fungsi dikunci dan tidak boleh digerak/diubah. **B5.** Tempat tersepit! **B6.** Sepana hujung kotak alatan **B7.** Maksimum berat pengguna (lihat pada data teknikal). **B8.** Video **B9-B10.** Pembersihan (lihat perkhidmatan dan penyelenggaraan). **B11.** Dilarang berdiri di atas tempat letak kaki, risiko tergelincir. **B12.** Kedudukan duduk mempengaruhi kestabilan. **B13.** Berat produk **B14.** Baca arahan penggunaan (biru dan putih).

Maklumat pada item tidak berlabel:

B15. Nama produk. **B16.** Perihal produk. **B17.** Nombor siri. **B18.** Nombor item. **B19.** Bertanda CE **B20.** Peranti perubatan **B21.** Tarikh pengeluaran. **B22.** Akses kod bar untuk GS1-128 GTIN-14 dan nombor siri*

*Tarikh pengilangan peranti boleh dibaca melalui kod bar pada peranti. Nombor 11 ditunjukkan di bawah kod bar dalam kurungan. Kombinasi nombor selepas kurungan ini ialah tarikh pengilangan.

Data teknikal

Lihat Rajah C

Pengendalian

Lihat Rajah D

Pemasangan semasa penghantaran

Pindahkan melalui bendul:

Kerusi sahaja, tekan ke bawah pada penyambung roda. **D3**

Dengan pengguna, tarik kerusi dari arah belakang. **D4**

Dalam kedudukan tidak bergerak:



Halakan kastor ke hadapan dan aktifkan brek untuk mengurangkan risiko terbalik apabila kerusi digunakan pegun dan semasa memindahkan. Risiko kecederaan jika peranti terbalik. **D5**



Jangan duduk di atas di tepi bahagian hadapan tempat duduk. Risiko kecederaan sekiranya peranti terbalik.

Sentiasa kunci sebanyak mungkin kastor sekiranya kerusi berada dalam kedudukan tidak bergerak. **D6**

Pemindahan:



Halakan kastor ke hadapan dan aktifkan brek untuk mengurangkan risiko terbalik apabila kerusi digunakan pegun dan semasa memindahkan. Risiko kecederaan jika peranti terbalik.

Nilai risiko dan ambil perhatian. Anda sebagai penjaga bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna.

D1-D2 Gunakan alat bantuan sekiranya pemindahan dalam keadaan berisiko. Layari www.etac.com untuk manual alat bantuan pemindah.



Pastikan kastor dikunci ketika pengguna duduk atau bangun daripada kerusi. Risiko kecederaan.

Tanggalkan tempat letak tangan pada bahagian pemindah kerusi.

Lakukan pemindahan.

D5-D10

Sokongan tangan:

Sokongan tangan boleh dipusing dan ditanggalkan. **D11**

Sokongan tangan boleh dikunci. **D12**

Sokongan kaki:

Penjaga boleh menolak sokongan kaki dengan mudah menggunakan kaki mereka. **D13**

Sokongan kaki boleh ditanggalkan. **D14**



Jangan berdiri di atas pelapik kaki. Risiko kecederaan sekiranya produk terjatuh.

Tetapan

Lihat Rajah E

Pelarasan ketinggian:

Ketinggian boleh dilaraskan dengan mudah dengan meletakkan skru pada kedudukan yang diperlukan.

E1-E2



Semak keempat-empat kastor supaya dalam keadaan yang sama, jika tidak ia akan mengurangkan kestabilan.



Pastikan nat sayap diketatkan. Risiko kecederaan.

Sokongan kaki:

Sokongan kaki mempunyai 4 perbezaan tetapan sudut dan ketinggian.

E3

Sokongan kaki mempunyai 8 perbezaan tetapan sudut dan ketinggian.

E4

Lebih banyak pilihan pelarasan yang tersedia dengan menggerakkan pin.

E5

Sekiranya sokongan kaki ditanggalkan, pin sokongan akan terdedah dan berisiko melukakan kaki.



Sekiranya kerusi dilaraskan pada ketinggian 47.5 cm, kedudukan sokongan kaki paling rendah tidak boleh digunakan.

Sarung sokongan belakang**E7-E10****Brek pengguna****E10-E12**

Risiko terhimpit pada roda hadapan dan casis/brek.

Perkhidmatan dan penyelenggaraan

Bersihkan peranti menggunakan agen pencuci standard tidak kasar (antara pH 5 dan 9). Bilas dan keringkan.
 Basmi kuman dengan larutan pembasmi 70%.
 Produk tidak memerlukan penyelenggaraan lain.
 Peranti dan aksesori boleh dibersihkan dengan selamat pada 85°C selama 3 minit (kecuali dinyatakan sebaliknya).
 Terpakai untuk membaiki pulih.
 Bahan-bahannya kalis terhadap bahan pembasmi kuman biasa.

Kaedah rawatan permukaan ini telah digunakan untuk melindungi daripada kakisan:

Permukaan berkilat = Salutan serbuk poliester

Permukaan besi tidak berkilat = Fe/Zn-Ni

Jaminan 5 tahun terhadap kerosakan bahan dan pembuatan. Untuk terma dan syarat, sila layari www.etac.com.

Pengangkutan, penyimpanan dan pelupusan**Penyimpanan**

Produk perlu disimpan di dalam rumah di tempat yang kering pada suhu melebihi 5°C. Jika produk telah disimpan untuk masa yang lama (lebih daripada empat bulan), fungsinya mesti diperiksa oleh pakar sebelum digunakan.

Untuk dikitar semula mengikut peraturan negara.

Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
●	●	
		●
○	○	○
	●	
		●
		●
		●

Aksesori-aksesori	Lihat Rajah F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Pan		☐	☐	☐
F2. Pan dan penutup dengan pemegang		☐	☐	☐
F3. Penutup dengan pemegang		☐	☐	☐
F4. Pan pakai buang		☐	☐	☐
F5. Pemegang pan		☐	☐	☐
F6. Pemegang timba		☐	☐	☐
F7. Pemegang pan pakai buang		☐	☐	☐
F8. Pemasangan pelapik rendah pan/baldi		☐	☐	☐
F9. Tempat duduk yang lembut		☐	☐	☐
F10. Tempat duduk yang selesa		☐	☐	☐
F11. Kusyen yang selesa		☐	☐	☐
F12. Penutup tempat duduk		☐	☐	☐
F13. Tempat duduk yang lembut dan selesa*		☐	☐	☐
F14. Pelapik yang selesa		☐	☐	☐
F15. Kusyen tempat letak tangan, sepasang		☐	☐	☐
F16. Tempat sandar yang lembut		☐	☐	☐

Aksesori-aksesori	Lihat Rajah F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Sokongan badan		☐	☐	☐
F18. Meningkatkan pengatur jarak		☐	☐	☐
F19. Dua 75 mm kastor boleh dikunci		☐	☐	☐
F20. Penyambung roda belakang		☐	☒	☐
F21. Bekas sabun		☐	☐	☐
F22. Besi palang		☐	☐	☐
F23. Sokongan kaki, boleh dilipat dan ditanggalkan		☐	☐	☐
F24. Sarung penyandar		☐	☐	☐
F25. Tali pinggang keselamatan		☐	☐	☐
F26. Tali penetapan		☐	☐	☐
F27. Tali pinggang keselamatan dada		☐	☐	☐
F28. Tali penetapan dada dan pinggul		☐	☐	☐
F29. Pelindung percikan		☐	☐	☐

*Hanya bersesuaian dengan model Clean dengan tempat duduk terbuka di bahagian depan

pl Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór produktu marki Etac. Aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu, obsługi i użytkowania, należy przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. Można ją również znaleźć na stronie www.etac.com. W celu wyboru języka należy kolejno kliknąć linki „International” (międzynarodowe) i „Local websites” (zlokalizowane wersje witryny). W witrynie znajdują się również inne dokumenty dotyczące produktu, takie jak informacje dla zleciiodawców, poradnik zakupu i instrukcje regeneracji.

W niniejszej instrukcji użytkownik to osoba korzystająca z wózka. Opiekun to osoba pomagająca użytkownikowi.

Lista elementów: ● = W zestawie, ○ = Akcesoria

Patrz: lista elementów po prawej stronie, gdzie znajdziesz informacje dotyczące każdego produktu.



Ilustracje, o których mowa na każdej stronie, znajdują się na początku instrukcji (strony od 3 do 9). Odnosny tekst można znaleźć na rysunkach od A do F.

Opis wyrobu

Clean to seria mobilnych krzeseł prysznicowych. Wersje Clean i Clean z regulacją wysokości są napędzane przez asystenta, a wersja Clean 24” może być napędzana przez użytkownika.

Przeznaczenie

Produkty Clean, Clean 24” i Clean z regulacją wysokości (zwane dalej również wyrobem lub produktem) to wyroby medyczne przeznaczone do łagodzenia lub niwelowania skutków zaburzeń czynnościowych spowodowanych urazem lub niepełnosprawnością. Wyrób jest przeznaczony do wykorzystania podczas czynności higienicznych pod prysznicem, przy umywalce lub nad toaletą, a także do przemieszczania użytkownika korzystającego z pomieszczenia sanitarnego.

Grupa docelowa

Grupa docelowa opiera się na faktycznej sprawności funkcjonalnej osoby, a nie na postawionej diagnozie, stanie zdrowia lub wieku. Produkt przeznaczony jest dla osób o wzroście co najmniej 146 cm lub o masie co najmniej 40 kg.

Użytkownikami wtórnymi wyrobu są opiekunowie udzielający pomocy oraz klinicyści/technicy, którzy konfiguruja wyrób.

Środowisko użytkowania

Wyrób jest przeznaczony do użytkowania w środowisku mieszkalnym lub instytucjonalnym i nadaje się do wykorzystania w łazienkach, ale nie na basenach ani w podobnych środowiskach oddziałujących korozyjnie.

Sposób użytkowania

Wyrób jest przeznaczony do zastosowań krótko- i długookresowych oraz może być używany wiele razy na dobę.

Wyrób jest przewidziany do kontaktu ze skórą. Wyrób nadaje się do regeneracji i ponownego użycia.

Przewidywana żywotność

Przewidywana żywotność produktu wynosi 10 lat. Pełne informacje na temat żywotności wyrobu można znaleźć na stronie www.etac.com.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania jest niepełnosprawność, w tym m.in. niepełnosprawność fizyczna, z którą wiąże się zapotrzebowanie na oparcie i/lub podłokietniki w celu utrzymania pozycji siedzącej oraz na pomoc w posadzeniu na krześle i wstaniu z niego.

Przeciwwskazania:

Nie istnieją żadne znane przeciwwskazania do używania produktu.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia opisujące ryzyko związane z określoną czynnością lub określonym ustawieniem wyrobu można znaleźć w odpowiedniej części.



Przed użyciem sprawdzić wrażliwość odleżyn u użytkownika.



Nie należy użytkować wadliwie działającego wyrobu. Ryzyko odniesienia obrażeń.



Rozgrzany wyrób może spowodować oparzenia.



Podczas wkładania lub wyjmowania basenu może dojść do przyszczypania kończyny.



Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała.

Deklaracja zgodności

Wyrób jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Wyrób został przetestowany i spełnia wymagania normy EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Informacje dla nabywcy

Informacje dla nabywcy można znaleźć na stronie www.etac.com.

Zdarzenie niepożądane

W razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego w toku eksploatacji wyrobu należy niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie lokalnemu sprzedawcy i odpowiednim organom nadzoru. Lokalny sprzedawca przekaze te informacje do producenta.

Personalizacja

Oznacza wszystko, co wykracza poza opisane tu instrukcje i ustawienia. Wyrób specjalnie dostosowany do potrzeb klienta nie może mieć oznaczenia CE Etac. Gwarancja Etac wygasa.

Opis wyrobu

Patrz: rysunek A



A1. Oparcie **A2.** Podłokietnik **A3.** Siedzisko **A4.** Podnóżek **A5.** Kółko **A6.** Etykieta produktu (ostrzeżenia, oznakowanie CE) **A7.** Etykieta z numerem artykułu (numer seryjny, data produkcji)

A8. Koło tylne **A9.** Hamulec użytkownika

A10. Regulacja wysokości

Symbole, etykiety

Patrz: rysunek B

Symbole używane w instrukcji i na wyrobie:

B1. Ostrzeżenie, środek ostrożności lub ograniczenie.
B2. Przydatne porady i wskazówki. **B3.** Materiał do recyklingu. **B4.** Część/funkcja jest zablokowana i nie można z niej korzystać. **B5.** Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia kończyny! **B6.** Klucz oczkowy **B7.** Maks. ciężar ciała użytkownika (patrz: dane techniczne). **B8.** Wideo **B9–B10.** Czyszczenie (patrz: „Serwis i konserwacja”).
B11. Nie stawać na podnóżku – niebezpieczeństwo przewrócenia. **B12.** Pozycja siedząca wpływa na stabilność. **B13.** Ciężar produktu **B14.** Zapoznać się z instrukcjami użytkowania (niebieski i biały).

Informacje na temat etykiety identyfikacyjnej:

B15. Nazwa produktu. **B16.** Opis produktu.
B17. Numer seryjny. **B18.** Numer artykułu. **B19.** Oznaczony znakiem CE **B20.** Wyrób medyczny **B21.** Data produkcji.
B22. Kod kreskowy w standardzie GS1-128 GTIN-14 i nr seryjny*

*Datę produkcji można odczytać z kodu kreskowego umieszczonego na wyrobie. Poniżej kodu kreskowego znajduje się liczba 11 w nawiasie. Kombinacja cyfr za nawiasem to data produkcji.

Dane techniczne

Patrz: rysunek C

Użytkowanie

Patrz: rysunek D

Montaż po otrzymaniu dostawy

Przeprowadzenie przez próg:

Tylko krzesło – nacisnąć do dołu mocowanie koła.

Pociągnąć krzesło z użytkownikiem do tyłu.

W pozycji unieruchomienia:



Skierować kółka do przodu i aktywować hamulce, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się wózka podczas korzystania z niego w stanie unieruchomienia oraz podczas przewożenia. Niebezpieczeństwo zranienia w razie przewrócenia się wyrobu.

D5



Nie siedzieć na przedniej krawędzi siedziska. Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek przewrócenia się wyrobu.

Gdy krzesło ma być używane w pozycji unieruchomienia, należy zablokować jak najwięcej kółek.

Przenoszenie:



Skierować kółka do przodu i aktywować hamulce, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się wózka podczas korzystania z niego w stanie unieruchomienia oraz podczas przewożenia. Niebezpieczeństwo zranienia w razie przewrócenia się wyrobu.

D1–D2 Ocenić ryzyko i sporządzić notatki. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkownika krzesła. Jeśli przeniesienie jest uważane za ryzykowne, należy skorzystać z pomocy. Informacje na temat pomocy przy ręcznym przenoszeniu można znaleźć na stronie www.etac.com.

D3

D4



Upewnić się, że kółka są zablokowane, gdy użytkownik siada na wózku lub wstaje z niego. Ryzyko odniesienia obrażeń.

Zdjąć z krzesła podłokietnik od strony przenoszenia.

Wykonać przenoszenie.

D5–D10

Podłokietniki:

Podłokietniki można odchylić i zdemontować.

D11

Podłokietniki można zablokować.

D12

Podnóżki:

Opiekun może z łatwością wsunąć podnóżek nogą.

D13

Podnóżek można zdemontować.

D14



Nigdy nie stawać na podnóżku. Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek przewrócenia się produktu.

Ustawienia

Patrz: rysunek E

Regulacja wysokości:

Wysokość można łatwo wyregulować, umieszczając śrubę w odpowiednim położeniu.

E1–E2



Sprawdzić, czy wszystkie cztery kółka są ustawione w podobny sposób, tak aby nie doszło do utraty stabilności.



Upewnić się, że nakrętki motylkowe są dokręcone. Ryzyko odniesienia obrażeń.

Podnóżki:

Podnóżek oferuje 4 ustawienia kąta i wysokości.

E3

Podnóżek oferuje 8 ustawień kąta i wysokości.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



84

Akcesoria		Patrz: rysunek F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1.	Basen	☐	☐	☐
F2.	Basen z pokrywą z uchwytem	☐	☐	☐
F3.	Pokrywa z uchwytem	☐	☐	☐
F4.	Basen jednorazowy	☐	☐	☐
F5.	Wspornik basenu	☐	☐	☐
F6.	Wspornik wiaderka	☐	☐	☐
F7.	Wspornik basenu jednorazowego	☐	☐	☐
F8.	Mocowanie do niskiego montażu basenu/wiaderka	☐	☐	☐
F9.	Siedzisko miękkie	☐	☐	☐
F10.	Siedzisko komfortowe	☐	☐	☐
F11.	Poduszka komfortowa	☐	☐	☐
F12.	Pokrywa siedziska	☐	☐	☐
F13.	Miękkie siedzisko komfortowe*	☐	☐	☐
F14.	Obicie komfortowe	☐	☐	☐
F15.	Poduszka podłokietnika, para	☐	☐	☐

Akcesoria		Patrz: rysunek F		
		Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16.	Oparcie miękkie	☐	☐	☐
F17.	Pelota tułowia	☐	☐	☐
F18.	Dystanse podwyższające	☐	☐	☐
F19.	Dwa kółka skrętne z blokadą 75 mm	☐	☐	☐
F20.	Adapter koła tylnego	☐	☒	☐
F21.	Półka na mydło	☐	☐	☐
F22.	Poprzeczka	☐	☐	☐
F23.	Podnózek, składany i demontowalny	☐	☐	☐
F24.	Tapicerka oparcia	☐	☐	☐
F25.	Pas bezpieczeństwa	☐	☐	☐
F26.	Pas stabilizujący	☐	☐	☐
F27.	Pas piersiowy uprząży	☐	☐	☐
F28.	Pasy stabilizujące klatkę piersiową i biodra	☐	☐	☐
F29.	Osłona przed rozpryskami	☐	☐	☐

*Dotyczy tylko modeli Clean z otwartym z przodu siedziskiem

Agradecemos a sua escolha de um produto Etac. Para evitar danos durante a montagem, o manuseamento e a utilização, é importante ler este manual e guardá-lo para consulta futura. Também pode encontrá-lo em www.etac.com. Pode selecionar o seu idioma através da hiperligação "Internacional" e "Sites locais". Aqui também encontrará documentação de outros produtos, como informações para os prescritores, guia de pré-compra e instruções de recondicionamento.

No manual, o utilizador é a pessoa que está sentada na cadeira. O prestador de cuidados é a pessoa que ajuda o utilizador.

Lista de artigos: ● = Aplica-se a, ○ = Acessórios

Consulte a lista de itens à direita, que mostra as informações aplicáveis a cada produto.



As imagens às quais se faz referência em cada página, encontram-se no início do manual (páginas 3 a 9). Ver figuras A a F para o texto correspondente.

Descrição do dispositivo

A família Clean é uma gama de cadeiras sanitárias de duche móveis, das quais a Clean e a Clean Height adjustable são movidas por um assistente e a Clean 24" pode ser movida pelo utilizador.

Utilização prevista

Clean, Clean 24" e Clean Height adjustable (doravante também referidos como "o dispositivo" ou "o produto") são dispositivos médicos destinados a aliviar ou compensar uma incapacidade funcional devido a uma lesão ou deficiência. O dispositivo foi concebido para ser utilizado durante a realização de tarefas de higiene em chuveiros, lavatórios ou sobre sanitas, bem como para transferências de e para a casa de banho.

Grupo de utilizadores previsto

O grupo de utilizadores do dispositivo baseia-se na capacidade funcional do utilizador e não num diagnóstico, condição de saúde ou idade específicos. Destina-se a indivíduos com uma altura igual ou superior a 146 cm, ou com uma massa igual ou superior a 40 kg.

Os utilizadores secundários do dispositivo são prestadores de cuidados que prestam assistência e os médicos/técnicos que configuram o dispositivo.

Ambiente de utilização previsto

O dispositivo destina-se a uma utilização interior em ambientes domésticos ou instituições e é adequado para utilização em casas de banho, mas não em piscinas ou ambientes corrosivos semelhantes.

Finalidade prevista

O dispositivo destina-se a uma utilização a curto e longo prazo e pode ser utilizado várias vezes por dia.

O dispositivo destina-se a ser utilizado com pele intacta. O dispositivo destina-se a ser recondicionado e reutilizado.

Vida útil prevista

A vida útil prevista é de 10 anos. Para obter a informação completa sobre a vida útil do produto, consulte www.etac.com.

Indicações

A indicação para utilização é uma deficiência, incluindo, entre outras, um indivíduo com deficiência física que necessita de apoio para as costas e/ou apoios para os braços para manter uma posição sentada e assistência com transferências para/da cadeira.

Contraindicações:

Não existem contraindicações conhecidas.

Avisos

Os avisos que descrevem um elemento de risco para uma ação ou definição específica do dispositivo podem ser encontrados na secção relevante.



Verifique a sensibilidade do utilizador quanto à úlcera por pressão antes de utilizar



Não utilize um dispositivo defeituoso. Risco de ferimentos.



Um dispositivo aquecido pode provocar queimaduras.



É possível que partes do corpo fiquem entaladas ao aplicar ou retirar a arrastadeira



O incumprimento das instruções de utilização pode resultar em ferimentos.

Declaração de conformidade

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos.

O dispositivo foi testado e cumpre os requisitos das normas EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Informações de pré-compra

As informações de pré-compra podem ser encontradas em www.etac.com.

Acontecimento adverso

Em caso de ocorrência de um acontecimento adverso relacionado com a utilização do dispositivo, este deve ser comunicado ao seu revendedor local e à autoridade nacional competente em tempo útil. O revendedor local reencaminhará as informações para o fabricante.

Adaptação ao paciente

é tudo o que ultrapasse as instruções e definições do manual. O dispositivo especialmente adaptado pelo cliente não deve manter a marca CE da Etac. A garantia da Etac expira.

Descrição do dispositivo

Ver figura A



A1. Encosto **A2.** Apoio para os braços **A3.** Assento **A4.** Apoio para os pés **A5.** Rodízio **A6.** Etiqueta de produto (avisos, marcação CE) **A7.** Etiqueta de número de artigo (n.º de série, data de produção)

A8. Roda traseira **A9.** Travão do utilizador

A10. Ajuste da altura

Símbolos, etiquetas

Ver figura B

Símbolos no manual e no dispositivo:

B1. Aviso, precaução ou limitação. **B2.** Conselhos e sugestões úteis. **B3.** Material para reciclagem. **B4.** A peça/função está bloqueada e não pode ser deslocada/ajustada. **B5.** Ponto de esmagamento! **B6.** Chave de caixa de ferramentas **B7.** Peso máx. do utilizador (ver as especificações técnicas). **B8.** Vídeo **B9-B10.** Limpeza (ver assistência e manutenção). **B11.** Não se ponha de pé sobre o apoio para os pés. Risco de queda por desequilíbrio. **B12.** A posição em que o utilizador se senta afeta a estabilidade. **B13.** Peso do produto **B14.** Consultar as instruções de utilização (azul e branco)

Informações sobre o artigo sem etiqueta:

B15. Nome do produto. **B16.** Descrição do produto. **B17.** Número de série. **B18.** Número de artigo. **B19.** Marcação CE **B20.** Dispositivo médico **B21.** Data de produção. **B22.** Código de barras de acordo com GS1-128 GTIN-14 e número de série*

*A data de fabrico do dispositivo pode ser lida a partir do código de barras existente no mesmo. O número 11 é apresentado por baixo do código de barras entre parêntesis. A combinação de números após estes parêntesis é a data de fabrico.

Especificações técnicas

Ver figura C

Manuseamento

Ver figura D

Instalação no momento da entrega

Transferência sobre uma soleira:

Apenas com a cadeira, faça pressão para baixo na fixação das rodas.

Com o utilizador, puxe a cadeira para trás.

Em posição imóvel:



Aponte as rodas para a frente e ative os travões para reduzir o risco de tombar quando a cadeira for utilizada de forma estacionária e durante a transferência. Risco de ferimentos se o aparelho tombar.

D5



Não se sente na extremidade dianteira do assento. Risco de ferimentos se o dispositivo tombar.

Bloqueie sempre tantas rodas quanto possível, quando a cadeira é utilizada numa posição imóvel.

D6

Transferência:



Aponte as rodas para a frente e ative os travões para reduzir o risco de tombar quando a cadeira for utilizada de forma estacionária e durante a transferência. Risco de ferimentos se o aparelho tombar.

Avalie os riscos e tome notas. Enquanto prestador de cuidados, é responsável pela segurança do utilizador. Se a transferência

D1-D2 for considerada perigosa, deverão ser utilizadas ajudas. Consulte o site www.etac.com para ajudas de transferência manual.

D3



Certifique-se de que as rodas estão bloqueadas quando o utilizador se senta ou se levanta da cadeira. Risco de ferimentos.

D4

Retire o apoio para o braço do lado de transferência da cadeira.

Efetue a transferência.

D5-D10

Apoios para os braços:

Os apoios para os braços são afastados e amovíveis.

D11

Os apoios para os braços são bloqueáveis.

D12

Apoios para os pés:

O prestador de cuidados pode facilmente empurrar o apoio para os pés para dentro com o pé.

D13

O apoio para os pés é amovível.

D14



Não se coloque em pé sobre o apoio para os pés. Risco de ferimentos se o produto tombar.

Definições

Ver figura E

Ajuste da altura:

A altura pode ser ajustada facilmente, colocando o parafuso na posição pretendida.

E1-E2



Certifique-se de que as quatro rodas são ajustadas da mesma forma, caso contrário, a estabilidade será reduzida.



Certifique-se de que as porcas de orelhas estão apertadas. Risco de ferimentos.

Apoios para os pés:

O apoio para os pés tem 4 posições diferentes de ângulo e altura.

E3

O apoio para os pés tem 8 posições diferentes de ângulo e altura.

E4

E5



E7-E10

E11-E13



88

Acessórios	Ver figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Arrastadeira		☐	☐	☐
F2. Arrastadeira e tampa com pega		☐	☐	☐
F3. Tampa com pega		☐	☐	☐
F4. Arrastadeira descartável		☐	☐	☐
F5. Suporte de arrastadeira		☐	☐	☐
F6. Suporte de balde		☐	☐	☐
F7. Suporte de arrastadeira descartável		☐	☐	☐
F8. Acessório para montagem rebaixada da arrastadeira/do balde		☐	☐	☐
F9. Assento macio		☐	☐	☐
F10. Assento conforto		☐	☐	☐
F11. Almofada conforto		☐	☐	☐
F12. Tampa do assento		☐	☐	☐
F13. Assento macio confortável*		☐	☐	☐
F14. Revestimento conforto		☐	☐	☐
F15. Revestimento do apoio para o braço, par		☐	☐	☐

Acessórios	Ver figura F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F16. Encosto macio		☐	☐	☐
F17. Apoio para o tronco		☐	☐	☐
F18. Espaçadores de elevação		☐	☐	☐
F19. Duas rodas bloqueáveis de 75 mm		☐	☐	☐
F20. Adaptador de roda traseira		☐	☒	☐
F21. Saboneteira		☐	☐	☐
F22. Barra transversal		☐	☐	☐
F23. Apoio para os pés, dobrável e amovível		☐	☐	☐
F24. Revestimento do apoio para as costas		☐	☐	☐
F25. Cinto de segurança		☐	☐	☐
F26. Cinta de posicionamento		☐	☐	☐
F27. Cinta de arnês de peito		☐	☐	☐
F28. Cintos de posicionamento do peito e das ancas		☐	☐	☐
F29. Proteção contra respingos		☐	☐	☐

*Apenas adequado para modelos Clean com abertura do banco na parte da frente

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Etac. Aby sa zabránilo poškodeniu počas montáže, manipulácie a používania, je dôležité, aby ste si prečítali tento návod a uschovali ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Nájdete ho aj na webovej stránke www.etac.com. Pomocou odkazu „International“ (Medzinárodné) a „Local websites“ (Miestne webové stránky) si môžete zvoliť jazyk. Nájdete tu aj ďalšiu dokumentáciu k výrobku, ako sú informácie pre predpisujúcich lekárov, sprievodcu pred kúpou a pokyny na renováciu.

V tomto návode predstavuje používateľa osoba, ktorá sedí na stoličke. Opatrovateľ je osoba, ktorá pomáha používateľovi.

Zoznam položiek: ● = Platí pre, ○ = Príslušenstvo

Pozrite si zoznam položiek vpravo, v ktorom sú uvedené informácie vzťahujúce sa na jednotlivé výrobky.



Obrázky, na ktoré sa odkazuje na každej strane, nájdete na začiatku návodu (strany 3 až 9). Príslušný text nájdete na obrázkoch A až F.

Popis pomôcky

Séria Clean je rad mobilných sprchovacích stoličiek, kde sú pomôcky Clean a nastaviteľná Clean Height poháňané asistenčným pohonom a Clean 24" môže byť poháňaná používateľom.

Určený účel použitia

Clean, Clean 24" a nastaviteľná Clean Height (ďalej tiež „pomôcka“ alebo „výrobok“) sú zdravotnícke pomôcky určené na zmiernenie alebo kompenzáciu funkčných porúch spôsobených poranením alebo zdravotným postihnutím. Pomôcka je určená na použitie pri vykonávaní hygienických úkonov v sprche, umývadle alebo nad toaletou, ako aj na presun do a z hygienickej miestnosti.

Určená skupina používateľov

Skupina používateľov pomôcky je založená na funkčnej schopnosti jednotlivca a nie na konkrétnej diagnóze, zdravotnom stave ani veku. Je určený pre osoby s výškou 146 cm alebo vyššie, s hmotnosťou 40 kg alebo viac.

Sekundárnymi používateľmi pomôcky sú opatrovatelia, ktorí poskytujú pomoc a lekári/technici, ktorí pomôcku nastavujú.

Určené prostredie použitia

Táto pomôcka je určená na použitie v interiéri v domácom prostredí alebo inštitúciách a je vhodná na použitie v kúpeľniach, nie však v bazénoch ani podobnom korozívnom prostredí.

Plánované použitie

Pomôcka je určená na krátkodobé a dlhodobé používanie a môže sa použiť niekoľkokrát denne.

Pomôcka je určená na používanie s neporušenou pokožkou. Táto pomôcka je určená na renováciu a opakované použitie.

Predpokladaná životnosť

Predpokladaná životnosť výrobku je 10 rokov. Úplné informácie o životnosti pomôcky nájdete na webovej stránke www.etac.com.

Indikácie na použitie

Indikáciou na použitie je zdravotné postihnutie, vrátane, ale nie výlučne, jedinca s telesným postihnutím, ktorý potrebuje opierku chrbta a/alebo opierku rúk na zachovanie sediacej polohy a pomoc pri presunoch na stoličku/zo stoličky.

Kontraindikácie:

Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Výstrahy

Výstrahy, ktoré popisujú rizikový prvok pre konkrétnu činnosť alebo nastavenie pomôcky, nájdete v príslušnej časti.



Pred použitím skontrolujte citlivosť používateľa na dekubity



Poškodenú pomôcku nepoužívajte. Nebezpečenstvo poranenia.



Zohriata pomôcka môže spôsobiť popáleniny.



Pri vkladaní alebo vyberaní misy sa môžu zovrieť časti tela.



Nedodržanie návodu na použitie môže mať za následok poranenie.

Vyhlasenia o zhode

Pomôcka spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

Pomôcka je testovaná a spĺňa požiadavky normy EN ISO 10993-1, ISO 17966:2016.

Informácie pred kúpou

Informácie pred kúpou nájdete na webovej stránke www.etac.com.

Nežiaduce udalosti

V prípade výskytu nežiaducej udalosti v súvislosti s používaním pomôcky je potrebné túto skutočnosť včas nahlásiť miestnemu predajcovi a príslušnému štátnemu orgánu. Miestny predajca postúpi informácie výrobcovi.

Prispôsobenie

je všetko, čo presahuje pokyny a nastavenia v návode. Pomôcka špeciálne upravená pre zákazníkov nesmie obsahovať označenie CE spoločnosti Etac. Záruka spoločnosti Etac zaniká.

Popis pomôcky

Pozri obrázok A



A1. Opierka chrbta **A2.** Opierka rúk **A3.** Sedadlo **A4.** Opierka nôh **A5.** Koliesko **A6.** Štítok výrobcu (výstraha, označenie CE) **A7.** Štítok s číslom položky (ser. č., dátum výroby)

A8. Zadné koleso **A9.** Brzda používateľa

A10. Nastavenie výšky

Symbols, štítky

Pozri obrázok B

Symbols v návode a na pomôcke:

B1. Výstraha, bezpečnostné opatrenie alebo obmedzenie.
B2. Užitočné rady a tipy. **B3.** Materiál na recykláciu.
B4. Diel/funkcia sú zablockované a nedá sa s nimi pohybovať/nastaviť ich. **B5.** Miesto zovretia! **B6.** Box na náradie s kľúčmi na matice **B7.** Maximálna hmotnosť používateľa (pozri technické údaje). **B8.** Video **B9-B10.** Čistenie (pozri servis a údržba). **B11.** Nestojte na opierke nôh, hrozí riziko prevrátenia. **B12.** Poloha sedenia ovplyvňuje stabilitu. **B13.** Hmotnosť výrobku **B14.** Prečítajte si návod na použitie (modrá a biela).

Informácie o položke bez štítku:

B15. Názov výrobku. **B16.** Popis výrobku.
B17. Sériové číslo. **B18.** Číslo položky. **B19.** Označené CE
B20. Lekárska pomôcka **B21.** Dátum výroby. **B22.** Čiarový kód podľa GS1-128 GTIN-14 a sériové č.*

*Dátum výroby pomôcky je možné prečítať z čiarového kódu na pomôcke. Pod čiarovým kódom v zátvorkách je zobrazené číslo 11. Číselná kombinácia za týmito zátvorkami predstavuje dátum výroby.

Technické údaje

Pozri obrázok C

Manipulácia

Pozri obrázok D

Montáž po dodaní

Presun cez prah:

Iba stolička, zatlačte nadol na upevnenie kolesa.

Spolu s používateľom potiahnite stoličku dozadu.

V stacionárnej polohe:



Kolieska nasmerujte dopredu a aktivujte brzdy, aby sa znížilo riziko prevrátenia, keď sa stolička používa v stacionárnom stave, a počas presunu. Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrátenia pomôcky.

D5



Nesadajte si na predný okraj sedadla. Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrátenia pomôcky.

Keď sa stolička používa v stacionárnej polohe, vždy zablokujte čo najviac koliesok.

Presun:



Kolieska nasmerujte dopredu a aktivujte brzdy, aby sa znížilo riziko prevrátenia, keď sa stolička používa v stacionárnom stave, a počas presunu. Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrátenia pomôcky.

Posúďte riziká a robte si poznámky. Ako opatrovateľ ste zodpovedný za bezpečnosť používateľa. Ak sa presun

D1-D2 považuje za rizikový, mali by sa používať pomôcky. Navštívte webovú stránku www.etac.com, kde nájdete pomôcky na manuálny presun.

D3

D4



Uistite sa, že kolieska sú zablockované, keď používateľ sadá alebo vstáva zo stoličky. Nebezpečenstvo poranenia.

Odstráňte opierku rúk na strane presunu stoličky.

Vykonajte presun.

D5-D10

Opierky rúk:

Opierky rúk sú sklopné a odnímateľné.

D11

Opierky rúk sú blokovaťelné.

D12

Opierky nôh:

D6

Opatrovateľ môže jednoducho nohou zatlačiť opierku nôh.

D13

Opierka nôh je odpojiteľná.

D14



Nestojte na opierke nôh. Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku spadnutia pomôcky.

Nastavenia

Pozri obrázok E

Nastavenie výšky:

Výšku je možné jednoducho nastaviť umiestnením skrutky do požadovanej polohy.



Skontrolujte, či sú všetky štyri kolieska nastavené rovnako, inak sa zníži stabilita.

E1-E2



Overte, či sú krídlové matice dotiahnuté. Nebezpečenstvo poranenia.

Opierky nôh:

Opierka nôh má 4 rôzne nastavenia uhla a výšky.

E3

Opierka nôh má 8 rôzne nastavenia uhla a výšky.

E4

Ďalšie možnosti nastavenia sú dostupné posunutím kolíka.

E5



Po odstránení opierky nôh sú podporné kolíky odkryté a hrozí nebezpečenstvo odrenia chodidiel.



Pri nastavení výšky stoličky na 47,5 cm sa nesmie používať najnižšia poloha opierky nôh.

Čalúnenie opierky chrbta

E7-E10

Brzda používateľa

E11-E13



Riziko zovretia v zadnom kolese a podvozku/brzde.

Servis a údržba

Pomôcku čistíte štandardným neabrazívnym čistiacim prostriedkom (pH medzi 5 a 9). Opláchnite a vysušte. Pomôcku dezinfikujte 70 % dezinfekčným roztokom.

Pomôcka nevyžaduje inú údržbu.

Pomôcku a jej príslušenstvo je možné bezpečne čistiť 3 minúty pri teplote 85 °C (pokiaľ nie je uvedené inak).

Platí to pre renováciu.

Základné materiály sú odolné voči bežným dezinfekčným prostriedkom.

Na ochranu proti korózii sa používajú nasledujúce metódy povrchovej úpravy:

Lakované povrchy = polyuretánový práškový náter

Nelakované ocelové povrchy = Fe/Zn-Ni

5-ročná záruka proti chybám materiálu a výrobným chybám. Podmienky nájdete na webovej stránke

www.etac.com.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Skladovanie

Pomôcku skladujte v interiéri na suchom mieste pri teplote vyššej ako 5 °C. Ak bola pomôcka uskladnená po dlhšiu dobu (viac ako štyri mesiace), musí jej funkčnosť pred použitím skontrolovať odborník.

Recyklujte v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Príslušenstvo	Pozri obrázok F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F1. Misa		☐	☐	☐
F2. Misa a doska s rukoväťou		☐	☐	☐
F3. Doska s rukoväťou		☐	☐	☐
F4. Jednorazová misa		☐	☐	☐
F5. Držiak na misu		☐	☐	☐
F6. Držiak na vedro		☐	☐	☐
F7. Držiak na jednorazovú misu		☐	☐	☐
F8. Nadstavec pre nízku montáž misy/vedra		☐	☐	☐
F9. Mäkké sedadlo		☐	☐	☐
F10. Pohodlné sedadlo		☐	☐	☐
F11. Pohodlná vložka		☐	☐	☐
F12. Doska sedadla		☐	☐	☐
F13. Mäkké pohodlné sedadlo*		☐	☐	☐
F14. Pohodlné čalúnenie opierky		☐	☐	☐
F15. Vložka opierky rúk, pár		☐	☐	☐
F16. Mäkká opierka chrbta		☐	☐	☐

Príslušenstvo	Pozri obrázok F	Clean	Clean 24"	Clean H. adj.
F17. Opierka trupu		☐	☐	☐
F18. Rozpery na zvýšenie koliesok		☐	☐	☐
F19. Dve 75 mm blokovaťné kolieska		☐	☐	☐
F20. Adaptér zadného kolesa		☐	☒	☐
F21. Miska na mydlo		☐	☐	☐
F22. Priečka		☐	☐	☐
F23. Opierka nôh, sklopná a odnímateľná		☐	☐	☐
F24. Čalúnenie opierky chrbta		☐	☐	☐
F25. Bezpečnostný pás		☐	☐	☐
F26. Polohovací pás		☐	☐	☐
F27. Hrudný pás		☐	☐	☐
F28. Hrudný a bedrový polohovací pás		☐	☐	☐
F29. Ochrana proti striekajúcej vode		☐	☐	☐

*Vhodné iba pre modely Clean s otvorom na sedadle vpredu



1. مسند الظهر 2. مسند الذراع 3. كرسي 4. مسند القدم 5. عجلة الكرسي 6. ملصق المنتج (تحذيرات، علامة CE)
7. ملصق رقم العنصر (رقم القطعة، تاريخ الإنتاج)

8. العجلة الخلفية 9. مكبح المستخدم

10. ضبط الارتفاع

معلومات حول العنصر الذي لا يوجد له ملصق:

- ب15. اسم المنتج. ب16. وصف المنتج.
ب17. الرقم التسلسلي. ب18. رقم العنصر. ب19. حاصل على علامة CE
ب20. جهاز طبي ب21. تاريخ الإنتاج. ب22. الرمز الشريطي المثبت على
منتج GS1-128 GTIN-14 والرقم التسلسلي*
* يمكن قراءة تاريخ تصنيع الجهاز من الرمز الشريطي الموجود عليه. يظهر
الرقم 11 أسفل الرمز الشريطي بين قوسين. مجموعة الأرقام بعد هذه الأقواس
هي تاريخ التصنيع.

الرموز المعروضة في الدليل وعلى الجهاز:

- ب1. التحذيرات أو الاحتياطات أو القيود. ب2. نصائح وتلميحات مفيدة.
ب3. المواد المصنعة لإعادة التدوير. ب4. القطعة/الوظيفة مؤمنة، ولا يمكن
تحريكها/ضبطها. ب5. نقطة قرص! ب6. مفتاح ربط صندوق الطرف ب7.
أقصى وزن للمستخدم (انظر البيانات الفنية).
ب8. فيديو ب9-ب10. التنظيف (انظر الخدمة والصيانة). ب11. لا تقف على
مسند القدمين، كي لا تتعرض للانقلاب. ب12. يؤثر موضع الجلوس على
الثبات. ب13. وزن المنتج ب14. اقرأ تعليمات الاستخدام (أزرق وأبيض).

محفوظ بالمخاطر. قم بزيارة موقع www.etac.com للحصول على مساعدات
التحرك اليدوية.

د1-د2

التركيب بمجرد التسليم

النقل من فوق عتبة:

تأكد من تأمين العجلات عند جلوس المستخدم على الكرسي أو
النهوض منه. خطر التعرض للإصابة.



د3

اضغط على مثبت العجلة لأسفل من الكرسي فقط.

د4

اسحب الكرسي للخلف مع المستخدم.

في الوضع الثابت:

د5-د10

قم بإزالة مسند الذراع الموجود على جانب النقل في الكرسي.

قم بالانتقال.

مسند الذراعين:

د11

يتم تحريك مسندي الذراعين بعيداً وفصلهما.

د12

مسند الذراعين قابلين للتأمين.

مسند القدمين:

د13

يمكن لمقدم الرعاية دفع مسند القدم بسهولة بقدمه.

د14

مسند القدم قابل للفصل.

لا تقف على ألواح القدمين. خطر الإصابة في حالة انقلاب المنتج.



وجه العجلات للأمام ونشط الفرامل لتقليل خطر الانقلاب عند
استخدام الكرسي بشكل ثابت وعند النقل. خطر الإصابة بسبب
انقلاب الجهاز.



قم بتقييم المخاطر وتدوين الملاحظات. وبصفتك مقدم رعاية، فأنت مسؤول عن
سلامة المستخدم. ويجب عليك استخدام وسائل المساعدة إذا تبين لك أن التحرك

تحقق من ضبط جميع العجلات الأربعة بشكل مماثل، وإلا سيقل
الثبات.



تأكد من إحكام ربط الصواميل المجنحة. خطر التعرض للإصابة.



هـ1-هـ2

ضبط الارتفاع:

يمكن ضبط الارتفاع بسهولة عن طريق وضع المسمار في الموضع المطلوب.

مسند القدمين:

هـ3

توجد 4 إعدادات مختلفة للزاوية والارتفاع لمسند القدم.

هـ4

توجد 8 إعدادات مختلفة للزاوية والارتفاع لمسند القدم.

تحقق من حساسية المستخدم لقرحة الفراش قبل الاستخدام



يجب عدم استخدام الجهاز المعيب. خطر التعرض للإصابة.



قد يتسبب الجهاز المسخن في الإصابة بحروق.



قد تتعرض أجزاء الجسم للضغط في أثناء وضع الوعاء أو إزالته.



قد يؤدي تجاهل تعليمات الاستخدام إلى حدوث إصابات.



بيان التوافق

يستوفي هذا الجهاز متطلبات لائحة الأجهزة الطبية (EU) 2017/745.

وقد تم اختبار الجهاز وتبين أنه يستوفي متطلبات المعيار EN ISO 10993-1 و ISO 17966:2016.

معلومات ما قبل الشراء

يمكن العثور على معلومات ما قبل الشراء على الموقع www.etac.com.

الأحداث الضارة

في حالة وقوع حادث ضار مرتبط باستخدام المنتج، يجب إبلاغ الوكيل المحلي والسلطة الوطنية المختصة في الوقت المناسب. وسيقوم الوكيل المحلي بإرسال المعلومات إلى الشركة المصنعة.

تكييف المنتج

يشير إلى كل ما يتجاوز إرشادات الدليل والإعدادات. يجب ألا يحتفظ الجهاز الذي تم تعديله بشكل خاص من قبل العميل بعلامة CE الخاصة بمنتجات Etac. وفي هذه الحالة يبطل ضمان Etac.

شكراً لاختيارك منتج Etac. لتجنب حدوث تلف أثناء التجميع والمناولة والاستخدام، من المهم قراءة هذا الدليل وحفظه للرجوع إليه مستقبلاً. يمكنك أيضاً الاطلاع عليه على الموقع www.etac.com. يمكنك تحديد لغتك عبر رابط "المواقع الدولية" و "المواقع المحلية". ستجد هنا أيضاً وثائق المنتج الأخرى، مثل معلومات الوصفات الطبية، ودليل الشراء المسبق، وتعليمات التجديد.

في هذا الدليل، يكون المستخدم هو الشخص الذي يجلس على كرسي الحمام. ومقدم الرعاية هو الشخص الذي يساعد المستخدم.

قائمة العناصر: ● = تنطبق على، ○ = الملحقات

راجع قائمة العناصر الموجودة على اليسار التي تعرض المعلومات التي تنطبق على كل منتج.



توجد الصور المشار إليها في كل صفحة في بداية الدليل (الصفحات من 3 إلى 9). انظر الأشكال من "أ" إلى "و" للاطلاع على النص المقابل.

وصف الجهاز

مجموعة منتجات Clean هي عبارة عن مجموعة من كراسي الاستحمام المتحركة؛ فالطرازين Clean و Clean Height adjustable يتميزان بأنهما ذاتيتي الحركة، بينما يحتاج الطراز Clean 24 مقاس 24 بوصة إلى الدفع عن طريق المستخدم.

الغرض المقصود

الطرز Clean و Clean 24 و Clean Height adjustable (يُشار إليها فيما بعد أيضاً باسم "الجهاز" أو "المنتج") هي أجهزة طبية مخصصة للتخفيف من أو التعويض عن ضعف وظيفي بسبب إصابة أو إعاقة ما. تم تصميم الجهاز عند القيام بمهام النظافة في الحمام، أو في الحوض، أو على المراحيض، فضلاً عن الانتقال من غرفة النظافة وإليها.

المستخدمون المستهدفون

تعتمد مجموعة المستخدمين المستهدفين لاستخدام الجهاز على القدرة الوظيفية للفرد، وليس على تشخيص محدد أو حالة صحية أو عمر معين. فهذا المنتج مخصص للأفراد الذين يبلغ طولهم 146 سم أو أكثر، أو الذين يبلغ وزنهم 40 كجم أو أكثر.

أما المستخدمون الثانويون للجهاز، فهم مقدمو الرعاية الذين يقدمون المساعدة والأطباء/التقنيون الذين قاموا بإعداد الجهاز.

بيئة الاستخدام المقصودة

هذا الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي في المنازل أو مؤسسات الرعاية وهو مناسب للاستخدام في الحمامات، وليس في حمامات السباحة أو البيئات المسببة للتآكل المماثلة.

الاستخدام المستهدف

هذا الجهاز مخصص للاستخدام على المدى القصير والطويل، ويمكن استخدامه عدة مرات في اليوم.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام بحيث يلامس الجلد السليم. هذا الجهاز مخصص للتجديد وإعادة الاستخدام.

العمر الافتراضي المتوقع للمنتج

يبلغ العمر الافتراضي المتوقع للمنتج 10 سنوات. للحصول على معلومات كاملة حول العمر المتوقع للجهاز، راجع موقع www.etac.com.

دواعي الاستعمال

دواعي الاستعمال هي الإعاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد ذوي الإعاقات الجسدية الذين يحتاجون إلى مسند للظهر و/أو مساند للذراعين للحفاظ على وضعية الجلوس والمساعدة في عمليات الانتقال من/إلى الكرسي.

موانع الاستعمال:

لا توجد موانع استعمال معروفة.

تحذيرات

يمكن العثور على التحذيرات التي تشرح خطورة إجراء أو إعداد الجهاز بطريقة معينة في القسم ذي الصلة.

Clean	H. adj.	Clean 24"	Clean	الملحقات	انظر الشكل و
☐	☐	☐	☐	و16. ظهر لّين	
☐	☐	☐	☐	و17. دعامة خرطوم	
☐	☐	☐	☐	و18. مبادعات زيادة الارتفاع	
☐	☐	☐	☐	و19. عجلتان قابلتان للتأمين بمقاس 75 مم	
☐	☒	☐	☐	و20. محول العجلة الخلفية	
☐	☐	☐	☐	و21. وعاء للصابون	
☐	☐	☐	☐	و22. عارضة	
☐	☐	☐	☐	و23. مسند قدم قابل للطي والفصل	
☐	☐	☐	☐	و24. فرش مسند الظهر	
☐	☐	☐	☐	و25. حزام الأمان	
☐	☐	☐	☐	و26. حزام تحديد الموضع	
☐	☐	☐	☐	و27. حزام الصدر	
☐	☐	☐	☐	و28. أحزمة ضبط موضع الصدر والورك	
☐	☐	☐	☐	و29. الواقي من الرذاذ	

Clean	H. adj.	Clean 24"	Clean	الملحقات	انظر الشكل و
☐	☐	☐	☐	و1. وعاء	
☐	☐	☐	☐	و2. وعاء وغطاء مع المقيض	
☐	☐	☐	☐	و3. غطاء مع المقيض	
☐	☐	☐	☐	و4. وعاء يُستخدم لمرة واحدة	
☐	☐	☐	☐	و5. حامل وعاء	
☐	☐	☐	☐	و6. حامل دلو	
☐	☐	☐	☐	و7. حامل وعاء يُستخدم لمرة واحدة	
☐	☐	☐	☐	و8. ملحق للتركيب المنخفض للوعاء/الدلو	
☐	☐	☐	☐	و9. كرسي لّين	
☐	☐	☐	☐	و10. كرسي مريح	
☐	☐	☐	☐	و11. وسادة مريحة	
☐	☐	☐	☐	و12. غطاء الكرسي	
☐	☐	☐	☐	و13. كرسي مريح ولّين*	
☐	☐	☐	☐	و14. حشوة مريحة	
☐	☐	☐	☐	و15. وسادتان لمسندي الذراعين	

* غير ملائم إلا لطرز Clean المزوّدة بفتحة للكرسي من الأمام

تتوفر المزيد من خيارات التعديل عن طريق تحريك المسمار.

5هـ

عند إزالة دعامة القدم، تكون مسامير الدعم مكشوفة وتعرض القدمين لخطر الاحتكاك.



عند ضبط الكرسي على ارتفاع 47,5 سم، يجب عدم استخدام أدنى موضع لمسند القدمين.



10هـ-7هـ

فرش مسند الظهر

13هـ-11هـ

فراجل المستخدم

يوجد خطر نتيجة الضغط على العجلات الخلفية والهيكل/الفراجل.



الخدمة والصيانة

الأسطح المطلية = طلاء مسحوق البوليستر
الأسطح الفولاذية غير المطلية = الحديد/الزنك-نيكل
وهذا المنتج يتمتع بضمان 5 سنوات ضد عيوب المواد والتصنيع. للاطلاع على البنود والشروط، راجع موقع www.etac.com.

قم بتنظيف الجهاز باستخدام مادة تنظيف عادية غير كاشطة (درجة الحموضة بين 5 و9). اشطف الجهاز وجففه.
وطهر الجهاز باستخدام محلول مطهر بنسبة 70%.
فهذا الجهاز لا يتطلب أي صيانة أخرى.
يمكن تنظيف الجهاز بأمان عند 85 درجة مئوية لمدة 3 دقائق (ما لم يذكر خلاف ذلك). ويسري هذا الأمر على عمليات التجديد.
المواد المكونة لهذا المنتج تتسم بأنها مقاومة للمطهرات العامة.
وقد تم استخدام طرق المعالجة السطحية التالية لحماية المنتج من التآكل:

نقل المنتج وتخزينه والتخلص منه

يجب إعادة تدويره وفقاً للوائح الوطنية.

التخزين

يجب تخزين الجهاز في مكان داخلي جاف وغير مكشوف عند درجة حرارة أعلى من 5 درجات مئوية. إذا تم تخزين الجهاز لفترة طويلة (أكثر من أربعة أشهر)، يجب أن يفحص خبير وظيفته قبل الاستخدام.

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa AG**

Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach, CH
+41 44 872 97 79

**Etac Supply Center AB**

Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



+46 371 58 73 00



info@etac.com



www.etac.com



78644

etac[®]
Creating Possibilities