



Grand Tourer

by Travel Buggy

Portable Power Wheelchair

TABLE OF CONTENTS

NOTICES	3	TRANSPORTING	18
SAFETY INFORMATION	4	BATTERY MAINTENANCE	20
BATTERY SAFETY INFORMATION	5	CHARGING	22
SPECIFICATIONS	7	MAINTENANCE,CARE,TROUBLESHOOTING	23
UNBOXING	9	LIMITED WARRANTY	24
UNFOLDING	10	CONTACT & SUPPORT	25
FOLDING	11		
SET UP	12		
CONTROLLER	14		
HOW-TO FEATURES			
BACKREST HEIGHT ADJUSTMENT	16		
ARMREST HEIGHT ADJUSTMENT	16		
JOYSTICK FORWARD AND BACKWARD ADJUSTMENT	16		
FOOTREST HEIGHT ADJUSTMENT	16		
FREE WHEEL	17		

⚠ CAUTION:Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.
Improper use or maintenance can void the warranty.Keep this manual for future reference.

NOTICES

Thank you for choosing Grand Tourer by Travel Buggy, a convenient and portable powerchair.

It is important to read through this manual before operating your Grand Tourer to become familiar with its features as well as its limitations and safety information.

You will find the operation and care of your Grand Tourer very simple and easy, though should you have any questions, please contact Travel Buggy.

OUR CUSTOMER HOTLINE

Canada: 1.888.56.BUGGY(28449)

USA: 1.855.56.BUGGY(28449)

EMAIL

contact@travelbuggy.com



DISCLAIMER:

The notes, warnings, and cautions contained within the manual and marked by the triangular Caution Symbol ⚠ should be given special care. Users should also pay special attention to information marked in this manual beginning with **NOTICE**.

Travel Buggy, its affiliates and partners cannot be held responsible for personal injury or property damage resulting from the unsafe or improper operation or maintenance of the Grand Tourer Power wheelchair.

As part of our ongoing product improvement initiative, Travel Buggy reserves the right to change specifications and design without notice. As a result, there may be minor differences between your Grand Tourer and the photos, illustrations and instructions in this manual.

SAFETY INFORMATION

- DO make certain that the seat is in a locked position when you are operating your GRAND TOURER
- DO reduce your Grand Tourer speed when you are driving around a corner
- DO proceed with caution as you approach the downgrade of a ramp or other incline and when driving near a raised surface or unprotected ledges and drop offs (curbs, porches, stairs etc.)
- DO avoid exposure to rain snow, ice, salt, or standing water, whenever possible
- DO maintain and store in a clean and dry condition
- DO keep your hands away from the tires when driving. Be aware that loose fitting clothing can become caught in drive tires
- DO keep tools and other metal objects away from battery terminals. Contact with tools can cause electrical shock
- DO follow the recommended weight capacity (300lbs /136 kg)
- DO follow the recommended incline slope rating (10 degrees)
- DO check the battery charge to ensure there is enough charge to get to your destination before using.
- DO ensure your Grand Tourer power is OFF when entering and exiting the power wheelchair
- DO NOT drive your Grand Tourer across the side of a hill or diagonally up or down a hill, and do not stop (if possible) while driving up or down an incline
- DO NOT operate your new GRAND TOURER for the first time without completely reading and understanding the owner's manual
- DO NOT carry additional passengers on your GRAND TOURER
- DO NOT use your GRAND TOURER as a seat in a moving vehicle
- DO NOT allow unsupervised children to play near the power wheelchair
- DO NOT operate your Grand Tourer while under the influence of alcohol, as this may impair your ability to drive safely
- DO NOT sit in the Grand Tourer while in a moving vehicle, as an accident or sudden stop may cause you to be thrown from the power wheelchair and compromise the seat lock latch
- ALL servicing must be performed by qualified personnel only. Unauthorized modifications to power wheelchairs, its power system or its control system may compromise the performance and safety of the system. UNDER NO CIRCUMSTANCES should you attempt any repair or service that is not covered in this manual.
- ALWAYS ensure all safety warning labels are in place and legible.

⚠ WARNING: The operator should read all the warning signs and instructions here and on the power wheelchair before use.

⚠ WARNING: You should not operate your power wheelchair on public streets and roadways. Be aware that it may be difficult for traffic to see you when you are seated on your power wheelchair. Obey all local pedestrian traffic rules. Wait until your path is clear of traffic and then proceed with extreme caution.

BATTERY SAFETY INFORMATION

WHEN USING THE BATTERY

1. Lithium-Ion battery packs may get hot, explode or ignite and cause serious injury if exposed to abuse conditions. Be sure to follow the safety warnings listed below:
 - DO NOT place the battery near fire or heat the battery
 - DO NOT install the battery backwards so the polarity is reversed
 - DO NOT connect the positive and negative terminals of the battery to each other with any metal object(such as a wire)
 - DO NOT carry or store the battery together with necklaces, hairpins, or other metal objects
 - DO NOT pierce the battery with nails, strike the battery with a hammer, step on the battery or otherwise subject it to strong impacts or shocks
 - DO NOT solder directly on to the battery
 - DO NOT expose battery to water or salt water, or allow the battery to get wet
2. DO NOT disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices, which if damaged, may cause the battery to generate heat, explode or ignite
3. Do NOT place the battery in or near fire, on stoves or other high temperature locations. Do not place the battery in direct sunlight, or use or store batteries inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, explode or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
4. If the device is to be used by children the caregiver should explain the contents of this document to the children and provide adequate supervision to ensure the device is being used appropriately
5. When the battery is worn out, insulate the terminals with adhesive tape or similar materials before disposal
6. Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging or storing the battery, the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, or shape, or appears abnormal in any way. Contact Travel Buggy if any of these problems are observed
7. DO NOT place battery in microwave oven, high pressure containers or on induction cookware

BATTERY SAFETY INFORMATION



CHARGING PRECAUTIONS

1. BE SURE to follow the warnings listed below while charging the battery. Failure to do so may cause the battery to become hot, explode or ignite and cause serious injury.
 - When charging the battery, ONLY USE THE SPECIFIED CHARGER PROVIDED WITH THE PRODUCT
 - DO NOT attach the battery to a power supply plug or directly to a car's cigarette lighter
 - DO NOT place the battery in or near fire, or in direct sunlight. Heating the battery can damage the safety circuitry, which can cause additional heating, rupture or ignition of the battery
2. DO NOT continue charging the battery if it does not recharge in the timelines specified in the operating manual (4-6 hours or until the charging brick turns green)
3. THE TEMPERATURE range over which a battery can be charged is 0°C to 45°C (32°F to 113°F). Charging the battery at temperatures outside of that range may cause severe damage to the battery or reduce battery life expectancy

WHEN DISCHARGING THE BATTERY

1. DO NOT discharge the battery using any other device except for the specified device. When the battery is used in devices other than the specified device, it may damage the battery or reduce its life expectancy. The device may cause abnormal current flow, which can cause the battery to become hot, explode or ignite and cause serious injury.
2. THE TEMPERATURE range over which the battery can be discharged is -20°C to 60°C (-4°F to 140°F). Use of the battery outside this temperature range may damage the performance of the battery or may reduce its life expectancy.

SPECIFICATIONS

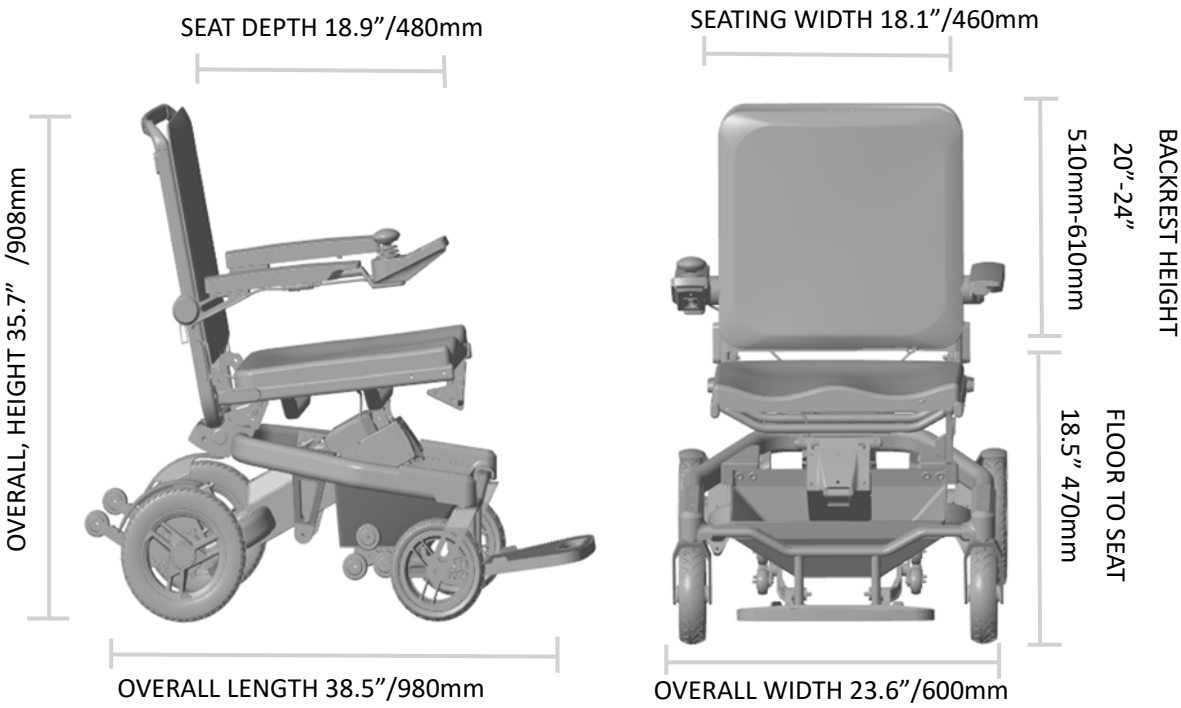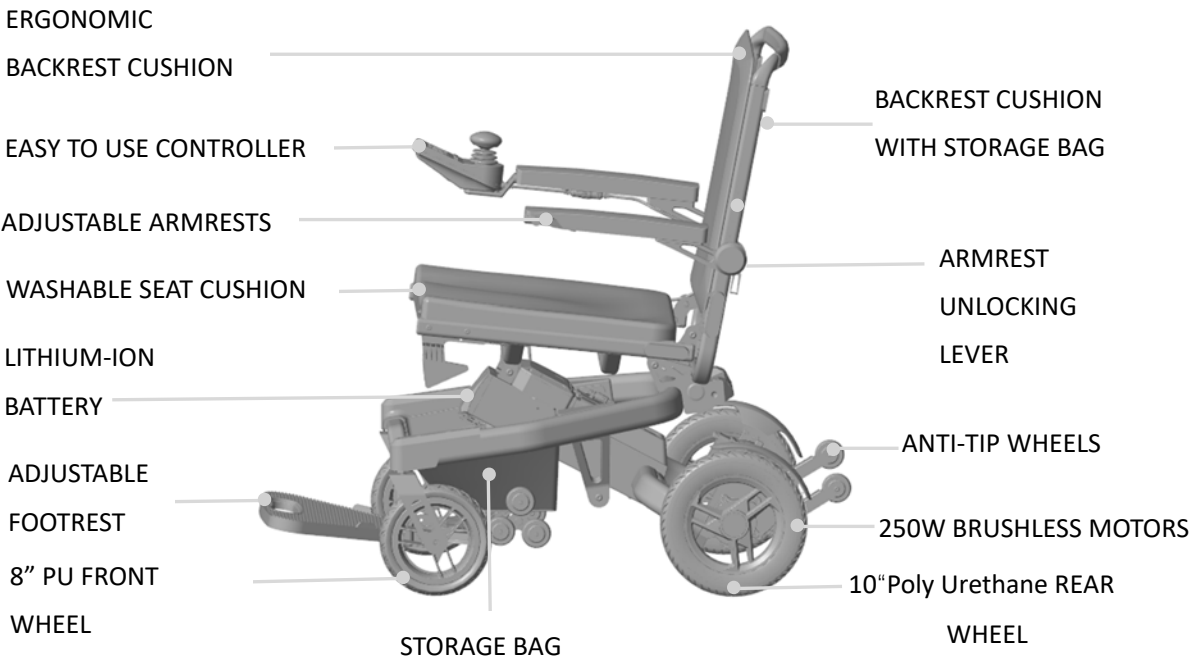

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

DRIVING RANGE: 15.53MI/25KM

MAXIMUM SPEED: 3.73MPH/6KPH

DRIVE SYSTEM: TWO MOTOR DRIVE SYSTEM

MOTOR TYPE:250 WATT BRUSHLESS

INCLINE CAP ABILITY:10°

TURNING RADIUS:31.5"/800mm

STOPPING DISTANCE:3.28FT/1m
(AT FULL SPEED)

OBSTACLE CLEARANCE:1.57"/40mm

BRAKING SYSTEM: ELECTROMAGNETIC

MAX WEIGHT CAPACITY:300LBS/136KG

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS

UNFOLDED DIMENSIONS: 38.5"*23.6"*35.7"
980mm*600mm*908mm

CHAIR GROSS WEIGHT: 55LBS / 25KG

CHAIR NET WEIGHT: 50.7LBS /23KG
(NO BATTERY)

SEAT CUSHION SIZE:
18" (W)*18(D)"/450mm(W)*450mm(D)

FOLDED DIMENSIONS: 29.5" *23.6"*13.8"
750mm*600mm*350mm

SEATING WIDTH:18.11"/460mm

FRONT WHEEL DIAMETER: 8"

REAR WHEEL DIAMETER: 10"

FLOOR TO SEAT HEIGHT: 18.5"/470mm

BACK SUPPORT HEIGHT:
19.7"/21.65"/23.62" 500mm/550mm/600mm

OTHER SPECIFICATIONS

BATTERY TYPE: Lithium-Ion (24VX12AH)

BATTERIES PROVIDED:ONE (1)

BATTERY WATT HOUR:288WH

BATTERY CHARGE CYCLES: ~500

TIRES: PU

CHARGING TIME:6 TO 7 HOURS


CHARGER INPUT:100-240V,50/60HZ
(INTERNATIONAL)

CHARGER OUTPUT:24V 2.0A

LAP BELT: PROVIDED

HORN: BUILT-IN

UNBOXING

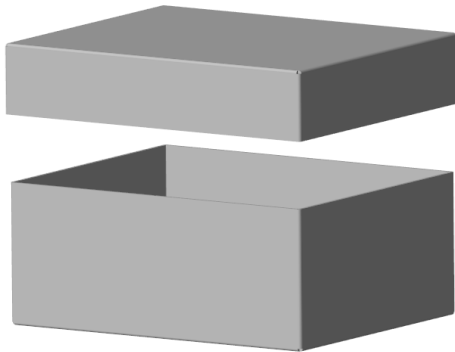


- To remove the powerchair, orientate the box, so it is laid down on the ground
- Grab the top and begin to pull your Grand Tourer out horizontally parallel with the ground.

- Locate the components provided with your power wheelchair



SEAT CUSHION

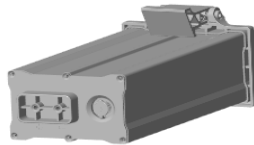

LITHIUM BATTERY



JOYSTICK



BATTERY CHARGER




TOOL KIT



TOOL

UNFOLDING

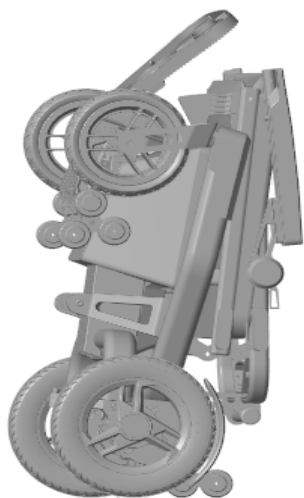

1-Lift the footrest and pull the safety lock upward to unlock the chair.



2-Unfold the wheelchair outward until you hear a clicking sound indicating it is locked in place.



3-Lower the anti-tip wheel bracket, complete the unlocking of the wheelchair.

⚠ NOTICE: Failure to fully extend the power chair into its locked position may result in injury while driving.


FOLDING



1-Lift both the armrests and the anti-tip wheel brackets upward.




2-Pull the unlocking handle and push the wheelchair forward.

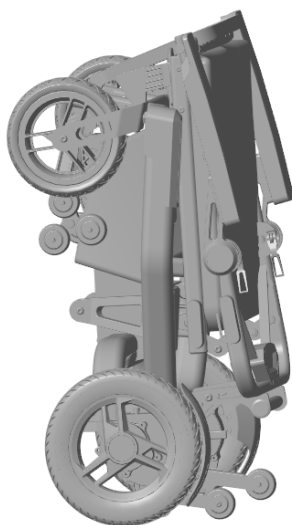


3-Until you hear a clicking sound indicating it is locked in place.

SET UP

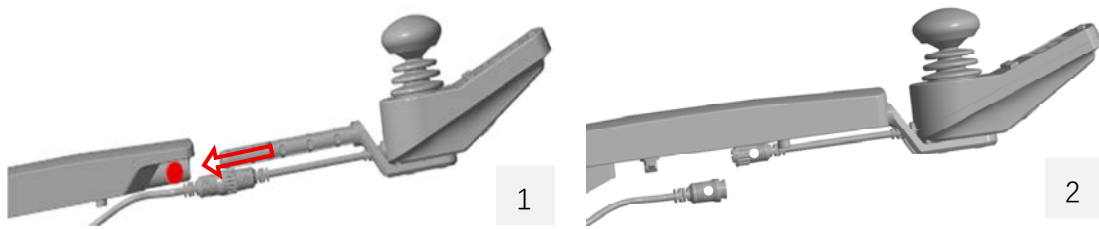

- Slide the joystick controller into the armrest tube until a comfortable arm length is achieved for the user (image 1).
- Align the grey points of the joystick connection cables and press them together to plug the joystick controller in (image 2).
- Rotate the coupling over the connection point to secure the connection point
- Make sure the quick-release pin locks into the tube to complete the fixing action.



SET UP

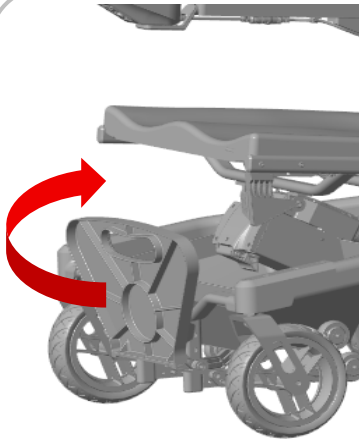

- Before sitting in the electric wheelchair, be sure the power button is OFF and the rear brake levers are in the locked position
- GRAND TOURER offers the user 2 optional entry alternatives, direct front entry or side entry
- For a front entry, we recommend flipping up the foot plate to create an easier sitting experience
- DO NOT step on the footplate when entering or exiting the GRAND TOURER as it may cause the power chair to move in an unsafe manner




- To enter on the side, lift the arm rest vertical to provide the required clearance
- To enter on the side, lift the arm rest vertical to provide the required clearance

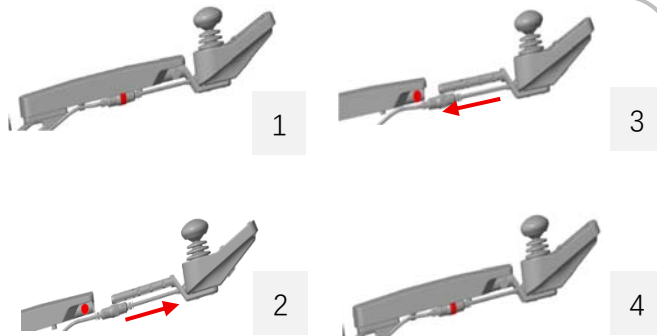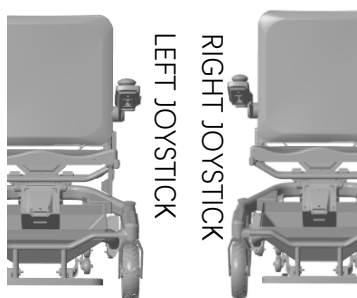

- Joysticks can be positioned on left or right arm rest
- Rotate the joystick connector to loosen it (Image 1).
- Pull up the quick-release pin to remove the joystick (Image 2).
- Insert the joystick fixing plate into the armrest tube on the other side. Adjust to the desired position and lock the quick-release pin (Image 3).
- Insert the joystick connector (Image 4) and rotate the locking ring to secure it. Ensure the quick-release pin is fully locked into the groove to complete the installation.
- Move the cable to the new side and secure it with ties. Make sure it doesn't block folding or movement, then reconnect the joystick.

CONTROLLER

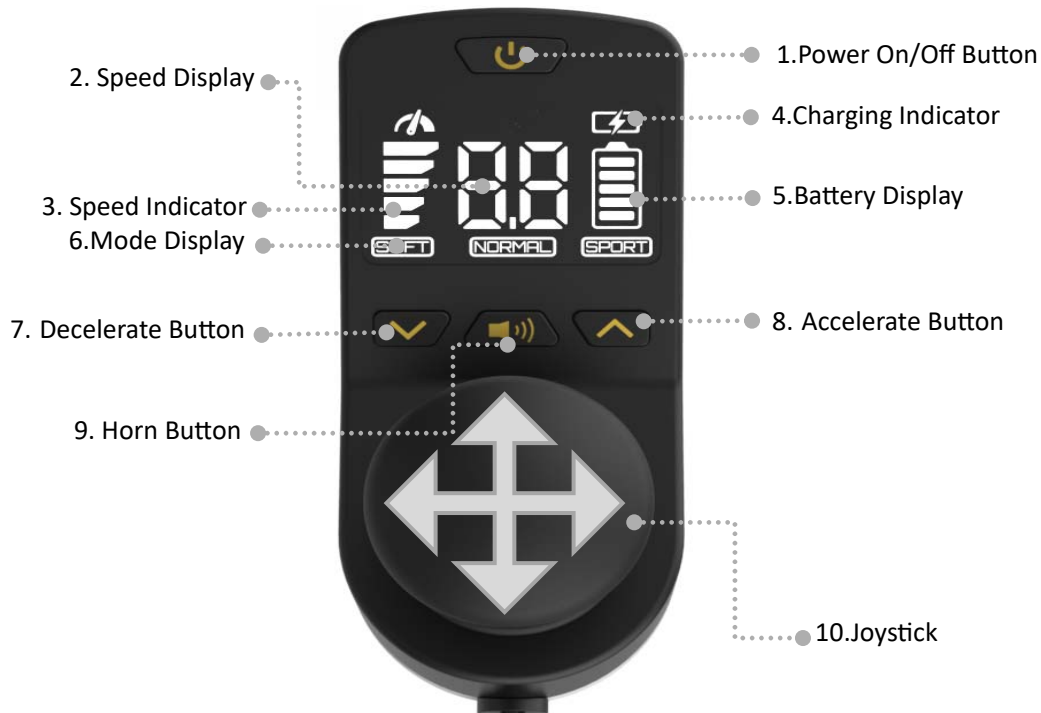

1. **Power On/Off Button** — Press this button briefly to power on the electric wheelchair and hold it down to power off.

2. **Speed Display** — Displays the current driving speed of the wheelchair in real time. As you accelerate or decelerate, the numbers on the screen will change accordingly, helping you easily monitor your current speed.

3. **Speed Indicator** — One bar represents the slowest speed, and five bars represent the fastest speed.

4. **Charging Indicator** — When the device is connected to the charger, the light will blink during charging; The indicator light will remain steadily on after charging is complete.

5. **Battery Display** — Displays the real-time battery level of the electric wheelchair.

6. **Mode Display** — There are a total of three modes: SOFT, NORMAL, SPORT.

7. **Decelerate Button** — Press this button to decrease speed. Hold the brake button down, and the driving mode of the wheelchair will cycle from SPORT to NORMAL, and finally to SOFT. You can adjust based on your preference.

8. **Accelerate Button** — Press this button to increase speed, with a maximum speed of 6 kilometers per hour. Hold the accelerate button down, and the driving mode will change from SOFT to NORMAL, and finally to SPORT.

9. **Horn Button** — Press this button to activate a beeping sound from the electric wheelchair to alert the surrounding environment.

10. **Joystick** — Controls the direction and speed of the electric wheelchair; push the joystick in the direction you wish to go.

CONTROLLER



11. **Type-C Power Supply Port** — Use a power cable with a 5V/2A output specification to connect mobile devices for charging.

12. **Wheelchair Charging Port**— You can charge the electric wheelchair here without removing the battery.

HOW-TO FEATURES



1



2

Backrest Height Adjustment

By loosening the four set screws on the top of the backrest (Image 1), the height of the backrest can be freely adjusted. The adjustable range is 100mm (Image 2).




3

Armrest Height Adjustment

By loosening the quick-release handle on one side of the armrest, you can freely adjust the height of the armrest easily, the adjustable range is 100mm, based on your preference (Image 3).




4

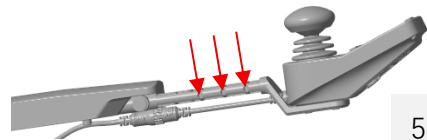

5

Joystick Forward and Backward Adjustment

Using the quick-release button located at the base of the armrest (Image 4), you can easily pull it to quickly adjust the armrest to three different positions (Image 5). The total adjustable range is 50mm.

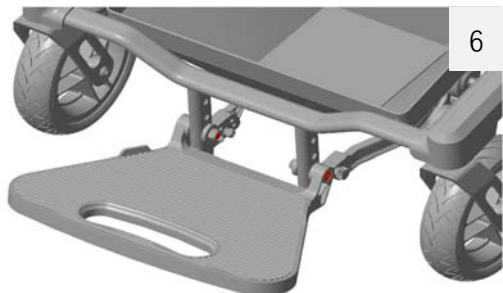

6


Footrest Height Adjustment

By loosening the two screws located at the footrest (Image 6), you can adjust the height of the footrest to three different levels. The adjustable range is 50mm.

⚠ WARNING: Always make certain the wheels are properly inserted back into position and that both the teeth of the locking plate and the locking pin are in place before using your Travel Buggy.


HOW-TO FEATURES

PUSH MODE

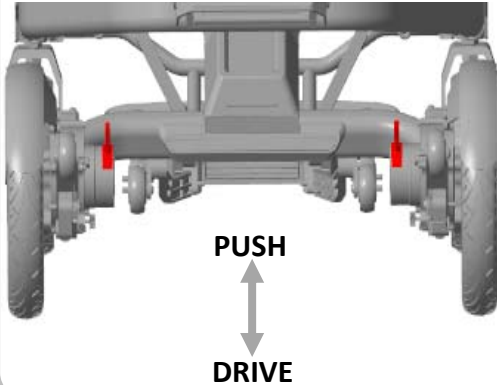


- In order to have a care giver push the Grand Tourer, it must be put in PUSH mode
- This mode disengages the drive mechanism to the wheels, making them free to push manually

LOWER ANTI-TIP WHEELS: Please ensure the anti-tip wheel brackets are in the lower position during use to help reduce the risk of tipping and improve overall safety.

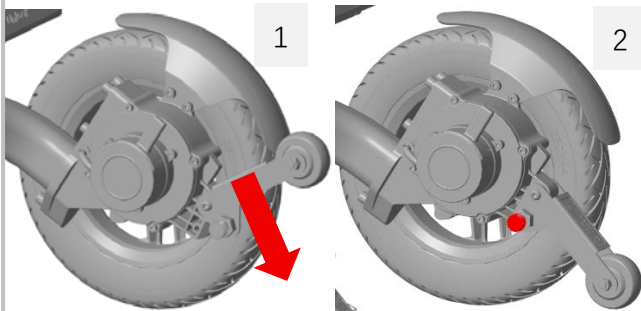

- Press the anti-tip wheel bracket downward; the spring pin will automatically slide into the built-in round recessed hole on the motor (Image 1).
- securely locking the anti-tip wheel into position (Image 2).

FOLD ANTI-TIP WHEELS

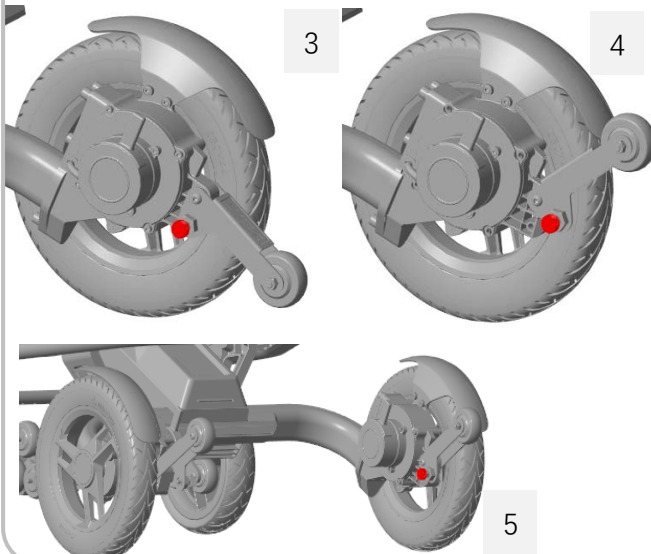

- Pull the anti-tip wheel unlock button (Image 3). The anti-tip wheel will automatically fold upward via the internal tension spring.
- It will then automatically lock into place through the spring mechanism within the unlock button (Image 4&5)

TRANSPORTING

Towing Function Guide

After folding the wheelchair, you can easily tow your electric wheelchair by following these steps:

1. Flip up the footrest (Image 1).
2. Grab the hollow part of the footrest (Image 2), and using the rear wheels, you can easily move your electric wheelchair.




TRANSPORTING


Trunk Loading Guide

After folding the wheelchair, you can easily load it into the trunk of your car by following these steps:



1. Move the electric wheelchair to the rear of your car's trunk (Image 1), ensuring that the crawling wheels are positioned close to the trunk.
2. For user convenience, the climbing wheels are designed with two adjustable positions to accommodate both sedans and full-size SUVs. You can select the appropriate angle based on the height of your vehicle's trunk.

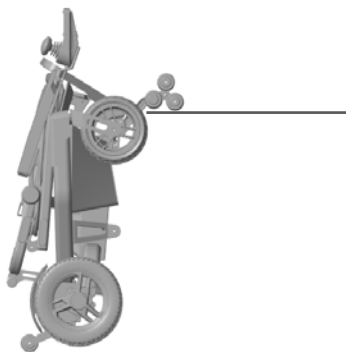

3. Pull the unlock pin to open the crawling wheels (Image 2, Image 3). The unlock pin has two different angles to accommodate different trunk heights. After adjusting to the first angle, you can continue adjusting to a larger angle.

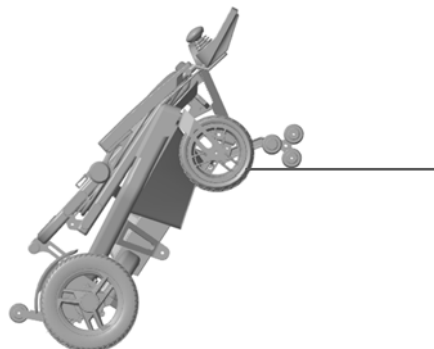

3. Grasp both sides of the bottom of the backrest tube (Figure 8.2.4) so that the crawling wheels contact the flat surface of your car. Then, hold both sides of the bottom of the backrest frame (Figure 8.2.5) and lift your electric wheelchair upwards. Push it towards the interior of your car's trunk to successfully load it into the trunk.

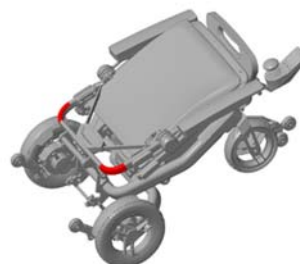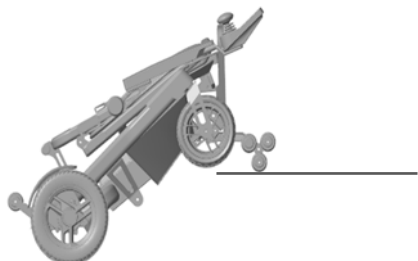

BATTERY MAINTENANCE

Lithium-Ion rechargeable batteries require routine maintenance and care in their use and handling. Read and follow the guidelines in this document to safely use Lithium-Ion batteries and achieve the maximum battery life span.

OVERVIEW

Do not leave batteries unused for extended periods of time, either in the product or in storage. When a battery has been unused for 6 months, check the charge status and charge or dispose of the battery as appropriate.

The typical estimated life of a Lithium-Ion battery is about 3 years or ~500 charge cycles, whichever occurs first. One charge cycle is a period of use from fully charged, to fully discharged, and fully recharged again. Use a three-year life expectancy for batteries that do not run through complete charge cycles.

Rechargeable Lithium-Ion batteries have a limited life and will gradually lose their capacity to hold a charge. This loss of capacity (aging) is irreversible. As the battery loses capacity, the length of time it will power the product (run time) decreases.

Lithium-Ion batteries continue to slowly discharge(self-discharge) when not in use or while in storage. Routinely check the battery's charge status.

Use only the supplied battery in your product.

Observe and note the time that a new fully charged battery provides for powering your product. Use this new battery run time as a basis to compare run times for older batteries. The running time of your battery will vary depending on the product's configuration and the applications that you run.

Routinely check the battery's charge status.

Carefully monitor batteries that are approaching the end of their estimated life.

Consider replacing the battery with a new one if you note either of the following conditions:

- The battery run time drops below about 80% of the original run time.
- The battery charge time increases significantly.

If a battery is stored or otherwise unused for an extended period, be sure to follow the storage instructions in this document. Not follow the instructions, and the battery has no charge remaining when you check it, consider it to be damaged. Do not attempt to recharge it or to use it. Replace it with a new battery.

CHARGING

Always follow the charging instructions provided with your product. Refer to your product's user manual and/or online help for detailed information about charging its battery.

Use only the supplied charger to charge your battery.

BATTERY MAINTENANCE

STORAGE

- Charge or discharge the battery to approximately 50% of capacity before storage.
- Charge the battery to approximately 50% capacity at least once every six months.
- Remove the battery and store it separately from the product.
- Store the battery at temperatures between 5 °C and 20 °C (41 °F and 68 °F).

HANDLING PRECAUTIONS

- Do not disassemble, crush, or puncture a battery.
- Do not short the external contacts on a battery.
- Do not expose a battery to fire or water.
- Do not expose a battery to temperatures above 60°C (140 °F).
- Keep the battery away from children.
- Avoid exposing the battery to excessive shock or vibration.
- Do not use a damaged battery.
- If a battery pack has leaking fluids, do not touch any fluids.
- Dispose of a leaking battery pack (see Disposal and Recycling in this document)
- In case of eye contact with fluid, do not rub eyes. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes, lifting upper and lower lids, until no evidence of the fluid remains. Seek medical attention.
- Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging or storing the battery, the battery emits

an unusual smell, feels hot, changes color, or shape, or appears abnormal in any way. Contact Travel Buggy if any of these problems are observed.

TRANSPORTATION

- Always check all applicable local, national and international regulations before transporting a Lithium-Ion battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

DISPOSAL AND RECYCLING

Lithium-Ion batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact Rechargeable Battery Recycling Corporation (www.rbrc.org) for U.S.A. and Canada, or your local battery recycling organization.



Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles.

Place only discharged batteries in a battery collection container. Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.

CHARGING

Battery Charging Methods

Grand Tourer is equipped with dual charging ports, located beneath the controller (Image 1) and at the bottom of the battery (Image 2). You can choose either charging method according to your needs.

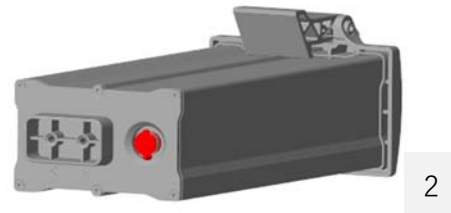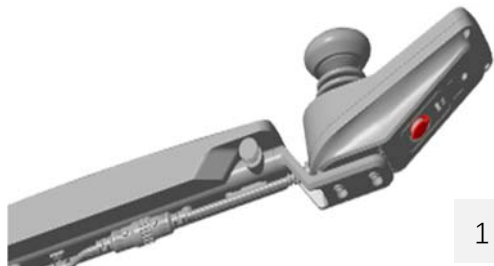

- Fully Charged
- Charging



- When charging, the indicator light on the power charger is red.
- After 6 to 7 hours of charging (depending on the remaining battery level), the indicator light will change from red to green, indicating that the battery is fully charged.
- To check your battery level, turn ON the joystick controller power.
- There are a total of five WHITE battery indicator lights.
- From top to bottom, the lights will gradually turn off as the battery drains, indicating the remaining charge.
- Recharge the battery before the last WHITE light turns off, as this indicates the battery is fully depleted.

MAINTENANCE, CARE, TROUBLESHOOTING

It is important to perform regular maintenance of your Grand Tourer for longevity and warranty eligibility. Even a little cleaning now and again will go a long way to keeping your device looking and functioning like new.

Certified repair shops with trained professionals who specialize in electric wheelchairs will be qualified to perform the service and maintenance on your Grand Tourer electric wheelchair should it be required. Please be sure to keep a log of the service and maintenance performed. Your shop or technician may require parts, which Travel Buggy has available.

We recommend you inspect your Grand Tourer two to three times per year for in the following areas:

Frame: Tighten loose screws as necessary using the tool kit included with your Grand Tourer

Wheels: Make sure they rotate easily

Significant resistance may require new bearings

Armrests: Look for excessive wear or if they are loose

Replacement parts and more major maintenance issues should be done by a professional. We do not recommend that you do intense types of maintenance work for the Grand Tourer yourself.

LUBRICATION

- According to use condition, please clean or lubricate the front axle, front fork and rotating parts after 180 days
- Molybdenum disulfide grease is recommended
- Your GRAND TOURER Power Wheelchair has electric hub motors that do not require lubrication, please do not lubricate the motors

Question	Possible Causes	Answer
Why is there NO POWER to the Grand Tourer?	<ul style="list-style-type: none">● Controller system power is not connected.● Controller system CPU and joystick are not connected.● Battery power is too low.	<ul style="list-style-type: none">● Connect the Battery.● Ensure all connections between Joystick, CPU and Battery are securely tightened.● Charge the Battery.
Why does my power chair beep and not move?	<ul style="list-style-type: none">● Freewheel mode engaged.● Capacity is reached.● Other error code.	<ul style="list-style-type: none">● Ensure the rear motor switches are in POWER mode, rear wheels should be locked.● Contact Travel Buggy if other error code present.

LIMITED WARRANTY

The purchaser of this product is entitled to a limited warranty as offered by Travel Buggy and its affiliates on the following components and timeframes from the date of purchase:

5 YEAR WARRANTY - Main Frame

2 YEAR WARRANTY - Motor

2 YEAR WARRANTY -Control System

1 YEAR WARRANTY -Battery

90 DAY LIMITED WARRANTY - On wear parts, such as the tires, armrest padding, joystick button covers, joystick knobs, seat cushion, and backrest padding.

This warranty is valid for the replacement of dysfunctional parts only. Any parts under warranty will be replaced and shipped to your door. Any service and labor fees, if applicable, to replace parts under warranty must be paid by the user.

Due to its straightforward design, most parts can be easily exchanged by the end user without a professional service tech required. However, it is always recommended you seek professional help with maintenance and service, to make sure the work is done properly.

The warranty only covers NON-DELIBERATE Damage.

The warranty does not cover:

- Products damaged by user negligence.
- Products were damaged accidentally.
- Products damaged intentionally.
- Products that have been subjected to negligence.
- Products that have been subjected to abuse.
- Products that have been improperly stored.
- Products that have been improperly handled.
- Products that have been improperly operated.
- Products that have experienced general misuse.
- Products that have been modified in an unauthorized, unapproved way.

The warranty is non-transferable and only valid for the original wheelchair purchaser.

Travel Buggy will, at its sole discretion, replace any warrantable item that fails within the warranty period.

CONTACT & SUPPORT

You will find the operation and care of your Grand Tourer very simple and easy, but should you have any questions please contact Travel Buggy.

OUR CUSTOMER HOTLINE

Canada: 1.888.56.BUGGY (28449)

USA: 1.855.56.BUGGY (28449)

EMAIL

contact@travelbuggy.com

Additional images and videos are available on our website.

OUR WEBSITE

Canada: www.travelbuggy.com

USA: us.travelbuggy.com

TABLE DE MATIÈRES

NOTICES	3	TRANSPORT	18
INFORMATION DE LA SÉCURITÉ	4	ENTRETIEN DE LA BATTERIE	20
INFORMATION DE LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE	5	RECHARGEMENT	22
SPECIFICATIONS	7	ENTRETIEN, SOIN, DÉPANNAGE	23
DÉBALLAGE	9	GARANTIE LIMITÉE	24
DÉPLOIEMENT	10	CONTACT & SUPPORT	25
MÉTHODE DE PLIAGE	11		
INSTALLATION	12		
CONTRÔLEUR	14		
FONCTIONNALITÉS			
REGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER	16		
REGLAGE DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS	16		
REGLAGE DU JOYSTICK VERS L'AVANT ET VERS L'ARRIÈRE	16		
REGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS	16		
ROUE	17		

REMARQUES

Merci d'avoir choisi GRAND TOURER de Travel Buggy, un fauteuil électrique pliable et pratique à utiliser.

Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser votre GRAND TOURER pour vous familiariser avec ses fonctionnalités ainsi que ses limitations et informations de sécurité.

L'utilisation et la maintenance de votre GRAND TOURER sont conçues pour être simples et sans tracas. Cependant, si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à Travel Buggy.

NOTRE HOTLINE CLIENT

Canada: 1.888.56. BUGGY (28449)

Etats-unis: 1.855.56. BUGGY (28449)

COURRIEL

contact@travelbuggy.com



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Les notes, avertissements et mises en garde contenus dans le manuel et marqués par le symbole triangulaire de précaution doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les utilisateurs doivent également accorder une attention particulière aux informations marquées dans ce manuel en commençant par **REMARQUE**.

Travel Buggy, ses filiales et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du fonctionnement ou de l'entretien dangereux ou incorrect du fauteuil roulant électrique Grand Tourer.

Dans le cadre de notre initiative d'amélioration continue des produits, Travel Buggy se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. En conséquence, il peut y avoir des différences mineures entre votre HELIX et les photos, illustrations et instructions de ce manuel.

INFORMATION SUR LA SECURITÉ

- IL FAUT assurez que le siège est en position verrouillée lorsque vous utilisez votre GRAND TOURER
- IL FAUT que vous réduisiez la vitesse de Grand Tourer lorsque vous conduisez dans un virage
- IL FAUT que vous soyez prudent lorsque vous approchez de la descente d'une rampe ou d'une autre pente et lorsque vous conduisez à proximité d'une surface surélevée ou de rebords et de dénivelés non protégés (trottoirs, porches, escaliers, etc.)
- IL FAUT éviter l'exposition à la pluie, à la neige, à la glace, au sel ou à l'eau stagnante, dans la mesure du possible
- IL FAUT conserver et stocker dans un endroit propre et sec
- IL FAUT gardez vos mains loin des pneus lorsque vous conduisez. Attention : les vêtements amples peuvent se coincer dans les pneus.
- IL FAUT tenir les outils et autres objets métalliques éloignés des bornes de la batterie. Le contact avec les outils peut provoquer un choc électrique.
- IL FAUT respecter la capacité de poids recommandée (300 lb / 136 kg)
- IL FAUT respecter la pente d'inclinaison recommandée (10 degrés)
- IL FAUT vérifiez la charge de la batterie pour vous assurer qu'elle est suffisamment chargée pour atteindre votre destination avant de l'utiliser.
- IL FAUT assurez-vous que l'alimentation de votre Grand Tourer est coupée lorsque vous entrez et sortez du fauteuil roulant électrique
- NE conduisez PAS votre Grand Tourer sur le flanc d'une colline ou en diagonale vers le haut ou vers le bas d'une colline, et ne vous arrêtez pas (si possible) pendant que vous montez ou descendez une pente
- N'utilisez PAS votre nouveau GRAND TOURER pour la première fois sans avoir lu et compris complètement le manuel du propriétaire
- NE transportez PAS des passagers supplémentaires lors de votre GRAND TOURER
- N'utilisez PAS votre GRAND TOURER comme siège dans un véhicule en mouvement
- NE permettez PAS aux enfants sans surveillance de jouer à proximité du fauteuil roulant électrique
- NE conduisez PAS votre Grand Tourer sous l'influence de l'alcool, car cela peut nuire à votre capacité à conduire en toute sécurité
- N'asseyez PAS dans le Grand Tourer pendant que vous êtes dans un véhicule en mouvement, car un accident ou un arrêt brusque peut vous faire éjecter du fauteuil roulant électrique et compromettre le loquet de verrouillage du siège
- TOUT entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Toute modification non autorisée du fauteuil roulant électrique, de son système d'alimentation ou de son système de commande peut compromettre ses performances et sa sécurité. Vous ne devez EN AUCUN CAS tenter une réparation ou un entretien non décrit dans ce manuel.
- TOUJOURS assurez-vous que toutes les étiquettes d'avertissement de sécurité sont en place et lisibles.

AVERTISSEMENT : L'opérateur doit lire tous les panneaux d'avertissement et instructions ici et sur le fauteuil roulant électrique avant utilisation. Vous ne devez pas utiliser votre fauteuil motorisé dans les rues et routes publiques. Sachez qu'il peut être difficile pour la circulation de vous voir lorsque vous êtes assis sur votre fauteuil roulant électrique. Respectez toutes les règles locales de circulation des piétons. Attendez que votre chemin soit dégagé de toute circulation, puis procédez avec une extrême prudence.

INFORMATION SUR LA SECURITÉ DE LA BATTERIE

LORS DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

Les batteries au lithium-ion peuvent devenir chaudes, exploser ou s'enflammer et provoquer des blessures graves si elles sont exposées à des conditions abusives. Assurez-vous de suivre les avertissements de sécurité répertoriés ci-dessous :

1. Ne placez pas la batterie près du feu et ne chauffez pas la batterie.

- N'installez pas la batterie à l'envers afin que la polarité soit inversée
- Ne connectez pas les bornes positive et négative de la batterie entre elles avec un objet métallique (comme un fil)
- Ne transportez pas et ne rangez pas la batterie avec des colliers, des épingles à cheveux ou d'autres objets métalliques.
- Ne percez pas la batterie avec des clous, ne frappez pas la batterie avec un marteau, ne marchez pas sur la batterie et ne la soumettez pas à des impacts ou des chocs violents.
- Ne pas souder directement sur la batterie
- N'exposez pas la batterie à l'eau ou à l'eau salée, et ne laissez pas la batterie se mouiller.

2. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent provoquer une génération de chaleur, une explosion ou un incendie.

3. Ne placez pas la batterie dans ou à proximité d'un feu, sur des cuisinières

ou dans d'autres endroits à haute température. Ne placez pas la batterie à la lumière directe du soleil, et n'utilisez pas ou ne stockez pas la batterie à l'intérieur des voitures par temps chaud. Cela pourrait provoquer une production de chaleur, une explosion ou un incendie de la batterie. Utiliser la batterie de cette manière peut également entraîner une perte de performances et une durée de vie réduite.

4. Si l'appareil doit être utilisé par des enfants, le soignant doit expliquer le contenu de ce document aux enfants et assurer une supervision adéquate pour garantir que l'appareil est utilisé de manière appropriée.

5. Lorsque la batterie est usée, isolez les bornes avec du ruban adhésif ou un matériau similaire avant de la jeter

6. Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si, pendant l'utilisation, le chargement ou le stockage de la batterie, la batterie dégage une odeur inhabituelle, est chaude, change de couleur ou de forme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Contactez le service d'incendie si l'un de ces problèmes est observé

7. Ne placez pas la batterie au micro-ondes, au-dessus de récipients à haute pression ou sur des ustensiles de cuisine à induction.

8. Précautions de chargement

9. Assurez-vous de suivre les avertissements répertoriés ci-dessous lors du chargement de la batterie. Dans le cas contraire, la batterie pourrait devenir chaude, exploser ou s'enflammer et provoquer des blessures graves.

INFORMATION DE LA SÉCURITÉ SUR LA BATTERIE

PRÉCAUTIONS DE CHARGE



1. ASSUREZ-VOUS de suivre les avertissements ci-dessous lors de la charge de la batterie. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une surchauffe, une explosion ou une inflammation de la batterie, pouvant causer des blessures graves :
 - Lors de la charge de la batterie, UTILISEZ UNIQUEMENT LE CHARGEUR SPÉCIFIÉ FOURNI AVEC LE PRODUIT
 - NE BRANCHEZ PAS la batterie directement à une prise d'alimentation ou à l'allume-cigare d'une voiture
 - NE PLACEZ PAS la batterie près du feu ou en plein soleil. Chauffer la batterie peut endommager le circuit de sécurité, ce qui peut entraîner une surchauffe, une rupture ou une inflammation de la batterie
2. N'ESSAYEZ PAS de continuer à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans les délais spécifiés dans le manuel d'utilisation
3. LA PLAGE DE TEMPÉRATURE à laquelle la batterie peut être chargée est de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F). Charger la batterie en dehors de cette plage peut causer de graves dommages à la batterie ou réduire sa durée de vie.

LORS DE LA DÉCHARGE DE LA BATTERIE

1. N'UTILISEZ PAS la batterie avec un autre appareil que le HELIX. L'utilisation de la batterie dans des appareils autres que le GRAND TOURER peut entraîner des dommages ou une réduction de sa durée de vie.

De plus, un flux de courant anormal causé par d'autres appareils peut entraîner une surchauffe de la batterie, pouvant provoquer une explosion, une inflammation et des blessures graves.
2. LA PLAGE DE TEMPÉRATURE dans laquelle la batterie peut être déchargée est de -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F). L'utilisation de la batterie en dehors de cette plage de température peut nuire à ses performances ou réduire sa durée de vie.

SPECIFICATIONS

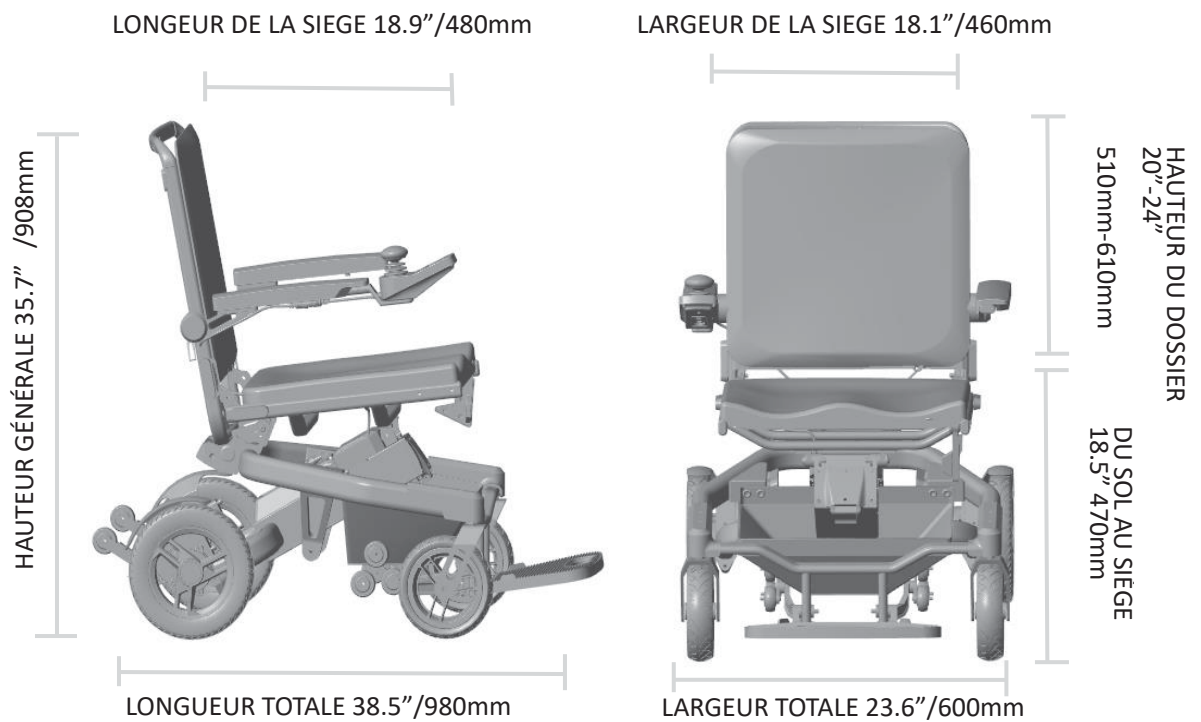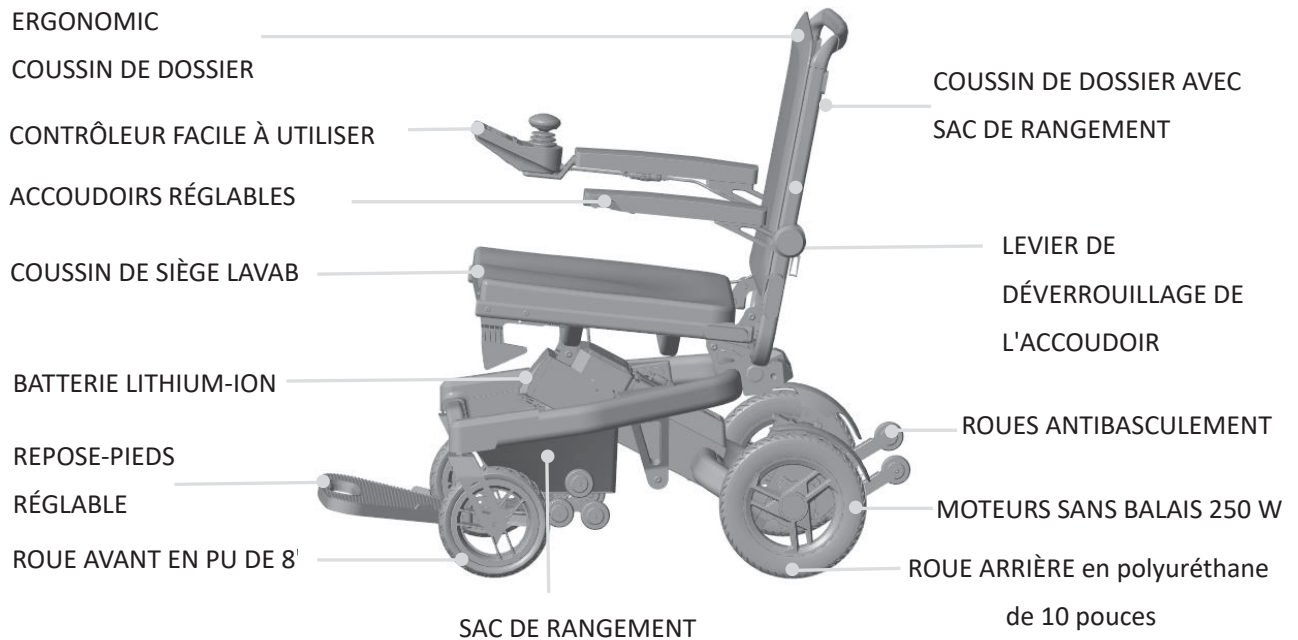

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS PERFORMANCE

AUTONOMIE: 15.53MI/25KM

VITESSE MAXIMUM: 3.73MPH/6KPH

SYSTÈME DE CONDUITE:

TWO MOTOR DRIVE SYSTEM

TYPE DE MOTEUR :250 WATT BRUSHLESS

CAPACITÉ D'INCLINAISON :10°

RAYON DE BRAQUAGE:31.5"/800mm

DISTANCE D'ARRÊT:3.28FT/1m

(AT FULL SPEED)

FRANCHISSEMENT

D'OBSTACLES :1.57"/40mm

SYSTEME DE FREIN: ELECTROMAGNETIC

MAXIMUM CAPACITÉ DU POIDS :

300LBS/136KG

SPECIFICATIONS DIMENSIONELLE

DIMENSIONS DÉPLIÉ : 38.5" *23.6"*35.7"

980mm*600mm*908mm

POIDS BRUT DE LA CHAISE : 55LBS / 25KG

POIDS NET DE LA CHAISE: 50.7LBS /23KG

(NO BATTERY)

TAILLE DE COUSSIN DE LA SIÈGE :

18" (W)*18(D)" / 450mm(W)*450mm(D)

DIMENSIONS PLIÉES : 29.5" *23.6"*13.8"

/750mm*600mm*350mm

LAGEUR DES ASSISE:18.11"/460mm

DIAMÈTRE DE LA ROUE AVANT : 8"

DIAMÈTRE DE LA ROUE ARRIÈRE : 10"

HAUTEUR DU SIÈGE PAR RAPPORT AU SOL :

18.5"/470mm

HAUTEUR DU DOSSIER:

19.7"/21.65"/23.62"/500mm/550mm/600mm

AUTRES SPECIFICATIONS

TYPE DE LA BATTERIE : Lithium-Ion(24VX12AH)

BATTERIE FOURNIE:ONE (1)

BATTERIE WATT HEURE:288WH

CYCLES DE LA CHARGE DE LA BATTERIE : ~500

PNEAU: PU

TEMPS DE CHARGE:6 TO 7 HOURS

ENTRÉE DU CHARGEUR :100-240V,50/60HZ


(INTERNATIONAL)

SORTIE DU CHARGEUR :24V 2.0A

CEINTURE: FOURNI

KLAXON: CONSTRUIT

DÉBALLAGE

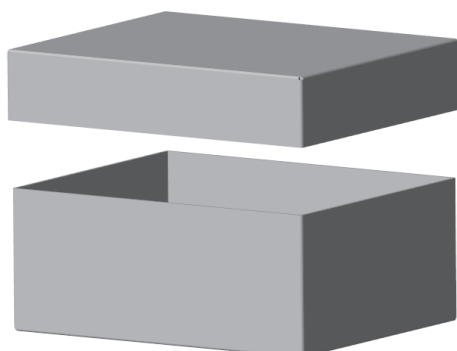


- Pour retirer le fauteuil roulant électrique, orientez la boîte de manière à ce qu'elle soit posée sur le sol.
- Saisissez le haut et commencez à tirer votre Grand Tourer horizontalement parallèlement au sol.

- Localisez les composants fournis avec votre fauteuil roulant électrique



COUSSIN DE LA SIÈGE

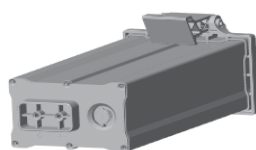

BATTERIE LITHIUME



MANETTE



CHARGEUR DE LA
BATTERIE




OUTIL KIT



OUTIL

DÉBALLAGE

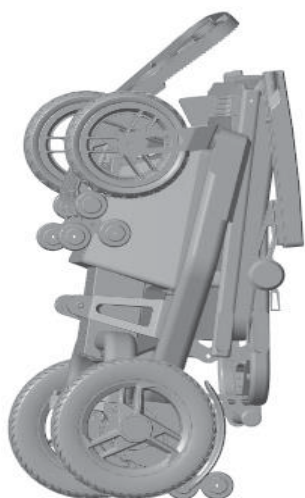

1- Soulevez le repose-pieds et tirez le verrou de sécurité vers le haut pour déverrouiller la chaise.



2- Dépliez le fauteuil roulant vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est verrouillé en place.



3- Abaissez le support de roue anti-basculement, terminez le déverrouillage du fauteuil roulant.

⚠ REMARQUE : Le fait de ne pas déployer complètement le fauteuil électrique dans sa position verrouillée peut entraîner des blessures pendant la conduite..


PLIAGE



1- Soulevez les deux accoudoirs et les supports de roues anti-basculement vers le haut.




2- Tirez la poignée de déverrouillage et poussez le fauteuil roulant vers l'avant.

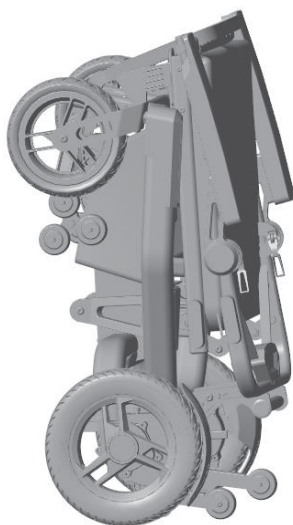


3- Jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est verrouillé en place.

INSTALLATION

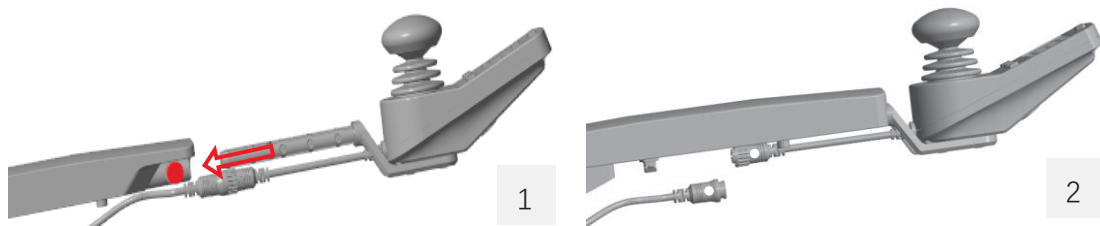

- Faites glisser le joystick dans le tube de l'accoudoir jusqu'à ce qu'une longueur de bras confortable soit obtenue pour l'utilisateur. (image 1).
- Alignez les points gris des câbles de connexion du joystick et appuyez dessus pour brancher le contrôleur du joystick (image 2).
- Faites pivoter le raccord sur le point de connexion pour sécuriser le point de connexion
- Assurez-vous que la goupille à dégagement rapide se verrouille dans le tube pour terminer l'action de fixation.


INSATALLATION

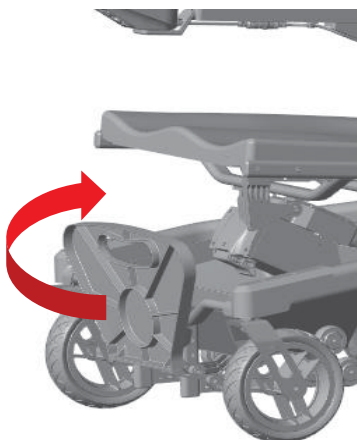

- Avant de vous asseoir dans le fauteuil roulant électrique, assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint et que les leviers de frein arrière sont en position verrouillée
- GRAND TOURER offre à l'utilisateur 2 alternatives d'entrée optionnelles, entrée frontale directe ou entrée latérale
- Pour une entrée par l'avant, nous recommandons de relever le repose-pieds pour créer une expérience d'assise plus facile.
- NE PAS marcher sur le repose-pieds en entrant ou en sortant du GRAND TOURER car cela pourrait entraîner un déplacement dangereux du fauteuil



- Pour entrer sur le côté, soulevez l'accoudoir verticalement pour fournir le jeu requis
- Pour entrer sur le côté, soulevez l'accoudoir verticalement pour fournir le jeu requis

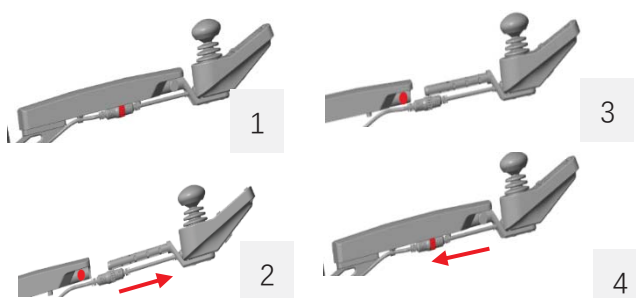

- Les joysticks peuvent être positionnés sur l'accoudoir gauche ou droit
- Faites tourner le connecteur du joystick pour le desserrer (Image 1).
- Tirez sur la goupille de dégagement rapide pour retirer le joystick (Image 2).
- Insérez la plaque de fixation du joystick dans le tube de l'accoudoir, de l'autre côté. Réglez la position souhaitée et verrouillez la goupille de serrage rapide. (Image 3).
- Insérez le connecteur du joystick (image 4) et faites tourner la bague de verrouillage pour le fixer. Assurez-vous que la goupille de déverrouillage rapide est bien enclenchée dans la rainure pour terminer l'installation.
- Déplacez le câble vers le nouveau côté et fixez-le avec des attaches. Assurez-vous qu'il ne bloque pas le pliage ou le mouvement, puis reconnectez le joystick.

CONTRÔLEUR



1. **Mise sous/hors tension** — Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer le fauteuil roulant électrique et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.

2. **Affichage de la vitesse** — Affiche la vitesse de déplacement du fauteuil roulant en temps réel. À chaque accélération ou décélération, les valeurs affichées à l'écran s'adaptent, vous permettant de contrôler facilement votre vitesse.

3. **Indicateur de la vitesse**— Une barre représente la vitesse la plus lente et cinq barres représentent la vitesse la plus rapide.

4. **Indicateur de la charge**— Lorsque l'appareil est connecté au chargeur, le voyant clignote pendant la charge ; le voyant reste allumé en continu une fois la charge terminée.

5. **Affichage de la batterie** — Affiche le niveau de batterie en temps réel du fauteuil roulant électrique.

6. **Affichage de la mode**— Il existe au total trois modes : DOUX, NORMALE, SPORT.

7. **Bouton de ralentir**— Appuyez sur ce bouton pour diminuer la vitesse. Maintenez le bouton de frein enfoncé et le fauteuil roulant passera du mode de conduite SPORT au mode NORMAL, puis au mode DOUX. Vous pouvez l'ajuster selon vos préférences.

8. **Bouton d'accélération** — Appuyez sur ce bouton pour augmenter la vitesse, jusqu'à une vitesse maximale de 6 kilomètres par heure. Maintenez le bouton d'accélération enfoncé et le mode de conduite passe de « SOFT » à « NORMAL », puis à « SPORT ».

9. **Bouton de Klaxon** — Appuyez sur ce bouton pour activer un bip sonore du fauteuil roulant électrique pour alerter l'environnement environnant.

10. **Manette** — Contrôle la direction et la vitesse du fauteuil roulant électrique ; poussez le joystick dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller.

CONTRÔLEUR



11. **Port d'alimentation de type C** — Utilisez un câble d'alimentation avec une spécification de sortie 5 V/2 A pour connecter des appareils mobiles pour le chargement.

12. **Port de chargement du fauteuil roulant** — Vous pouvez charger le fauteuil roulant électrique ici sans retirer la batterie.

FONCTIONALITÉ



1



2

Réglage de la hauteur du dossier

En desserrant les quatre vis de réglage situées sur le dessus du dossier (image 1), la hauteur du dossier peut être réglée librement. La plage de réglage est de 100 mm (image 2).




3

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

En desserrant la poignée à dégagement rapide sur un côté de l'accoudoir, vous pouvez régler librement la hauteur de l'accoudoir facilement, la plage de réglage est de 100 mm. en fonction de vos préférences (Image 3).



4

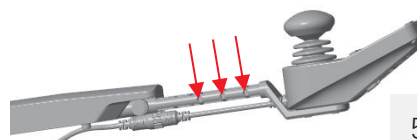

5

Réglage du joystick vers l'avant et vers l'arrière

Grâce au bouton de déverrouillage rapide situé à la base de l'accoudoir (image 4), vous pouvez facilement le tirer pour régler rapidement l'accoudoir sur trois positions différentes (image 5). La plage de réglage totale est de 50 mm.




6

Réglage de la hauteur du repose-pieds

En desserrant les deux vis situées sur le repose-pieds (image 6), vous pouvez régler la hauteur du repose-pieds sur trois niveaux différents. La plage de réglage est de 50 mm.


FONCTIONALITÉ

MODE POUSSER

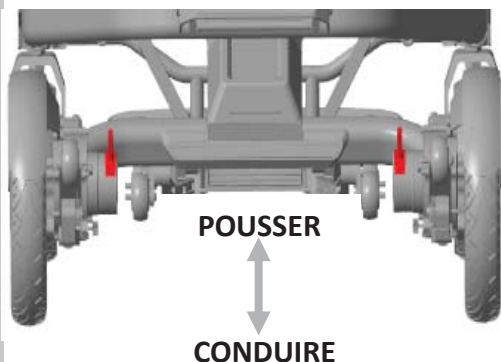


- Pour qu'un aidant puisse pousser le Grand Tourer, il faut le mettre en mode POUSSER.
- Ce mode désengage le mécanisme d'entraînement des roues, les libérant ainsi pour la poussée manuelle.

ROUES INFÉRIEURES ANTIBASCULEMENT : Veuillez-vous assurer que les supports de roues anti-basculement sont en position basse pendant l'utilisation pour aider à réduire le risque de basculement et améliorer la sécurité globale.

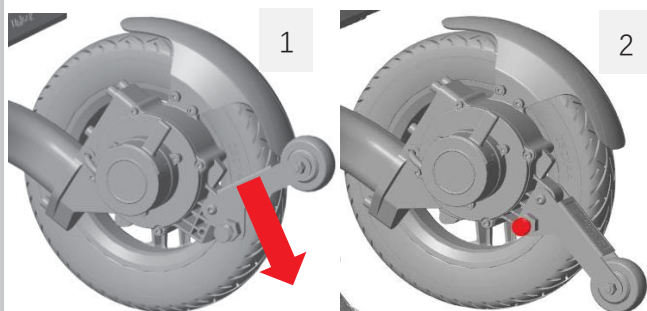

- Appuyez sur le support de la roue anti-basculement vers le bas ; la goupille à ressort glissera automatiquement dans le trou rond encastré intégré au moteur (image 1).
- Verrouillez solidement la roue anti-basculement en position (image 2).

FO ROUES ANTIBASCULEMENT PLIABLES

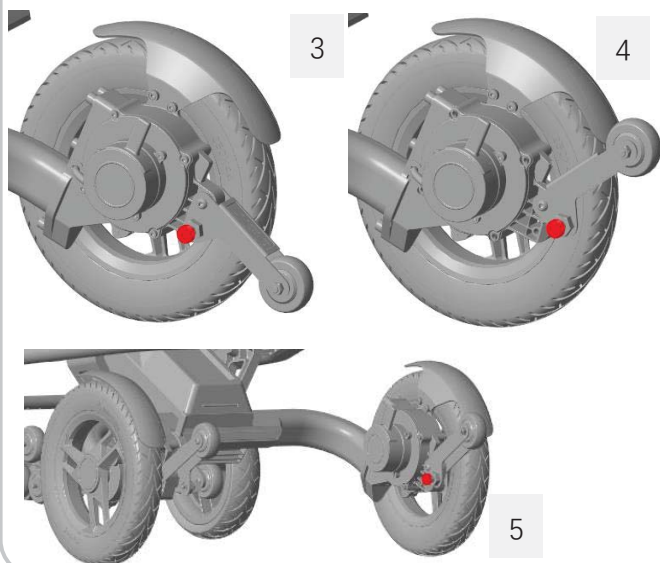


- Tirez sur le bouton de déverrouillage de la roue anti-basculement (image 3). La roue anti-basculement se replie automatiquement vers le haut grâce au ressort de tension interne.
- Elle se verrouille ensuite automatiquement grâce au mécanisme à ressort du bouton de déverrouillage (images 4 et 5).

TRANSPORT

Guide des fonctions de remarque

Après avoir plié le fauteuil roulant, vous pouvez facilement remorquer votre fauteuil roulant électrique en suivant ces étapes :

1. Relevez le repose-pieds (image 1).
2. Saisissez la partie creuse du repose-pieds (Image 2) et, à l'aide des roues arrière, vous pouvez facilement déplacer votre fauteuil roulant électrique.

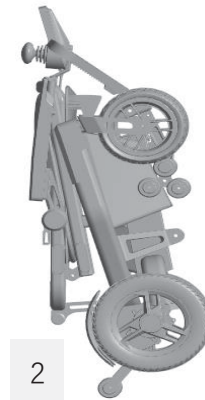


TRANSPORT


Guide de chargement du coffre

Après avoir plié le fauteuil roulant, vous pouvez facilement le charger dans le coffre de votre voiture en suivant ces étapes :



1. Déplacez le fauteuil roulant électrique vers l'arrière du coffre de votre voiture (Image 1), en vous assurant que les roues rampantes sont positionnées près du coffre.
2. Pour plus de confort, les roues d'escalade sont conçues avec deux positions réglables pour s'adapter aussi bien aux berlines qu'aux SUV. Vous pouvez choisir l'angle approprié en fonction de la hauteur du coffre de votre véhicule.

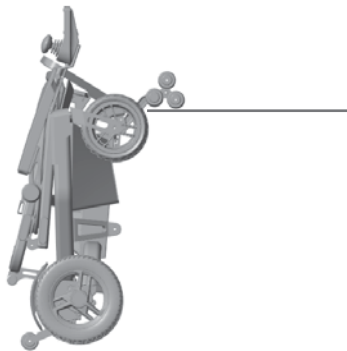

3. Tirez sur la goupille de déverrouillage pour ouvrir les roues rampantes (Image 2, Image 3). La goupille de déverrouillage présente deux angles différents pour s'adapter à différentes hauteurs de tronc. Après avoir ajusté le premier angle, vous pouvez continuer à ajuster l'angle à un angle plus grand.

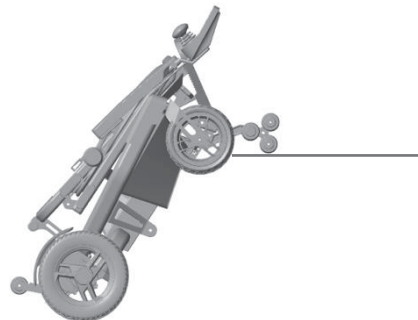

3. Saisissez les deux côtés du tube du dossier (Figure 8.2.4) de manière à ce que les roulettes soient en contact avec la surface plane de votre voiture. Ensuite, tenez les deux côtés du cadre du dossier (Figure 8.2.5) et soulevez votre fauteuil roulant électrique. Poussez-le vers l'intérieur du coffre pour le charger.

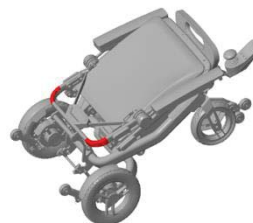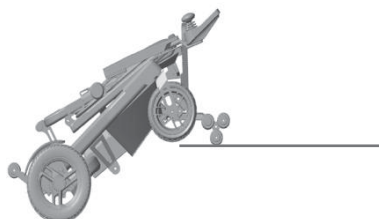

ENTRETIEN DE BATTERIE

Les batteries lithium-ion rechargeables nécessitent un entretien régulier et une manipulation soignée. Lisez et suivez les instructions de ce document pour utiliser les batteries lithium-ion en toute sécurité et maximiser leur durée de vie.

APERÇU

Ne laissez pas les batteries inutilisées pendant une période prolongée, que ce soit dans le produit ou lors de leur stockage. Après 6 mois d'inutilisation, vérifiez l'état de charge et chargez-la ou jetez-la selon le cas.

La durée de vie typique d'une batterie lithium-ion est d'environ 3 ans ou environ 500 cycles de charge, selon la première éventualité. Un cycle de charge correspond à une période d'utilisation allant d'une charge complète à une décharge complète, puis à une recharge complète. Prévoyez une durée de vie de trois ans pour les batteries qui ne réalisent pas de cycles de charge complets.

Les batteries lithium-ion rechargeables ont une durée de vie limitée et perdent progressivement leur capacité à maintenir la charge. Cette perte de capacité (vieillesse) est irréversible. À mesure que la batterie perd de sa capacité, son autonomie diminue.

Les batteries lithium-ion continuent de se décharger lentement (autodécharge) lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou stockées. Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.

Utilisez uniquement la batterie fournie dans votre produit.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Observez et notez l'autonomie d'une batterie neuve complètement chargée pour alimenter

votre produit. Utilisez cette autonomie comme base pour comparer l'autonomie d'anciennes batteries. L'autonomie de votre batterie varie en fonction de la configuration du produit et des applications que vous utilisez.

Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.

Surveillez attentivement les batteries qui approchent de la fin de leur durée de vie estimée.

Envisagez de remplacer la batterie par une neuve si vous constatez l'une des situations suivantes :

- L'autonomie de la batterie chute en dessous d'environ 80 % de l'autonomie d'origine.
- Le temps de charge de la batterie augmente considérablement.

Si une batterie est stockée ou inutilisée pendant une période prolongée, veillez à suivre les instructions de stockage de ce document. Si vous ne suivez pas ces instructions et que la batterie est déchargée lors de la vérification, considérez-la comme endommagée. N'essayez pas de la recharger ou de l'utiliser. Remplacez-la par une batterie neuve.

CHARGE

Suivez toujours les instructions de charge fournies avec votre produit. Consultez le manuel d'utilisation de votre produit et/ou l'aide en ligne pour obtenir des informations détaillées sur le chargement de sa batterie.

Use only the supplied charger to charge your battery.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

STOCKAGE

- Chargez ou déchargez la batterie à environ 50 % de sa capacité avant de la ranger.
- Chargez la batterie à environ 50 % de sa capacité au moins une fois tous les six mois.
- Retirez la batterie et rangez-la séparément du produit.
- Stockez la batterie à une température comprise entre 5 °C et 20 °C (4 °F et 68 °F).

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

- Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la batterie.
- Ne court-circuitez pas les contacts externes de la batterie.
- N'exposez pas la batterie au feu ou à l'eau.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Évitez d'exposer la batterie à des chocs ou vibrations excessifs.
- N'utilisez pas une batterie endommagée.
- Si une batterie présente une fuite, ne la touchez pas.
- Jetez la batterie qui fuit (voir la section « Élimination et recyclage » dans ce document).
- En cas de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures, jusqu'à disparition complète du liquide.

Consultez un **médecin**.

- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si, lors de son utilisation, de sa charge ou de son stockage, elle émet des vapeurs.

une odeur inhabituelle, une sensation de chaleur, un changement de couleur ou de forme, ou une apparence anormale.

Contactez Travel Buggy si vous constatez l'un de ces problèmes.

TRANSPORTATION

- Vérifiez toujours toutes les réglementations locales, nationales et internationales applicables avant de transporter une batterie lithium-ion.
- Le transport d'une batterie en fin de vie, endommagée ou rappelée peut, dans certains cas, être spécifiquement limité ou interdit.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Les batteries lithium-ion sont soumises à des réglementations en matière d'élimination et de recyclage qui varient selon les pays et les régions. Veuillez toujours vérifier et respecter la réglementation en vigueur avant de jeter une batterie. Contactez la Rechargeable Battery Recycling Corporation (www.rbrc.org) pour les États-Unis et le Canada, ou votre organisme local de recyclage de batteries.

De nombreux pays interdisent la mise au rebut des équipements électroniques usagés dans les poubelles standard.

Ne déposez que les piles usagées dans un conteneur de collecte. Utilisez du ruban isolant ou un autre matériau de protection homologué sur les points de connexion des piles pour éviter les courts-circuits.


RECHARGEMENT

Méthode de rechargement de la batterie

Le Grand Tourer est équipé de deux ports de charge, situés sous la manette (image 1) et sous la batterie (image 2). Vous pouvez choisir l'une ou l'autre méthode de charge selon vos besoins.



1

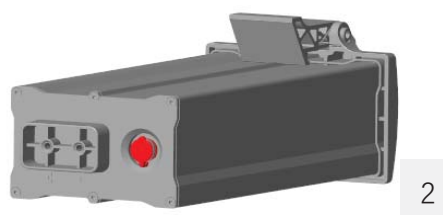

2



● Fully Charged

● Charging



RECHARGEMENT
DE LA BATTERIE
EST SUR LE
CONTRÔLEUR DE
LA MANETTE

- Pendant la charge, le voyant du chargeur est rouge.

- Après 6 à 7 heures de charge (selon le niveau de batterie restant), le voyant passe du rouge au vert, indiquant que la batterie est complètement chargée.

- Pour vérifier le niveau de batterie, allumez le joystick.

- Il y a cinq voyants de batterie BLANCS.

- De haut en bas, les voyants s'éteignent progressivement à mesure que la batterie se décharge, indiquant la charge restante.

- Rechargez la batterie avant que le dernier voyant BLANC ne s'éteigne, car cela indique que la batterie est complètement déchargée.

ENTRETIEN, SOIN, DEPANAGE

Il est important d'entretenir régulièrement votre Grand Tourer pour garantir sa longévité et bénéficier de la garantie. Un simple nettoyage de temps en temps contribuera grandement à préserver l'aspect et le fonctionnement de votre appareil.

Des ateliers de réparation agréés, composés de professionnels formés et spécialisés dans les fauteuils roulants électriques, sont qualifiés pour effectuer l'entretien et la maintenance de votre Grand Tourer si nécessaire. Veuillez conserver un journal des entretiens et des maintenances effectués. Votre atelier ou votre technicien pourrait avoir besoin de pièces détachées, disponibles chez Travel Buggy.

Nous vous recommandons d'inspecter votre Grand Tourer deux à trois fois par an pour les points suivants :

Châssis : Resserrez les vis desserrées si nécessaire à l'aide de la trousse à outils fournie avec votre Grand Tourer.

Roues : Assurez-vous qu'elles tournent facilement. Une résistance importante peut nécessiter de nouveaux roulements.

Accoudoirs : Vérifiez leur usure excessive ou leur desserrage.

Le remplacement des pièces et les opérations d'entretien plus importantes doivent être confiés à un professionnel. Nous vous déconseillons d'effectuer vous-même des travaux d'entretien intensifs sur le Grand Tourer.

LUBRIFICATION

- Selon les conditions d'utilisation, veuillez nettoyer ou lubrifier l'essieu avant, la fourche avant et les pièces rotatives tous les 180 jours.
- Une graisse au bisulfure de molybdène est recommandée.
- Votre fauteuil roulant électrique GRAND TOURER est équipé de moteurs de moyeu électriques qui ne nécessitent pas de lubrification. Veuillez ne pas lubrifier les moteurs.

Question	Possible Causes	Réponse
Pourquoi le Grand Tourer n'a-t-il PAS DE PUISSANCE ?	<ul style="list-style-type: none">● L'alimentation du système de contrôle n'est pas connectée.● Le processeur et le joystick du système de contrôle ne sont pas connectés.● La charge de la batterie est trop faible.	<ul style="list-style-type: none">● Connectez la batterie.● Assurez-vous que toutes les connexions entre le joystick, le processeur et la batterie sont bien serrées.● Chargez la batterie.
Pourquoi mon fauteuil électrique émet-il un bip et ne bouge-t-il pas ?	<ul style="list-style-type: none">● Mode roue libre engagé.● Capacité atteinte.● Autre code d'erreur.	<ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que les interrupteurs du moteur arrière sont en mode POWER, les roues arrière doivent être verrouillées.● Contactez Travel Buggy si un autre code d'erreur est présent.

GARANTIE LIMITÉE

L'acheteur de ce produit bénéficie d'une garantie limitée, offerte par Travel Buggy et ses filiales, sur les composants suivants et pendant les périodes suivantes à compter de la date d'achat :

GARANTIE 5 ANS - Châssis principal

GARANTIE 2 AN - Moteur

GARANTIE 2 AN - Système de contrôle

GARANTIE 1 AN - batterie

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS - Sur les pièces d'usure, telles que les pneus, le rembourrage des accoudoirs, les caches des boutons de joystick, les boutons de joystick, le coussin d'assise et le rembourrage du dossier.

Cette garantie est valable uniquement pour le remplacement des pièces défectueuses. Toute pièce sous garantie sera remplacée et expédiée à votre domicile. Les frais d'entretien et de main-d'œuvre, le cas échéant, pour le remplacement des pièces sous garantie sont à la charge de l'utilisateur.

Grâce à sa conception simple, la plupart des pièces peuvent être facilement remplacées par l'utilisateur final sans l'intervention d'un technicien professionnel. Cependant, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel pour l'entretien et la réparation afin de garantir un travail correct.

La garantie couvre uniquement les dommages **NON INTENTIONNELS**.

La garantie ne couvre pas :

- Les produits endommagés par négligence de l'utilisateur.
- Les produits endommagés accidentellement.
- Les produits endommagés intentionnellement.
- Les produits ayant fait l'objet d'une négligence.
- Les produits ayant subi des abus.
- Les produits mal stockés.
- Les produits mal manipulés.
- Les produits mal utilisés.
- Les produits ayant subi une mauvaise utilisation.
- Les produits modifiés de manière non autorisée.

La garantie est non transférable et valable uniquement pour l'acheteur initial du fauteuil roulant.

Travel Buggy remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui présente une défaillance pendant la période de garantie.

CONTACT & SUPPORT

Vous trouverez l'utilisation et l'entretien de votre Grand Tourer très simples et faciles, mais si vous avez des questions, veuillez contacter Travel Buggy.

NOTRE HOTLINE CLIENT

Canada: 1.888.56.BUGGY (28449)

ÉTATS-UNIS: 1.855.56.BUGGY (28449)

Additional images and videos are available on our website.

NOTRE SITE

Canada: www.travelbuggy.com

ÉTATS-UNIS: us.travelbuggy.com

COURRIER

contact@travelbuggy.com